


Pacientský terminál PAT

Uživatelská příručka

Prehľad

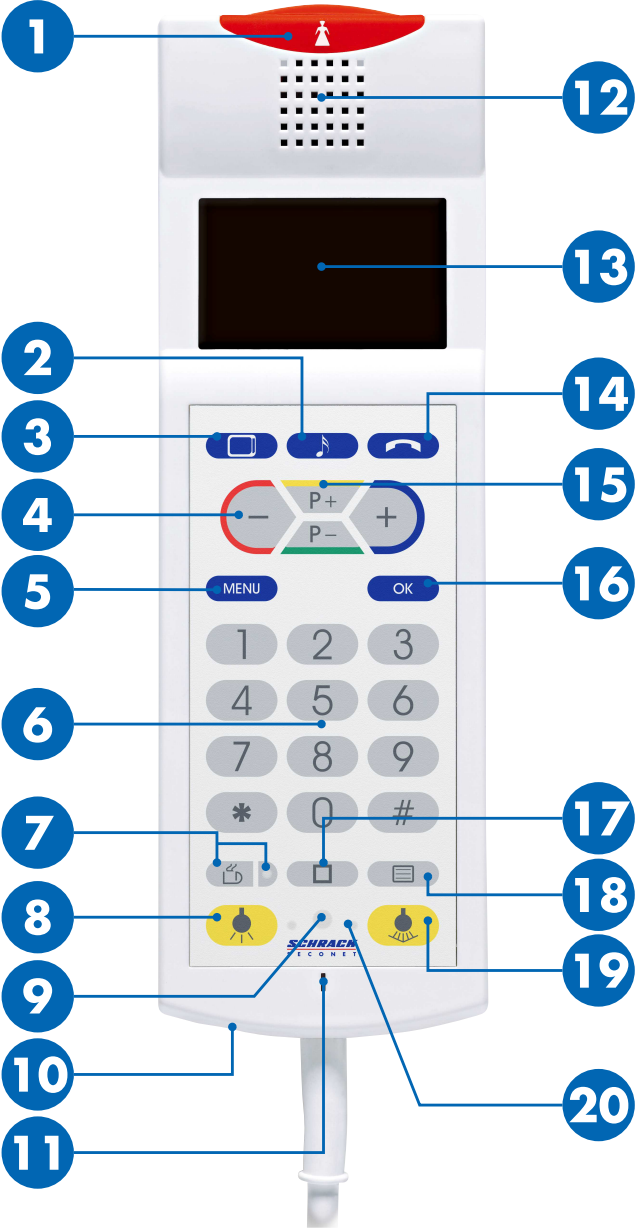

- 1 Tlačidlá privolania
- 2 Rádio tlačidlo
- 3 TV tlačidlo
- 4 -/+ tlačidlo
- 5 Menu tlačidlo
- 6 Numerická klávesnica
- 7 Tlačidlo privolanie služby s LED
- 8 Izbové svetlo
- 9 Infračervený prijímač (voliteľné)
- 10 Pripojenie slúchadiel
- 11 Mikrofón
- 12 Reproduktor
- 13 Displej
- 14 Telefónne tlačidlo
- 15 Tlačidlá výberu programu
- 16 Potvrdzovacie tlačidlo
- 17 Tlačidlo špeciálnej funkcie
- 18 Teletext tlačidlo
- 19 Svetlo na čítanie
- 20 LED tlačidla svetla



UPOZORNENIE

Nepoužívajte na privolanie pomoci

Kábel a zariadenie neslúži na privolanie pomoci. Nepoužívajte zariadenie na dvíhanie sa.

Prevádzka

Privolanie zdravotníckeho personálu

Tlačidlo privolania  **1** nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

Privolanie zdravotníckeho personálu

Stlačte tlačidlo  **1**.

- Tlačidlo privolania  **1** sa rozsvieti.

Odpovede zdravotníckemu personálu

1. Z reproduktora zaznie gong **12** a tlačidlo privolania bliká.
2. Použite patientský terminál ako telefón na rozprávanie sa s personálom.
3. Zdravotnícky personál ukončí hovor na konci rozhovoru.

Privolanie služby

LED tlačidlo nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

Stlačte tlačidlo privolanie služby  **7**.

- LED tlačidlo privolania služby  **7** sa rozsvieti.

Služobný personál Vám zavolá na zariadenie alebo príde osobne.

Zapnutie a vypnutie svetla

LED tlačidiel svetla **20** nepretržite svietia, vďaka čomu je ľahké ich lokalizovať v tme.

Izbové svetlo (voliteľné)

Stlačte tlačidlo izbové svetlo  **8** krátko.

- Izbové svetlo je zapnuté alebo vypnuté.

Svetlo na čítanie (voliteľné)

Stlačte tlačidlo svetlo na čítanie  **19** krátko.

- Svetlo na čítanie je zapnuté alebo vypnuté.

Funkcie menu

Nastavenie jasu displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU** **5**.
2. Vyberte **Brightness** na displeji **13** použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **15**.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom **16**.
4. Nastavte želaný jas použitím **-/+** tlačidiel **4**.
5. Použite tlačidlo menu **MENU** **5** na opustenie menu.

Nastavenie kontrastu displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU** **5**.
2. Vyberte **Contrast** na displeji **13** použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **15**.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom **16**.
4. Nastavte želaný kontrast použitím **-/+** tlačidiel **4**.
5. Použite tlačidlo menu **MENU** **5** na opustenie menu.

Nastavenie hlasitosti

1. Stlačte tlačidlo **MENU** **5**.
2. Vyberte **Volume** na displeji **13** použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **15**.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom **16**.
4. Vyberte pre ktorú funkciu má byť hlasitosť nastavená použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **15**.
5. Nastavte želanú hlasitosť použitím **-/+** tlačidiel **4**.
6. Použite tlačidlo menu **MENU** **5** na opustenie menu.

Nastavenie zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **MENU** **5**.
2. Vyberte **Ring tones** na displeji **13** použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **15**.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom **16**.
4. Nastavte želaný tón zvonenia použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **15**.
5. Použite tlačidlo menu **MENU** **5** na opustenie menu.

Voliteľné funkcie

TV

Zapnutie a vypnutie TV

Stlačte tlačidlo TV  3 na zapnutie alebo vypnutie TV.

- TV je zapnutý a na displeji sa zobrazí posledný pozieraný kanál 13.

Výber kanála

Zadajte číslo kanálu použitím numerickej klávesnice 6 alebo prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** 15.

Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor 12 alebo slúchadlá (prípojovacia zásuvka 10).

Nastavte želanú hlasitosť použitím **-/+** tlačidiel 4.

Vyvolanie teletextu

1. Stlačte tlačidlo teletext  15 na vyvolanie alebo opustenie teletext módu.
2. Zadajte číslo strany použitím numerickej klávesnice 6 alebo prepnite na ďalšiu stranu použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** 15.

Rádio

Zapnutie a vypnutie rádia

Stlačte tlačidlo rádio  2 na zapnutie alebo vypnutie rádia.

- Rádio je zapnuté a na displeji sa zobrazí posledný počúvaný kanál 13.

Výber kanála

Zadajte číslo kanálu použitím numerickej klávesnice 6 alebo prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** 15.

Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor 12 alebo slúchadlá (prípojovacia zásuvka 10).

Nastavte želanú hlasitosť použitím **-/+** tlačidiel 4.

Telefonovanie

Prijatie hovoru

1. Prijmite prichádzajúci hovor pomocou tlačidla telefonovanie  14.
2. Nastavte želanú hlasitosť použitím **-/+** tlačidiel 4.
3. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14 na ukončenie hovoru po konverzácii.

Uskutočnenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14.
2. Stlačte tlačidlo numerickej klávesnice pre verejnú telefónnu sieť (obvykle 0, overte si to u personálu).
3. Zadajte želané telefónne číslo použitím numerickej klávesnice 6.
4. Potvrďte s **OK** tlačidlom 16.
5. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14 na ukončenie hovoru po konverzácii.

Vytočenie posledného čísla

1. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14.
2. Na displeji sa zobrazí posledných desať volaných čísel 13.
3. Vyberte želané číslo použitím **-/+** tlačidiel 4.
4. Potvrďte s **OK** tlačidlom 16.
5. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14 na ukončenie hovoru po konverzácii.

Ovládanie žalúzií

1. Stlačte tlačidlo špeciálnej funkcie  17.
2. Vyberte **Blinds** na displeji 13 použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** 15.
3. Vytiahnite alebo zatiahnite žalúzie použitím **-/+** tlačidiel 4.

Infračervený prijímač

Infračervený prijímač sa používa na vzdialenú kontrolu patientského terminálu kontrolnými zariadeniami.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199