


Hasta El Seti PAT

Kullanım kılavuzu

Genel bakış

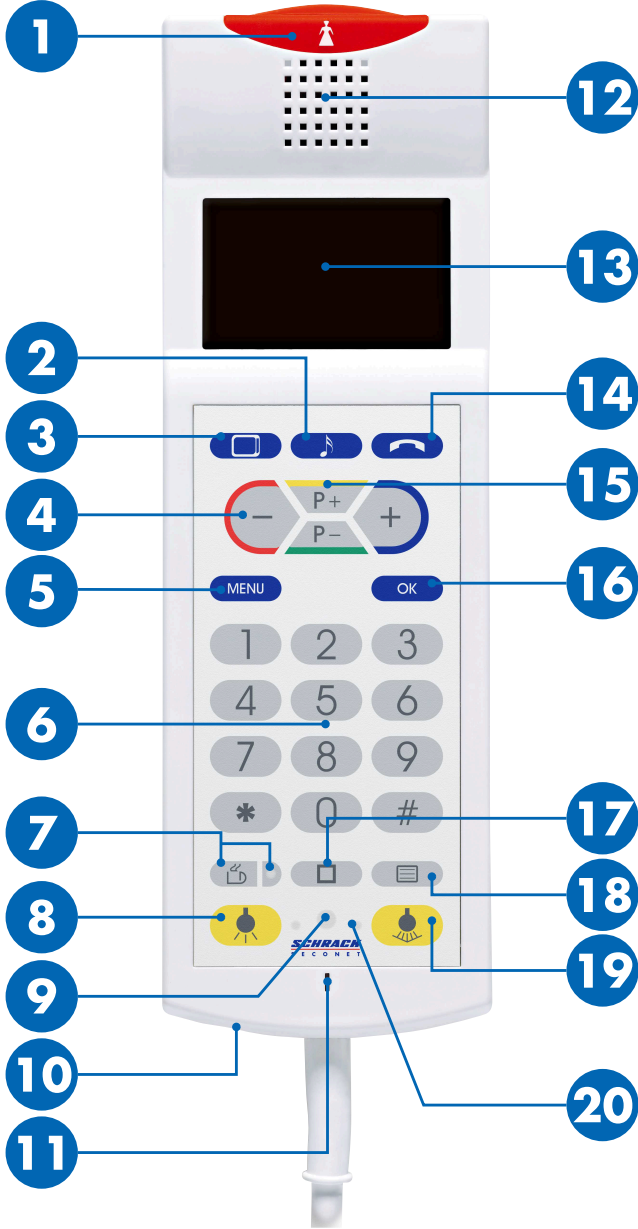

- 1 Çağrı butonu
- 2 Radyo butonu
- 3 TV butonu
- 4 -/+ butonu
- 5 Menü butonu
- 6 Sayısal tuş takımı
- 7 LED'li servis çağrı butonu
- 8 Oda lambası
- 9 Kızılötesi alıcı (opsiyonel)
- 10 Kulaklık bağlantısı
- 11 Mikrofon
- 12 Hoparlör
- 13 Ekran
- 14 Telefon butonu
- 15 Program seçim butonları
- 16 Onay butonu
- 17 Özel fonksiyon butonu
- 18 Teletext butonu
- 19 Okuma lambası
- 20 LED'li lamba butonu



DİKKAT

Kalkmaya yardım için kullanmayın

Kablo ve cihaz kalkmaya yardımcı değildir. Cihazı kullanarak kendinizi yukarı kaldırmayın.

İşletme

Bakım personeli çağırısı

Çağrı butonu  1 sürekli yanar, böylece karanlıkta yeri daha kolay bulunur.

Bakım personeli arama

Butona  1 basılır.

► Çağrı butonu  1 yanar.

Bakım personel çağrı cevabı

1. Hoparlörden gong sesi duyulur  12 ve çağrı butonu yanıp söner.
2. Hasta el seti bakım personeli ile konuşmak için telefon gibi kullanılır.
3. Bakım personeli görüşmenin sonunda aramayı sonlandırır.

Servis çağırısı

Buton LED'i sürekli yanar, böylece karanlıkta yeri daha kolay bulunur.

Çağrı butonuna  7 basılır.

► Servis çağrı buton LED'i  7 yanar.

Servis personeli hastayı ya arayacak yada bizzat yanına gidecektir.

Aydınlatma açma ve kapatma

Aydınlatma butonlarının LED'i  20 sürekli yanar, böylece karanlıkta butonlar daha kolay bulunur.

Oda lambası (opsiyonel)

Oda lambası butonuna  8 kısa basılır.

► Oda lambası açılır veya kapanır.

Okuma lambası (opsiyonel)

Okuma lambası butonuna  19 kısa basılır.

► Okuma lambası açılır veya kapanır.

Menü fonksiyonları

Ekran parlaklık ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-**  15 kullanılarak **Parlaklık** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. **-/+** butonları  4 kullanılarak istenilen parlaklık ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Ekran kontrast ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-**  15 kullanılarak **Kontrast** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. **-/+** butonları  4 kullanılarak istenilen kontrast ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Ses ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-**  15 kullanılarak **Ses** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. Program seçim butonları **P+/P-**  15 kullanılarak hangi ses seviyesinin ayarlanacağı seçilir.
5. **-/+** butonları  4 kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.
6. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Zil sesi ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-**  15 kullanılarak **Zil sesi** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. Program seçim butonları **P+/P-**  15 kullanılarak istenilen zil sesi ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Opsiyonel fonksiyonlar

TV

TV setini açma ve kapatma

TV setini açmak veya kapatmak için TV butonuna  **3** basılır.

- TV seti açılır ve izlenen son kanal ekranda **13** gösterilir.

Kanal seçimi

Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak kanal numarası girilir veya program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak sonraki kanala geçilir.

Ses ve ses seviyesi ayarı

Ses çıkışı hoparlör **12** veya bağlı kulaklıklardan (bağlantı soketi **10**) sağlanır.

-/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.

Teletext

1. Teletext modunu getirmek veya çıkmak için teletext butonuna  **18** basılır.
2. Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak sayfa numarası girilir veya program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak sonraki sayfaya geçilir.

Radio

Radio açma ve kapatma

Radyoyu açmak veya kapatmak için Radyo butonuna  **2** basılır.

- Radyo açılır ve dinlenen son kanal ekranda **13** gösterilir.

Kanal seçimi

Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak kanal numarası girilir veya program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak sonraki kanala geçilir.

Ses ve ses seviyesi ayarı

Ses çıkışı hoparlör **12** veya bağlı kulaklıklardan (bağlantı soketi **10**) sağlanır.

-/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.

Telefon

Bir aramayı cevaplama

1. Telefon butonu  **14** kullanılarak gelen bir arama cevaplanır.
2. -/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.
3. Görüşmeden sonra aramayı sonlandırmak için telefon butonuna  **14** basılır.

Bir telefon görüşmesi yapma

1. Telefon butonuna  **14** basılır.
2. Harici telefon aramaları için sayısal tuşa basılır (Genellikle 0 kullanılır, personel ile kontrol edilmelidir).
3. Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak istenilen telefon numarası aranır.
4. **OK** **16** butonu ile onaylanır.
5. Görüşmeden sonra aramayı sonlandırmak için telefon butonuna  **14** basılır.

Son numarayı tekrar arama

1. Telefon butonuna  **14** basılır.
2. Aranan son on telefon numarası ekranda **13** gösterilir.
3. -/+ butonları **4** kullanılarak istenilen numara seçilir.
4. **OK** **16** butonu ile onaylanır.
5. Görüşmeden sonra aramayı sonlandırmak için telefon butonuna  **14** basılır.

Panjur kontrol

1. Özel fonksiyon butonuna  **17** basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak Panjur ekran **13** üzerinden seçilir.
3. -/+ butonları **4** kullanılarak panjur açılır yada kapanır.

Kızılötesi alıcı

Kızılötesi alıcı, hasta el setini çevredeki kontrol cihazları aracılığıyla uzaktan kontrol etmek için kullanılır.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199