




# Terminal patient PAT

## Manuel d'utilisation

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Aperçu

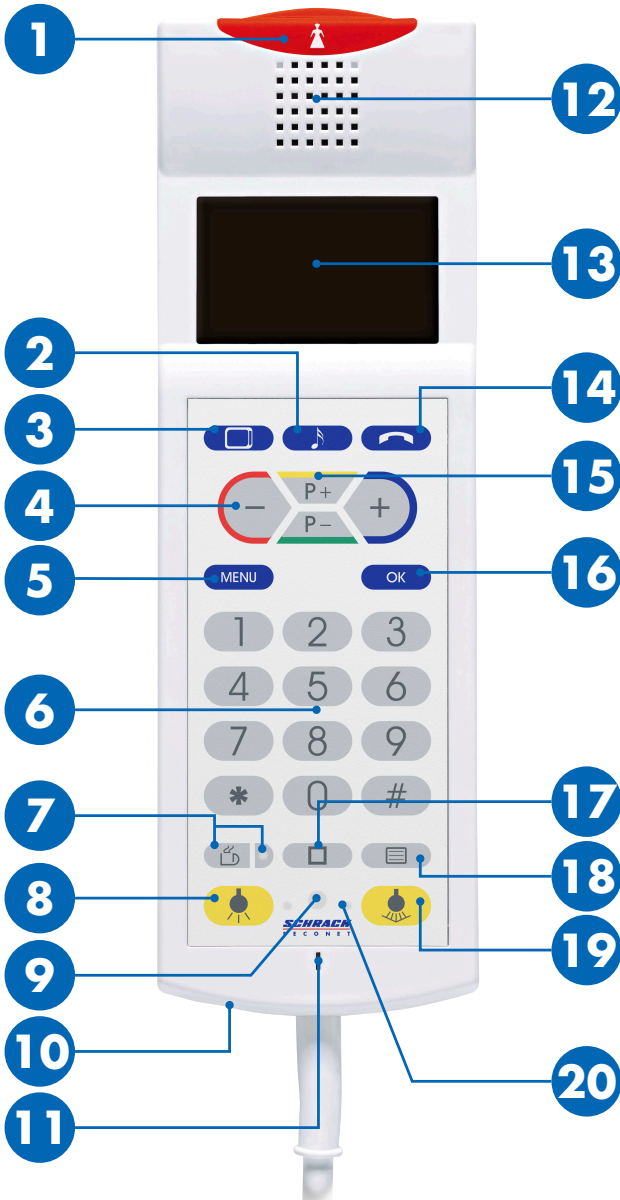

<b>1</b>	<b>Bouton d'appel</b>
<b>2</b>	<b>Bouton radio</b>
<b>3</b>	<b>Bouton TV</b>
<b>4</b>	<b>Bouton -/+</b>
<b>5</b>	<b>Bouton menu</b>
<b>6</b>	<b>Pavé numérique</b>
<b>7</b>	<b>Bouton d'appel de service avec LED (voyant)</b>
<b>8</b>	<b>Lumière de la chambre</b>
<b>9</b>	<b>Récepteur infrarouge (en option)</b>
<b>10</b>	<b>Prise casque</b>
<b>11</b>	<b>Microphone</b>
<b>12</b>	<b>Haut-parleur</b>
<b>13</b>	<b>Écran</b>
<b>14</b>	<b>Bouton téléphone</b>
<b>15</b>	<b>Boutons de sélection de programme</b>
<b>16</b>	<b>Bouton de confirmation</b>
<b>17</b>	<b>Bouton de fonction spéciale</b>
<b>18</b>	<b>Bouton télétexte</b>
<b>19</b>	<b>Lampe de lecture</b>
<b>20</b>	<b>LED du bouton de lumière (voyant de position)</b>



### **ATTENTION**

#### **Ne pas utiliser pour se lever**

Le câble et le dispositif ne sont pas une aide pour se lever. Ne pas tirer sur le dispositif pour se redresser.

## Appel personnel soignant

Le bouton d'appel  1 est éclairé en permanence pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans le noir.

### Appeler le personnel soignant

Appuyer sur le bouton  1.

► Le bouton d'appel  1 s'allume.

### Réponse du personnel soignant

1. Un gong retentit dans le haut-parleur 12 et le bouton d'appel clignote.
2. Utiliser le terminal patient comme un téléphone pour discuter avec le personnel soignant.
3. Le personnel soignant met fin à l'appel à l'issue de la conversation.

## Appel de service

La LED du bouton est allumée en permanence pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans le noir.

Appuyer sur le bouton d'appel de service  7.

► La LED du bouton d'appel de service  7 s'allume.

Le personnel de service vous appellera directement sur le dispositif ou viendra en personne.

## Allumer et éteindre la lumière

Les LED des boutons de lumière 20 sont allumées en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

### Lumière de la chambre (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lumière dans la chambre  8.

► La lumière s'allume ou s'éteint.

### Lampe de lecture (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lampe de lecture  19.

► La lampe de lecture s'allume ou s'éteint.

## Fonctions de menu

### Ajuster la luminosité de l'écran

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Brightness** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+ / P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Ajuster la luminosité comme souhaité à l'aide des boutons **- / +** 4.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

### Ajuster le contraste de l'écran

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Contrast** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+ / P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Ajuster le contraste comme souhaité à l'aide des boutons **- / +** 4.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

### Ajuster le volume

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Volume** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+ / P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Sélectionner la fonction pour laquelle vous souhaitez ajuster le volume à l'aide des boutons de sélection de programme **P+ / P-** 15.
5. Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **- / +** 4.
6. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.


### Ajuster la sonnerie

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Ring tones** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+ / P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Choisir la sonnerie souhaitée à l'aide des boutons de sélection de programme **P+ / P-** 15.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

# Fonctions en option

## Télévision

### Allumer et éteindre la TV

Appuyer sur le bouton TV  3 pour allumer ou éteindre la TV.

► Le téléviseur s'allume et la dernière chaîne regardée est indiquée à l'écran 13.

### Sélectionner une chaîne


Saisir le numéro de chaîne souhaitée à l'aide du pavé numérique 6 ou passer à la chaîne suivante à l'aide des boutons de sélection de programme **P+**/**P-** 15.

### Ajuster le son et le volume

Sortie du son par les haut-parleurs 12 ou le casque branché (prise casque 10).

Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.

### Afficher le télétexte

1. Appuyer sur le bouton télétexte  18 pour activer ou désactiver le mode télétexte.
2. Saisir le numéro de page souhaitée à l'aide du pavé numérique 6 ou passer à la page suivante à l'aide des boutons de sélection de programme **P+**/**P-** 15.

## Radio

### Allumer et éteindre la radio

Appuyer sur le bouton radio  2 pour allumer ou éteindre la radio.

► La radio s'allume et la dernière station de radio écoutée est affichée à l'écran 13.

### Sélectionner une chaîne

Saisir le numéro de chaîne souhaitée à l'aide du pavé numérique 6 ou passer à la chaîne suivante à l'aide des boutons de sélection de programme **P+**/**P-** 15.



### Ajuster le son et le volume

Sortie du son par les haut-parleurs 12 ou le casque branché (prise casque 10).



Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.

## Téléphone



### Accepter un appel

1. Pour accepter un appel entrant, utiliser le bouton téléphone  14.
2. Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
3. Appuyer sur le bouton téléphone  14 pour mettre fin à l'appel à l'issue de la conversation.


### Passer un appel téléphonique

1. Appuyer sur le bouton téléphone  14.
2. Appuyer sur une touche numérique pour passer un appel sur le réseau téléphonique interurbain/public (en général 0, vérifier auprès du personnel).
3. Appeler le numéro de téléphone souhaité à l'aide du pavé numérique 6.
4. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
5. Appuyer sur le bouton téléphone  14 pour mettre fin à l'appel à l'issue de la conversation.

### Rappeler le dernier numéro

1. Appuyer sur le bouton téléphone  14.
2. Les dix derniers numéros appelés s'affichent alors à l'écran 13.
3. Sélectionner le numéro souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
4. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
5. Appuyer sur le bouton téléphone  14 pour mettre fin à l'appel à l'issue de la conversation.

### Contrôle des stores

1. Appuyer sur le bouton de fonction spéciale  17.
2. Sélectionner **Blinds** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+**/**P-** 15.
3. Pour ouvrir ou fermer les stores, utiliser les boutons **-/+** 4.

### Récepteur infrarouge

Le récepteur infrarouge permet de contrôler à distance le terminal patient grâce à une télécommande à proximité.



FR

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T