


Patiënten terminal PAT-L

Gebruikershandleiding

Overzicht

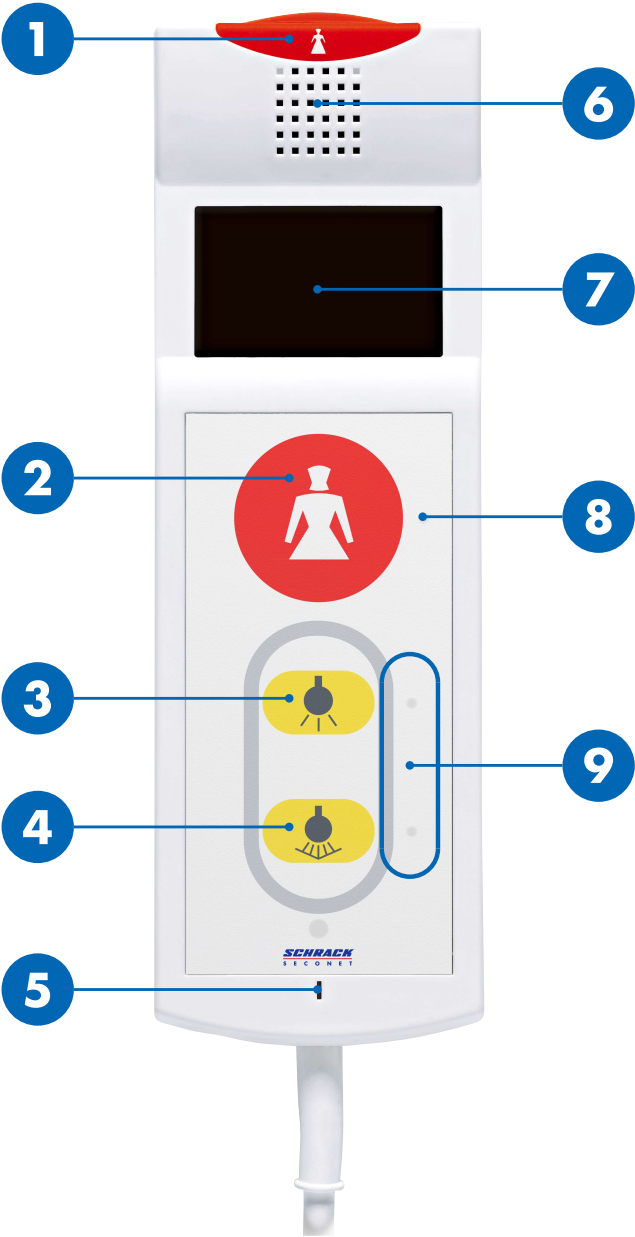

- 1 / 2 Verpleegkundige oproepertoetsen
- 3 Kamerverlichting
- 4 Bedleesverlichting
- 5 Microfoon
- 6 Luidspreker
- 7 Display
- 8 Geruystel LED verpleegkundige oproepertoets
- 9 Oriëntatie LED verlichting



VOORZICHTIG

Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken

Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf niet op met behulp van dit toestel.

Oproep verplegend personeel

De oproepertoets  1 en de LED 3 zijn continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is, zelfs in het donker.

Verplegend personeel oproepen

Druk op de oproepertoets  1 of 2.

- De oriëntatie LED's 8 van de oproepertoets  1 lichten nu fel op.

Binnenkomende oproep verplegend personeel

1. Oproepsignaal is hoorbaar over de luidspreker 6 en de oproepertoets/LED knippert.
2. Houdt de patiëntterminal tegen het oor zoals een telefoonhoorn.
3. Het verplegend personeel eindigt het gesprek en verbreekt de verbinding.

Verlichting aan of uitschakelen

De oriëntatie LED van de lichttoetsen 9 zijn continue verlicht, waardoor de toetsen gemakkelijk te lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

Kamerverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets kamerverlichting  3.

- De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Bedleesverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets bedleesverlichting  4.

- De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199