


Bouton poire de lit BT-B

Manuel d'utilisation

Aperçu

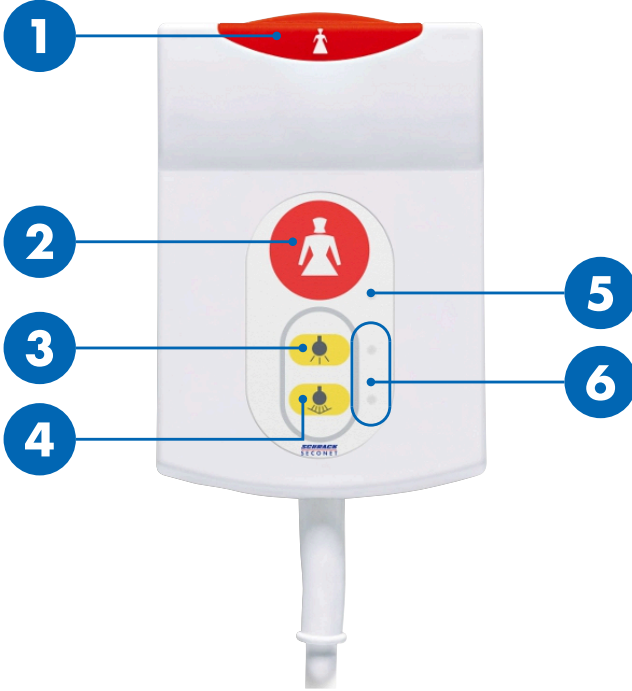

- 1 / 2** Boutons d'appel
- 3** Lumière de la chambre
- 4** Lampe de lecture
- 5** LED du bouton d'appel (voyant rassurant)
- 6** LED du bouton de lumière (voyant de position)



ATTENTION

Ne pas utiliser pour se lever

Le câble et le dispositif ne sont pas une aide pour se lever. Ne pas tirer sur le dispositif pour se redresser.

Appel personnel soignant

Le bouton d'appel  **1** et la LED **5** sont allumés en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

Appeler le personnel soignant

Appuyer sur le bouton d'appel  **1** ou **2**.

- ▶ Le bouton d'appel  **1** et la LED **5** s'allument.

Allumer et éteindre la lumière

Les LED des boutons de lumière **6** sont allumées en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

Lumière de la chambre (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lumière dans la chambre  **3**.

- ▶ La lumière s'allume ou s'éteint.

Lampe de lecture (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lampe de lecture

 **4**.

- ▶ La lampe de lecture s'allume ou s'éteint.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199