


# Pasientterminal PAT-E

---

**Bruksanvisning**

# Oversikt

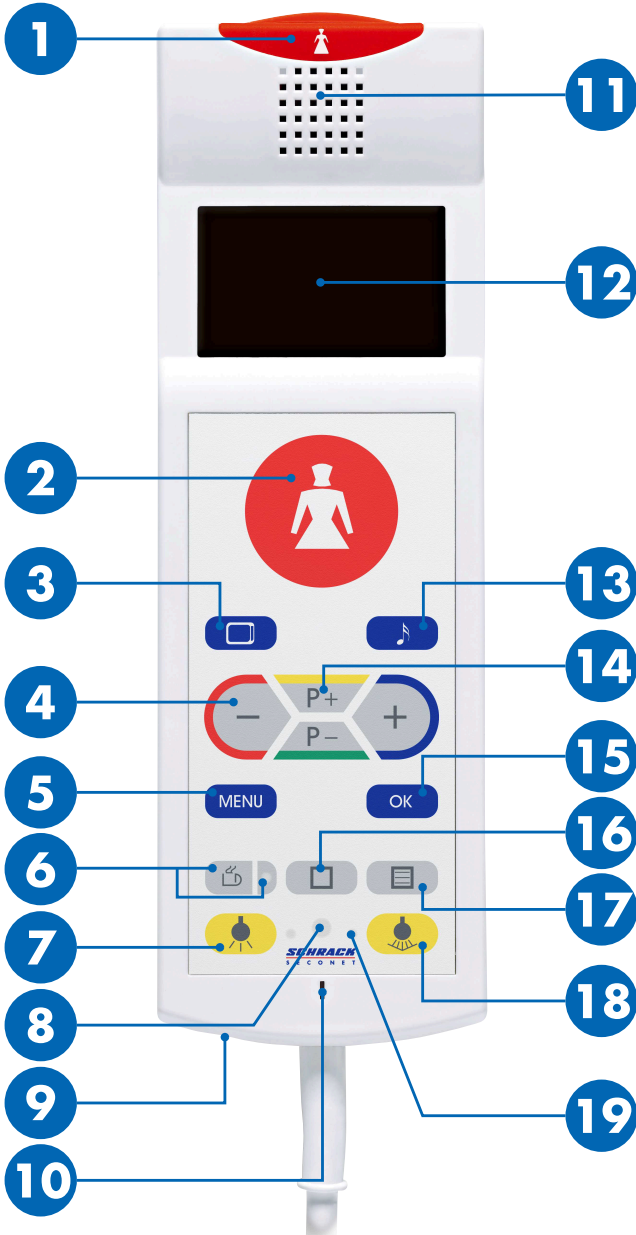

- 1 / 2 Tilkallingsknapp
- 3 TV-knapp
- 4 -/+ -knapp
- 5 Meny-knapp
- 6 Tilkalle service-knapp med LED-lys (søkelys)
- 7 Romlys
- 8 Infrarød mottaker (valgfri)
- 9 Hodetelefonuttak
- 10 Mikrofon
- 11 Høytaler
- 12 Display
- 13 Radio-knapp
- 14 Programvalg-knapper
- 15 Bekreftelsesknap
- 16 Spesialfunksjon-knapp
- 17 Tekst-TV-knapp
- 18 Leselys
- 19 LED på lysknapp (søkelys)



#### **FORSIKTIG**

#### **Ikke bruk som hjelp til å reise seg opp**

Ledning og apparat er ikke hjelp til å reise seg opp. Ikke dra deg selv opp ved bruk av apparatet.

# Drift

## Tilkalling av omsorgspersonell


Tilkallingsknappen  1 lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### Tilkall omsorgspersonell

Trykk på tilkallingsknappen  1 eller  2.

- ▶ Tilkallingsknappen  1 lyser opp.

### Svar fra omsorgspersonell

1. Pling-lyd over høyttaleren  11 og tilkallingsknappen blinker.
2. Bruk pasientterminalen som en telefon for å snakke med omsorgspersonellet.
3. Omsorgspersonellet avslutter samtalen når denne er ferdig.

## Tilkall service

LED-lyset på lysknappene lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Trykk på knappen for å tilkalle service  6.

- ▶ Knappen for å tilkalle service  6 lyser opp.

Servicepersonalet vil enten ringe deg opp på apparatet eller komme til deg personlig.

## Skru lyset av og på

LED-lyset på lysknappene  19 lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### Romlys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for romlys  7.

- ▶ Romlyset skrur på eller av.







### Leselys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for leselys  18.







- ▶ Leselyset skrur på eller av.

# Menyfunksjoner

## Sette lysstyrke på display

1. Trykk på knappen **MENY**  5.
2. Velg **Lysstyrke** på displayet  12 ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-**  14.
3. Bekreft med **OK**-knappen  15.
4. Still inn den ønskede lysstyrken med **-/+** knappene  4.
5. Bruk meny-knappen **MENY**  5 for å forlate menyen.

## Sette kontrast på display

1. Trykk på knappen **MENY**  5.
2. Velg **Kontrast** på displayet  12 ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-**  14.
3. Bekreft med **OK**-knappen  15.
4. Still inn den ønskede kontrasten med **-/+** knappene  4.
5. Bruk meny-knappen **MENY**  5 for å forlate menyen.

## Sette lydstyrke

1. Trykk på knappen **MENY**  5.
2. Velg **Lydstyrke** på displayet  12 ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-**  14.
3. Bekreft med **OK**-knappen  15.
4. Velg funksjonen lydstyrken skal stilles for ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-**  14.
5. Still inn den ønskede lydstyrken med **-/+** knappene  4.
6. Bruk meny-knappen **MENY**  5 for å forlate menyen.

# Valgfrie funksjoner

## TV

### Skru TV-en på og av

Trykk på TV-knappen  **3** for å skru TV-en av eller på.

- ▶ TV-en er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet **12**.

### Velg kanal

Bytt kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+/P-** **14**.

### Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler **11** eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak **9**).

Still inn den ønskede lydstyrken med **-/+** knappene **4**.

### Sette på tekst-TV

1. Trykk knappen for tekst-TV  **17** for å gå inn eller ut av tekst-TV.
2. Gå til neste side ved å bruke programvalg-knappene **P+/P-** **14**.

## Radio

### Skru radio av og på

Trykk på radio-knappen  **13** for å skru radioen av eller på.

- ▶ Radioen er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet **12**.

### Velg kanal


Bytt kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+/P-** **14**.

### Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler **11** eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak **9**).

Still inn den ønskede lydstyrken med **-/+** knappene **4**.

### Kontroll av persiennene

1. Trykk spesialfunksjon-knappen  **16**.
2. Velg **Persienn** på displayet **12** ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-** **14**.
3. Åpne eller lukke persiennene med **-/+** knappene **4**.

## Infrarød mottaker

Den infrarøde mottakeren brukes for å fjernstyre pasientterminalen gjennom miljøkontrollenheter.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna  
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

## **schrack-seconet.com**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199