



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

HE

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET

פונקציות אופציונליות

טלויזיה

הדלקה וכיבוי של מכשיר הטלויזיה

- לחץ על כפתור הטלויזיה d **3** כדי לכבות ולהדליק את מכשיר הטלויזיה.
- ◀ מכשיר הטלויזיה דולק עם הערוץ האחרון שנצפה יוצג על המסך **13**.

בחירת ערוץ

- הזן את מספר הערוץ ע"י שימוש במקלדת המספרים **6** או העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P-/P+ 15**.

הגדרות קול ועוצמת שמע

- פלט הקול דרך הרמקולים **12** או האזניות המחוברות (שקע החיבור **10**).
- הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב +/- כפתורי **4**.

הצגת טלטקסט

1. לחץ על כפתור הטלטקסט **f 18** כדי להציג או לעזוב את מצב הטלטקסט.
2. הזן את מספר העמוד ע"י שימוש במקלדת המספרים **6** או העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P-/P+ 15**.

רדיו

כיבוי והדלקה של הרדיו

- לחץ על כפתורי הווידאו **e 2** כדי להדליק ולכבות את הרדיו.
- ◀ מכשיר הרדיו דולק עם התחנה האחרונה שנשמעה תוצג על המסך **13**.

בחירת ערוץ

- הזן את מספר הערוץ ע"י שימוש במקלדת המספרים **6** או העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P-/P+ 15**.

הגדרות קול ועוצמת שמע

- פלט הקול דרך הרמקולים **12** או האזניות המחוברות (שקע החיבור **10**).
- הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב +/- כפתורי **4**.

טלפון

קבלת שיחה

1. קבל שיחה נכנסת ע"י שימוש בכפתור הטלפון **14**.
2. הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב +/- כפתורי **4**.
3. לחץ על כפתור הטלפון **14** כדי לסיים את ההתקשרות לאחר השיחה.

ביצוע שיחת טלפון

1. לחץ על כפתור הטלפון **14**.
2. לחץ על כפתור המספר להחלפת רשת הטלפוניה קו טראנק/ציבורי (בדר"כ 0, אנא בדוק עם הצוות).
3. התקשר למספר הטלפון הרצוי ע"י שימוש במקלדת המספרים **6**.
4. אשר עם **OK** כפתור **16**.
5. לחץ על כפתור הטלפון **14** כדי לסיים את ההתקשרות לאחר השיחה.

חיג חוזר למספר האחרון

1. לחץ על כפתור הטלפון **14**.
2. עשרת מספרי הטלפון האחרונים שחויגו מופיעים על הצג **13**.
3. בחר את מספר הטלפון הרצוי ע"י שימוש ב +/- כפתורי **4**.
4. אשר עם **OK** כפתור **16**.
5. לחץ על כפתור הטלפון **14** כדי לסיים את ההתקשרות לאחר השיחה.

בקרי שליטה בתריסים

1. לחץ על כפתורי הפונקציות המיוחדות **g 17**.
2. בחר תריסים על הצג **13** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P-/P+ 15**.
3. פתיחה וסגירה של התריסים ע"י שימוש ב +/- כפתורי **4**.

מקלט אינפרה אדום

- השימוש במקלט אינפרה אדום הוא לצורך שליטה מרחוק במסוף המטופל בעזרת מכשירי השליטה הסביבתיים.

קריאה לצוות סיוע

לחצן הקריאה a 1 מואר באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הלחצנים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

יצירת קשר עם צוות הסיוע

- 1 לחץ על כפתור a
- 1 לחצן הקריאה a נדלק.

תשובות צוות הסיוע

1. רעשי גונג ברמקול 12 ולחצן הקריאה מהבהב.
2. השתמש במסוף המטופל כמו בטלפון כדי לדבר עם צוות הסיוע.
3. צוות הסיוע ינתק את ההתקשרות בסוף השיחה.

קריאת שירות

ה-LED של הלחצן מואר באופן תמידי, כך שקל יותר למצוא אותו, אפילו בחושך.

- 7 לחץ על לחצן קריאת השירות h
- 7 ה-LED של לחצן קריאת השירות h נדלק.

צוות הסיוע ייצור קשר דרך המכשיר או יגיע באופן אישי.

כיבוי והדלקה של התאורה

ה-LED של כפתורי התאורה 20 מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הכפתורים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

תאורת חדר (אופציונלי)

- 8 לחץ על כפתור תאורת החדר b לחיצה קצרה.
- 8 תאורת החדר נדלקת ונכבית.

תאורת קריאה (אופציונלי)

- 19 לחץ על כפתור תאורת החדר c לחיצה קצרה.
- 19 תאורת הקריאה נדלקת ונכבית.

פונקציות התפריט

הגדרת בהירות הצג

1. לחץ על כפתור תפריט 5.
2. בחר בהירות על הצג 13 ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית P-/P+ 15.
3. אשר עם OK כפתור 16.
4. הגדר את הבהירות הרצויה ע"י שימוש ב +/- כפתורי ה 4.
5. השתמש בכפתור התפריט תפריט 5 כדי לעזוב את התפריט.

הגדרת ניגודיות הצג

1. לחץ על כפתור תפריט 5.
2. בחר ניגודיות על הצג 13 ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית P-/P+ 15.
3. אשר עם OK כפתור 16.
4. הגדר את הבהירות הרצויה ע"י שימוש ב +/- כפתורי ה 4.
5. השתמש בכפתור התפריט תפריט 5 כדי לעזוב את התפריט.

הגדרת עוצמת שמע

1. לחץ על כפתור תפריט 5.
2. בחר עוצמת שמע על הצג 13 ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית P-/P+ 15.
3. אשר עם OK כפתור 16.
4. בחר לאיזו פונקציה יש להגדיר את עוצמת השמע ע"י שימוש בכפתורי הבחירה P-/P+ 15.
5. הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב +/- כפתורי ה 4.
6. השתמש בכפתור התפריט תפריט 5 כדי לעזוב את התפריט.

הגדרת רינגטון

1. לחץ על כפתור תפריט 5.
2. בחר רינגטונים על הצג 13 ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית P-/P+ 15.
3. אשר עם OK כפתור 16.
4. הגדר את הרינגטון הרצוי ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית P-/P+ 15.
5. השתמש בכפתור התפריט תפריט 5 כדי לעזוב את התפריט.

| | |
|----|--|
| 1 | לחצן קריאה |
| 2 | כפתור רדיו |
| 3 | כפתור טלוויזיה |
| 4 | כפתור +/- |
| 5 | כפתור תפריט |
| 6 | מקלדת מספרים |
| 7 | כפתור קריאת שירות עם LED (תאורת גילוי) |
| 8 | תאורת חדר |
| 9 | מקלט אינפרה אדום (אופציונלי) |
| 10 | חיבור אזניות |
| 11 | מיקרופון |
| 12 | רמקול |
| 13 | צג |
| 14 | כפתור טלפון |
| 15 | כפתורי בחירת תוכנית |
| 16 | כפתור אישור |
| 17 | כפתור פונקציה מיוחדת |
| 18 | כפתור טלטקסט |
| 19 | תאורת קריאה |
| 20 | LED של כפתור תאורה (תאורת גילוי) |


זהירות

אסור להשתמש בעזר לטיפוס

הכבל והמכשיר אינם עזר לטיפוס. אל תמשוך את עצמך מעלה ע"י שימוש במכשיר.



1 סקירה כללית

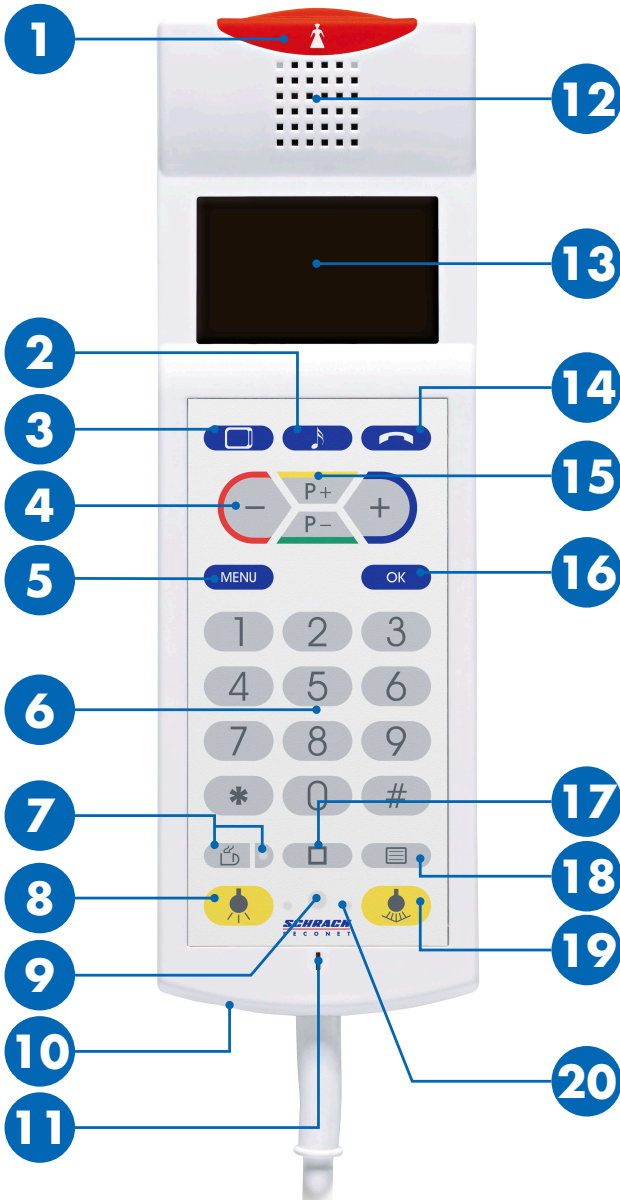



מסוף מטופל PAT

מדריך למשתמש

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T