


Pacienta termināls PAT

Lietotāja rokasgrāmata

Pārskats

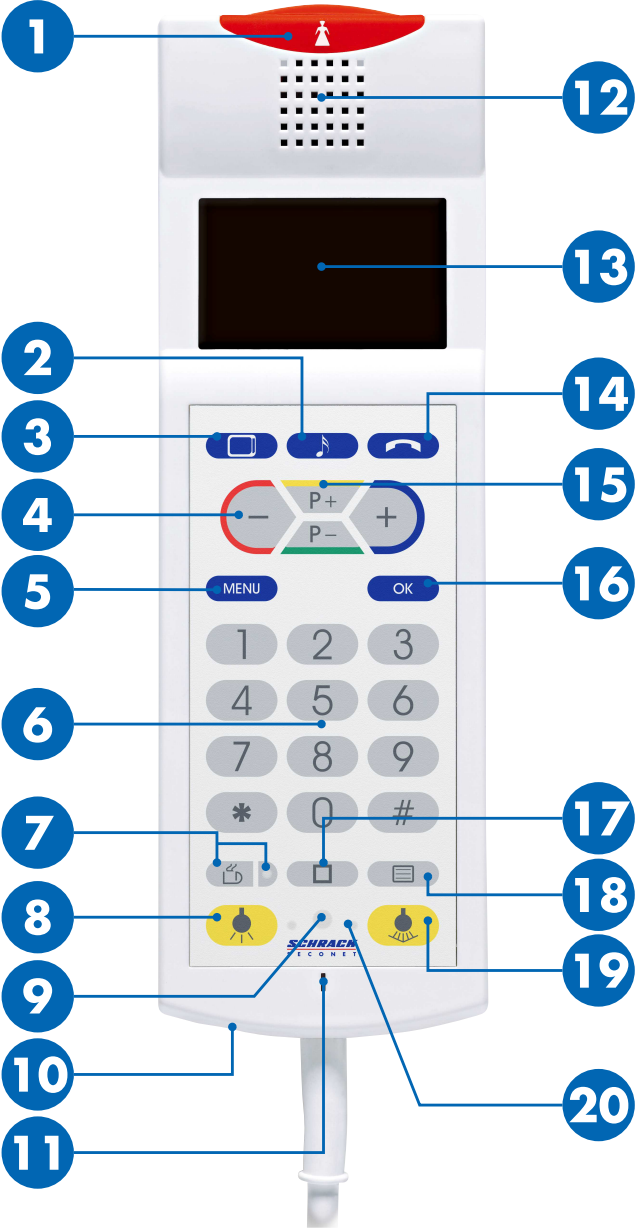

- 1 Izsaukuma poga
- 2 Radio poga
- 3 Televīzijas poga
- 4 -/+ poga
- 5 Izvēlnes poga
- 6 Cipartastatūra
- 7 Servisa izsaukuma poga ar LED (meklēšanas gaisma)
- 8 Telpas apgaismojums
- 9 Infrasarkanais uztvērējs (papildaprīkojums)
- 10 Austiņu savienojums
- 11 Mikrofons
- 12 Skaļrunis
- 13 Displejs
- 14 Tālrūpa poga
- 15 Programmu atlases pogas
- 16 Apstiprināšanas poga
- 17 Īpašo funkciju poga
- 18 Teleteksta poga
- 19 Lasīšanas gaisma
- 20 Gaismas pogas LED (meklēšanas gaisma)



UZMANĪBU

Neizmantojiet kā piecelšanās palīgīdzekli

Kabelis un ierīce nav piecelšanās palīgīdzekļi. Nepievelciet sevi, izmantojot ierīci.

Darbība

Aprūpes personāla izsaukšana

Izsaukuma poga  **1** ir pastāvīgi iedegta, lai to varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Kā izsaukt aprūpes personālu

Nospiediet pogu  **1**.

- Izsaukuma poga  **1** iedegas.

Atbildēšana aprūpes personālam

1. Skalrunī **12** dzirdams skaņas signāls un mirgo izsaukuma poga.
2. Pacienta terminālu izmantojiet kā tālruni, lai runātu ar aprūpes personālu.
3. Sarunas beigās aprūpes personāls izbeigs zvanu.

Servisa izsaukums

Pogas LED ir pastāvīgi iedegts, lai to varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Nospiediet servisa izsaukuma pogu  **7**.

- Servisa izsaukuma pogas LED  **7** iedegas.

Servisa personāls piezvanīs jums uz ierīci vai apmeklēs jūs.

Gaismas ieslēgšana un izslēgšana

Gaismas pogu **20** LED ir pastāvīgi iedegtas, lai pogas varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Telpas apgaismojums (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet telpas apgaismojuma pogu  **8**.

- Telpas apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts.

Lasišanas gaisma (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet lasišanas gaismas pogu  **19**.

- Lasišanas gaisma tiek ieslēgta vai izslēgta.

Izvēlnes funkcijas

Displeja spilgtuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU** **5**.
2. Displejā **13** atlasiet vienumu **Spilgtums**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.
3. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** **16**.
4. Iestatiet vēlamo spilgtumu, izmantojot **-/+** pogas **4**.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE** **5**.

Displeja kontrasta iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU** **5**.
2. Displejā **13** atlasiet vienumu **Kontrasts**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.
3. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** **16**.
4. Iestatiet vēlamo kontrastu, izmantojot **-/+** pogas **4**.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE** **5**.

Skaļuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU** **5**.
2. Displejā **13** atlasiet vienumu **Skaļums**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.
3. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** **16**.
4. Atlasiet, kurai funkcijai jāiestata skaļums, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.
5. Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas **4**.
6. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE** **5**.

Zvana signāla iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU** **5**.
2. Displejā **13** atlasiet vienumu **Zvana signāli**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.
3. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** **16**.
4. Iestatiet vēlamo zvana signālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE** **5**.

Papildfunkcijas

Televīzija

Televizora ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet televīzijas pogu  **3**, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

- ▶ Tiks ieslēgts televizors, un displejā **15** tiks rādīts pēdējais skatītais kanāls.

Kanāla izvēle

Ievadiet kanāla numuru, izmantojot cipartastatūru **6**, vai pārslēdziet nākamo kanālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.

Skaņas un skaļuma iestatīšana

Skaņa tiek izvadīta caur skaļruni **12** vai pievienotajām austiņām (savienojuma līgza **10**).

Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas **4**.

Teleteksta izsaukšana

1. Nospiediet teleteksta pogu  **18**, lai izsauktu teletekstu vai izietu no teleteksta režīma.
2. Ievadiet lapas numuru, izmantojot cipartastatūru **6**, vai pārejiet uz nākamo lapu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.

Radio

Radio ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet radio pogu  **2**, lai ieslēgtu vai izslēgtu radio.

- ▶ Tiks ieslēgts radio, un displejā **13** tiks parādīts pēdējais klausītais radio kanāls.

Kanāla izvēle

Ievadiet kanāla numuru, izmantojot cipartastatūru **6**, vai pārslēdziet nākamo kanālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.

Skaņas un skaļuma iestatīšana

Skaņa tiek izvadīta caur skaļruni **12** vai pievienotajām austiņām (savienojuma līgza **10**).

Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas **4**.

Tālrunis

Zvana pieņemšana

1. Pieņemiet ienākošo zvanu, nospiežot tālruņa pogu  **14**.
2. Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas **4**.
3. Nospiediet tālruņa pogu  **14**, lai pēc sarunas pabeigtu zvanu.

Tālruņa zvana veikšana

1. Nospiediet tālruņa pogu  **14**.
2. Nospiediet cipartaustiņu, lai pieslēgtos maģistrālajai līnijai / publiskajam ieslēgto tālruņu tīklam (parasti "0"; lūdzu, uzziniet pie personāla).
3. Zvaniet pa vajadzīgo tālruņa numuru, izmantojot cipartastatūru **6**.
4. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** **16**.
5. Nospiediet tālruņa pogu  **14**, lai pēc sarunas pabeigtu zvanu.

Pārzvanišana uz pēdējo numuru

1. Nospiediet tālruņa pogu  **14**.
2. Displejā **13** tiek parādīti pēdējie desmit numuri, uz kuriem veikti zvani.
3. Atlasiet vajadzīgo numuru, izmantojot **-/+** pogas **4**.
4. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** **16**.
5. Nospiediet tālruņa pogu  **14**, lai pēc sarunas pabeigtu zvanu.

Žalūziju vadība

1. Nospiediet īpašo funkciju pogu  **17**.
2. Displejā **13** atlasiet vienumu **Žalūzijas**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+/P-** **15**.
3. Atveriet vai aizveriet žalūzijas, izmantojot **-/+** pogas **4**.

Infrasarkanais uztvērējs

Infrasarkanais uztvērējs tiek lietots, lai nodrošinātu pacienta termināla tūlītību, izmantojot apkārtējās vides kontroles ierīces.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199