

**SCHRACK**  
**SECONET**

# Терминал пациента PAT-E


---

**Руководство пользователя**

**RU**

**HEALTH CARE**

# Обзор

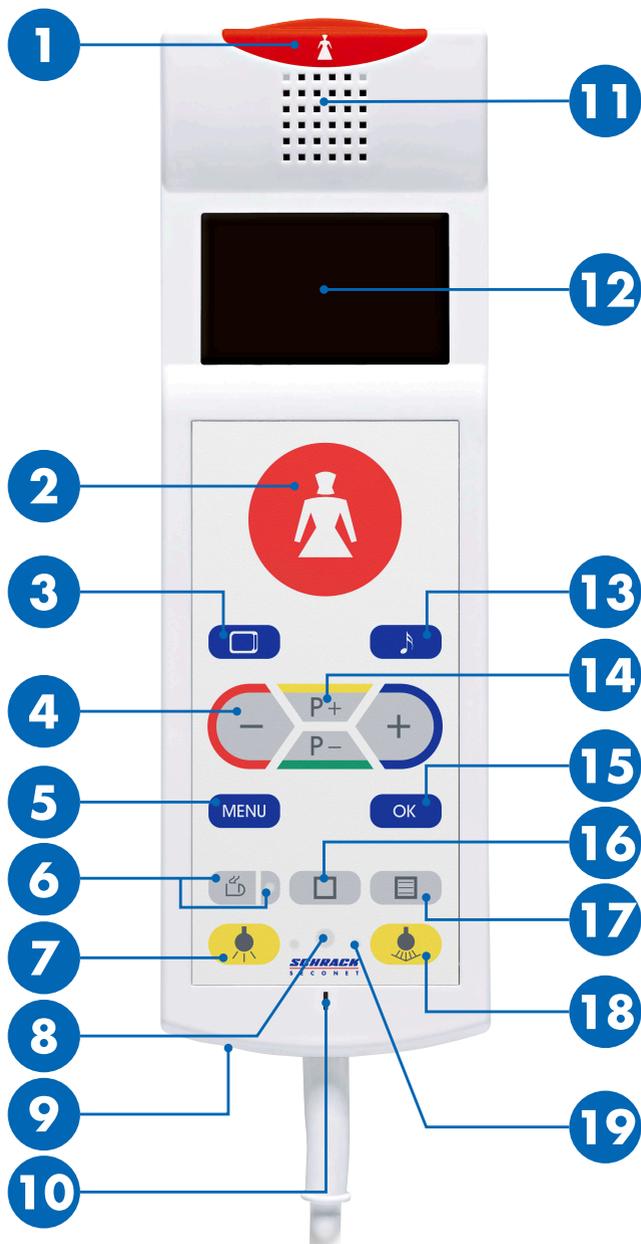

- 1 / 2 Кнопки вызова
- 3 Кнопка TV
- 4 Кнопка -/+
- 5 Кнопка меню
- 6 Кнопка сервисного вызова с индикатором (поисковый свет)
- 7 Комнатный свет
- 8 Инфракрасный приемник (опционально)
- 9 Разъем подключения наушников
- 10 Микрофон
- 11 Громкоговоритель
- 12 Дисплей
- 13 Кнопка управления радио
- 14 Кнопки выбора программы
- 15 Кнопка подтверждения
- 16 Кнопка специальной функции
- 17 Кнопка телетекста
- 18 Свет для чтения
- 19 Индикатор кнопки управления светом (поисковый свет)



#### **ВНИМАНИЕ**

#### **Не использовать в качестве приспособления для вставания**

Кабель и устройство не являются частью приспособления для вставания. Не пытайтесь вставить с помощью этого устройства.

## Работа

### Вызов медицинского персонала

Кнопка вызова  1 постоянно слабо светится. Это позволяет легко найти кнопку даже в темноте.

### Вызов медицинского персонала

Нажать на кнопку  1 или 2.

- ▶ Кнопка вызова  1 ярко светится.

### Ответ медицинского персонала

1. В громкоговорителе звучит сигнал гонга 11 и кнопка вызова мигает.
2. Для речевого соединения с медперсоналом используйте терминал как телефонную трубку.
3. При завершении разговора медперсонал закрывает речевое соединение.

## Сервисный вызов

Индикатор возле кнопки постоянно слабо светится, что позволяет найти кнопку даже в темноте.

Нажать кнопку сервисного вызова  6.

- ▶ Индикатор возле кнопки  6 ярко светится.

Сервисный персонал либо позвонит вам на устройство, либо придет к вам лично.

## Включение и выключение света

Индикаторы возле кнопок управления светом 19 постоянно слабо светятся. Это позволяет легко найти кнопки даже в темноте.

### Комнатный свет (опционально)

Кратковременно нажать на кнопку  7.

- ▶ Свет в комнате либо включится, либо выключится.

### Свет для чтения (опционально)

Кратковременно нажать на кнопку  18.

- ▶ Свет для чтения либо включится, либо выключится.

## Функции меню

### Установка яркости дисплея

1. Нажать кнопку **MENU** 5.
2. Используя на дисплее 12 кнопки выбора программы **P+/P-** 14, выбрать **Brightness**.
3. Подтвердить выбор кнопкой **OK** 15.
4. Используя кнопки **-/+** 4, установить требуемую яркость.
5. Покинуть меню, используя кнопку **MENU** 5.

### Установка контрастности дисплея

1. Нажать кнопку **MENU** 5.
2. Используя на дисплее 12 кнопки выбора программы **P+/P-** 14, выбрать **Contrast**.
3. Подтвердить выбор кнопкой **OK** 15.
4. Используя кнопки **-/+** 4, установить требуемую контрастность.
5. Покинуть меню, используя кнопку **MENU** 5.

### Установка громкости

1. Нажать кнопку **MENU** 5.
2. Используя на дисплее 12 кнопки выбора программы **P+/P-** 14, выбрать **Volume**.
3. Подтвердить выбор кнопкой **OK** 15.
4. С помощью кнопок выбора программы выберите **P+/P-** 14, для какой функции следует установить громкость звука.
5. Используя кнопки **-/+** 4, установить требуемую громкость.
6. Покинуть меню, используя кнопку **MENU** 5.

## Опциональные функции

### TV

#### Включение и выключение телевизора

Для включения или выключения телевизора однократно нажать на кнопку TV  3.

- ▶ Телевизор включится и номер последнего просматриваемого канала будет отображаться на дисплее 12.

#### Выбор канала

Используя кнопки выбора программы **P+/P-** 14, переключиться на следующую программу.

#### Источник звука и его громкость

Источником звука является громкоговоритель 11 или подключенные наушники (разъем 9).

Используя кнопки **-/+** 4, установить требуемую громкость.

#### Вызов телетекста

1. Для вызова телетекста или выхода из этого режима необходимо однократно нажать кнопку телетекста  17.
2. Для перехода на следующую/предыдущую страницу используются кнопки выбора программ **P+/P-** 14.

### Радио

#### Включение и выключение радио

Для включения/выключения радиотрансляции необходимо однократно нажать кнопку  13.

- ▶ Радио включается на прослушивание последнего выбранного канала, информация о котором отображается на дисплее 12.

#### Выбор канала

Используя кнопки выбора программы **P+/P-** 14, переключиться на следующую программу.

#### Источник звука и его громкость

Источником звука является громкоговоритель 11 или подключенные наушники (разъем 9).

Используя кнопки **-/+** 4, установить требуемую громкость.

### Управление шторами

1. Нажать на кнопку специальных функций  16.
2. Используя на дисплее 12 кнопки выбора программы **P+/P-** 14, выбрать **Blinds**.
3. Для открытия и закрытия штор используются кнопки **-/+** 4.

### Инфракрасный приемник

Инфракрасный приемник используется для удаленного управления терминалом пациента с внешних устройств, оснащенных этим интерфейсом.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna  
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

## **schrack-seconet.com**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199