

## Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna  
office@schrack-seconet.com | 857 50 43+

**schrack-seconet.com**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hågersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

# פונקציות אופציונליות

## טלוויזיה

### הדלקה וכיבוי של מכשיר הטלוויזיה

לחץ על כפתור הטלוויזיה  כדי לכבות ולהדליק את מכשיר הטלוויזיה.

◀ מכשיר הטלוויזיה דולק עם הערוץ האחרון שנצפה יוצג על המסך <sup>12</sup>.

### בחירת ערוץ

העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית <sup>14</sup> **P+/P-**.

### הגדרות קול ועוצמת שמע

פלט הקול דרך הרמקולים <sup>11</sup> או האזניות המחוברות (שקע החיבור <sup>9</sup>).

הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- <sup>4</sup>.

### הצגת טלטקסט

1. לחץ על כפתור הטלטקסט <sup>17</sup>  כדי להציג או לעזוב את מצב הטלטקסט.

2. העבר לעמוד הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P+/P-** <sup>14</sup>.

## רדיו

### כיבוי והדלקה של הרדיו

לחץ על כפתורי הווידאו <sup>15</sup>  כדי להדליק ולכבות את הרדיו.

◀ מכשיר הרדיו דולק עם התחנה האחרונה שנשמעה תוצג על המסך <sup>12</sup>.

### בחירת ערוץ

העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית <sup>14</sup> **P+/P-**.

### הגדרות קול ועוצמת שמע

פלט הקול דרך הרמקולים <sup>11</sup> או האזניות המחוברות (שקע החיבור <sup>9</sup>).

הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- <sup>4</sup>.

### בקרי שליטה בתריסים

1. לחץ על כפתורי הפונקציות המיוחדות <sup>16</sup> .

2. בחר תריסים על הצג <sup>12</sup> ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P+/P-** <sup>14</sup>.

3. פתיחה וסגירה של התריסים ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- <sup>4</sup>.

### מקלט אינפרה אדום

השימוש במקלט אינפרה אדום הוא לצורך שליטה מרחוק במסוף המטופל בעזרת מכשירי השליטה הסביבתיים.

## פעולה

### קריאה לצוות סיוע

לחצן הקריאה **1** מואר באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הלחצנים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

### יצירת קשר עם צוות הסיוע

לחץ על לחצן הקריאה **1** או **2**.

◀ לחצן הקריאה **1** נדלק.

### תשובות צוות הסיוע

1. רעשי גונג ברמקול **11** ולחצן הקריאה מהבהב.
2. השתמש במסוף המטופל כמו בטלפון כדי לדבר עם צוות הסיוע.
3. צוות הסיוע ינתק את ההתקשרות בסוף השיחה.

### קריאת שירות

ה-LED של הלחצן מואר באופן תמידי, כך שקל יותר למצוא אותו, אפילו בחושך.

לחץ על לחצן קריאת השירות **6**.

◀ ה-LED של לחצן קריאת השירות **6** נדלק.

צוות הסיוע ייצור קשר דרך המכשיר או יגיע באופן אישי.

### כיבוי והדלקה של התאורה

ה-LED של כפתורי התאורה **19** מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הכפתורים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

### תאורת חדר (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר **7** לחיצה קצרה.

◀ תאורת החדר נדלקת ונכבת.

### תאורת קריאה (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר **18** לחיצה קצרה.

◀ תאורת הקריאה נדלקת ונכבת.

## פונקציות התפריט

### הגדרת בהירות הצג

1. לחץ על כפתור **תפריט 5**.
2. בחר בהירות על הצג **12** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **14 P+/P-**.
3. אשר עם **OK** כפתור **15**.
4. הגדר את הבהירות הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- **4**.
5. השתמש בכפתור התפריט **תפריט 5** כדי לעזוב את התפריט.

### הגדרת ניגודיות הצג

1. לחץ על כפתור **תפריט 5**.
2. בחר ניגודיות על הצג **12** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **14 P+/P-**.
3. אשר עם **OK** כפתור **15**.
4. הגדר את הבהירות הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- **4**.
5. השתמש בכפתור התפריט **תפריט 5** כדי לעזוב את התפריט.

### הגדרת עוצמת שמע

1. לחץ על כפתור **תפריט 5**.
2. בחר עוצמת שמע על הצג **12** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **14 P+/P-**.
3. אשר עם **OK** כפתור **15**.
4. בחר לאיזון פונקציה יש להגדיר את עוצמת השמע ע"י שימוש בכפתורי הבחירה **14 P+/P-**.
5. הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- **4**.
6. השתמש בכפתור התפריט **תפריט 5** כדי לעזוב את התפריט.


|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| לחצני קריאה                            | 1 / 2 |
| כפתור טלויזיה                          | 3     |
| כפתור +/-                              | 4     |
| כפתור תפריט                            | 5     |
| כפתור קריאת שירות עם LED (תאורת גילוי) | 6     |
| תאורת חדר                              | 7     |
| מקלט אינפרה אדום (אופציונלי)           | 8     |
| חיבור אזניות                           | 9     |
| מיקרופון                               | 10    |
| רמקול                                  | 11    |
| צג                                     | 12    |
| כפתור רדיו                             | 13    |
| כפתורי בחירת תוכנית                    | 14    |
| כפתור אישור                            | 15    |
| כפתור פונקציה מיוחדת                   | 16    |
| כפתור טלטקסט                           | 17    |
| תאורת קריאה                            | 18    |
| LED של כפתור תאורה (תאורת גילוי)       | 19    |

#### זהירות



#### אסור להשתמש כעזר לטיפוס

הכבל והמכשיר אינם עזר לטיפוס. אל תמשוך את עצמך מעלה ע"י שימוש במכשיר.

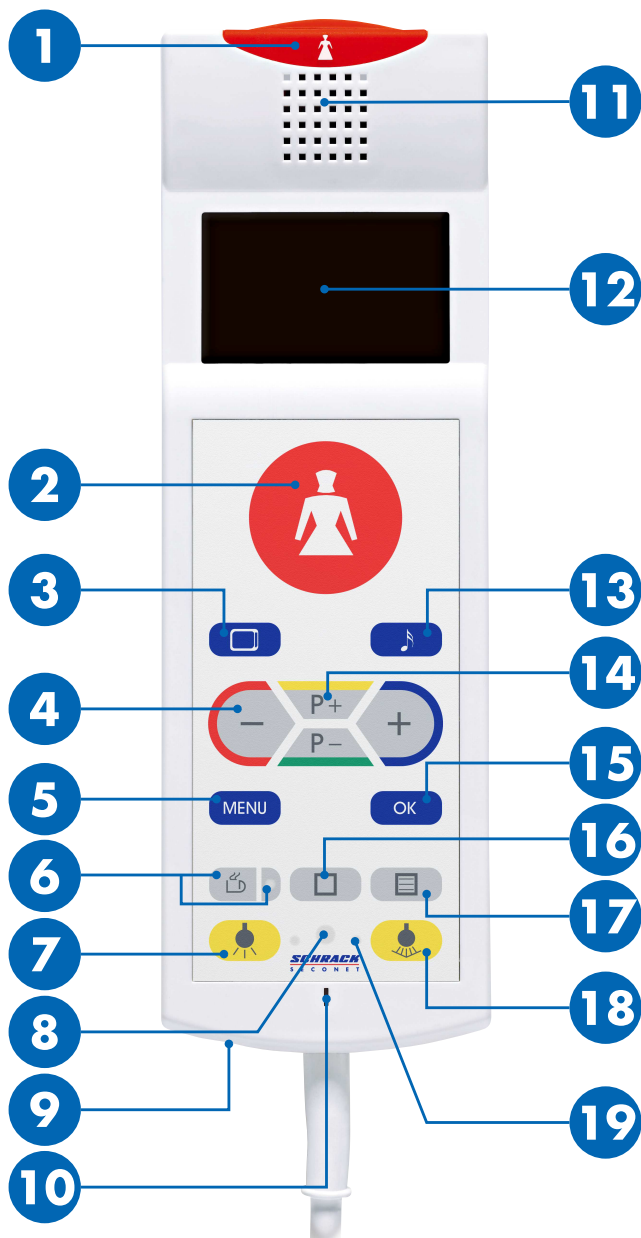

# מסוף מטופל PAT-E

---

מדריך למשתמש