




# Pasientterminal PAT-E

## Bruksanvisning

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Oversikt

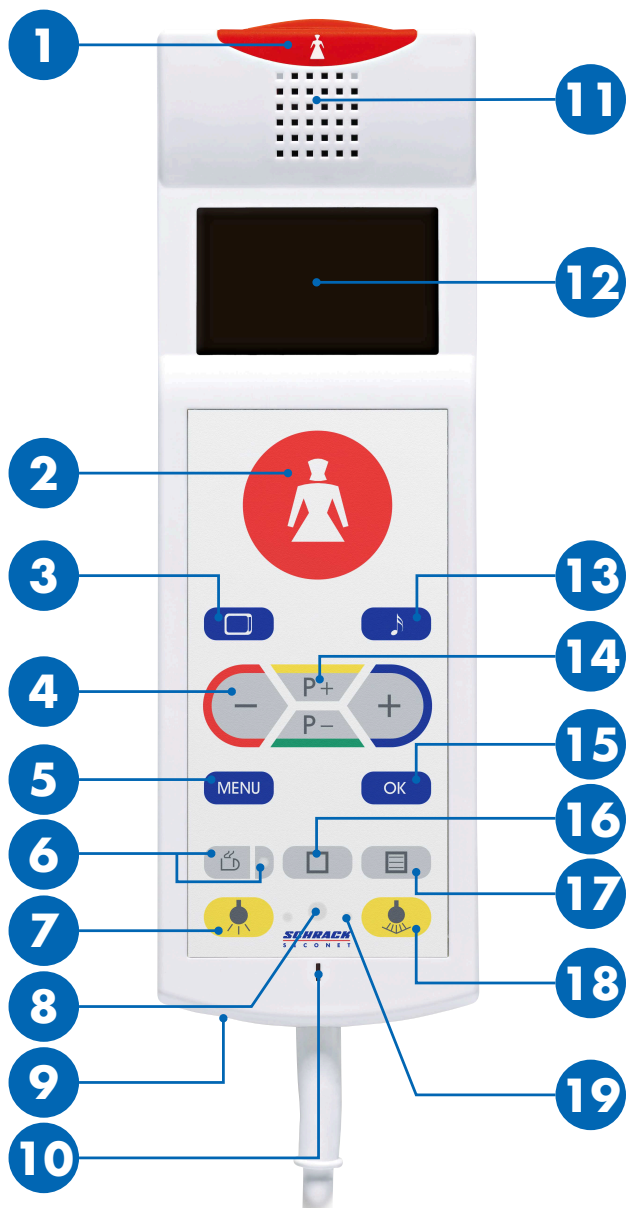

<b>1 / 2</b>	<b>Tilkallingsknapp</b>
<b>3</b>	<b>TV-knapp</b>
<b>4</b>	<b>-/+knapp</b>
<b>5</b>	<b>Meny-knapp</b>
<b>6</b>	<b>Tilkalle service-knapp med LED-lys (søkelys)</b>
<b>7</b>	<b>Romlys</b>
<b>8</b>	<b>Infrarød mottaker (valgfri)</b>
<b>9</b>	<b>Hodetelefonuttak</b>
<b>10</b>	<b>Mikrofon</b>
<b>11</b>	<b>Høyttaler</b>
<b>12</b>	<b>Display</b>
<b>13</b>	<b>Radio-knapp</b>
<b>14</b>	<b>Programvalg-knapper</b>
<b>15</b>	<b>Bekreftelsesknapp</b>
<b>16</b>	<b>Spesialfunksjon-knapp</b>
<b>17</b>	<b>Tekst-TV-knapp</b>
<b>18</b>	<b>Leselys</b>
<b>19</b>	<b>LED på lysknapp (søkelys)</b>



### **FORSIKTIG**

#### **Ikke bruk som hjelp til å reise seg opp**

Ledning og apparat er ikke hjelp til å reise seg opp. Ikke dra deg selv opp ved bruk av apparatet.

## Tilkalling av omsorgspersonell

Tilkallingsknappen  1 lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### Tilkall omsorgspersonell

Trykk på tilkallingsknappen  1 eller 2.


► Tilkallingsknappen  1 lyser opp.

### Svar fra omsorgspersonell

1. Pling-lyd over høyttaleren 11 og tilkallingsknappen blinker.
2. Bruk pasientterminalen som en telefon for å snakke med omsorgspersonellet.
3. Omsorgspersonellet avslutter samtalen når denne er ferdig.

## Tilkall service

LED-lyset på lysknappene lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Trykk på knappen for å tilkalle service  6.

► Knappen for å tilkalle service  6 lyser opp.

Servicepersonalet vil enten ringe deg opp på apparatet eller komme til deg personlig.

## Skru lyset av og på

LED-lyset på lysknappene 19 lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### Romlys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for romlys  7.

► Romlyset skrur på eller av.

### Leselys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for leselys  18.

► Leselyset skrur på eller av.

## Menyfunksjoner

### Sette lysstyrke på display

1. Trykk på knappen **MENY** 5.
2. Velg **Lysstyrke** på displayet 12 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 14.
3. Bekreft med **OK**-knappen 15.
4. Still inn den ønskede lysstyrken med **- / +** knappene 4.
5. Bruk meny-knappen **MENY** 5 for å forlate menyen.

### Sette kontrast på display

1. Trykk på knappen **MENY** 5.
2. Velg **Kontrast** på displayet 12 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 14.
3. Bekreft med **OK**-knappen 15.
4. Still inn den ønskede kontrasten med **- / +** knappene 4.
5. Bruk meny-knappen **MENY** 5 for å forlate menyen.

### Sette lydstyrke

1. Trykk på knappen **MENY** 5.
2. Velg **Lydstyrke** på displayet 12 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 14.
3. Bekreft med **OK**-knappen 15.
4. Velg funksjonen lydstyrken skal stilles for ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 14.
5. Still inn den ønskede lydstyrken med **- / +** knappene 4.
6. Bruk meny-knappen **MENY** 5 for å forlate menyen.

# Valgfrie funksjoner

## TV

### Skru TV-en på og av

Trykk på TV-knappen  3 for å skru TV-en av eller på.

- ▶ TV-en er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet 12.

### Velg kanal


Bytt kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+ / P-** 14.

### Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler 11 eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak 9).


Still inn den ønskede lydstyrken med **- / +** knappene 4.

### Sette på tekst-TV

1. Trykk knappen for tekst-TV  17 for å gå inn eller ut av tekst-TV.
2. Gå til neste side ved å bruke programvalg-knappene **P+ / P-** 14.

## Radio

### Skru radio av og på

Trykk på radio-knappen  13 for å skru radioen av eller på.

- ▶ Radioen er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet 12.

### Velg kanal


Bytt kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+ / P-** 14.

### Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler 11 eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak 9).

Still inn den ønskede lydstyrken med **- / +** knappene 4.

## Kontroll av persiennene

1. Trykk spesialfunksjon-knappen  16.
2. Velg **Persienn** på displayet 12 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 14.
3. Åpne eller lukke persiennene med **- / +** knappene 4.

## Infrarød mottaker

Den infrarøde mottakeren bruker for å fjerne styre pasientterminalen gjennom miljøkontrollenheter.



NO

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T