


Pære-trykknapp BT-IP

Bruksanvisning

Oversikt

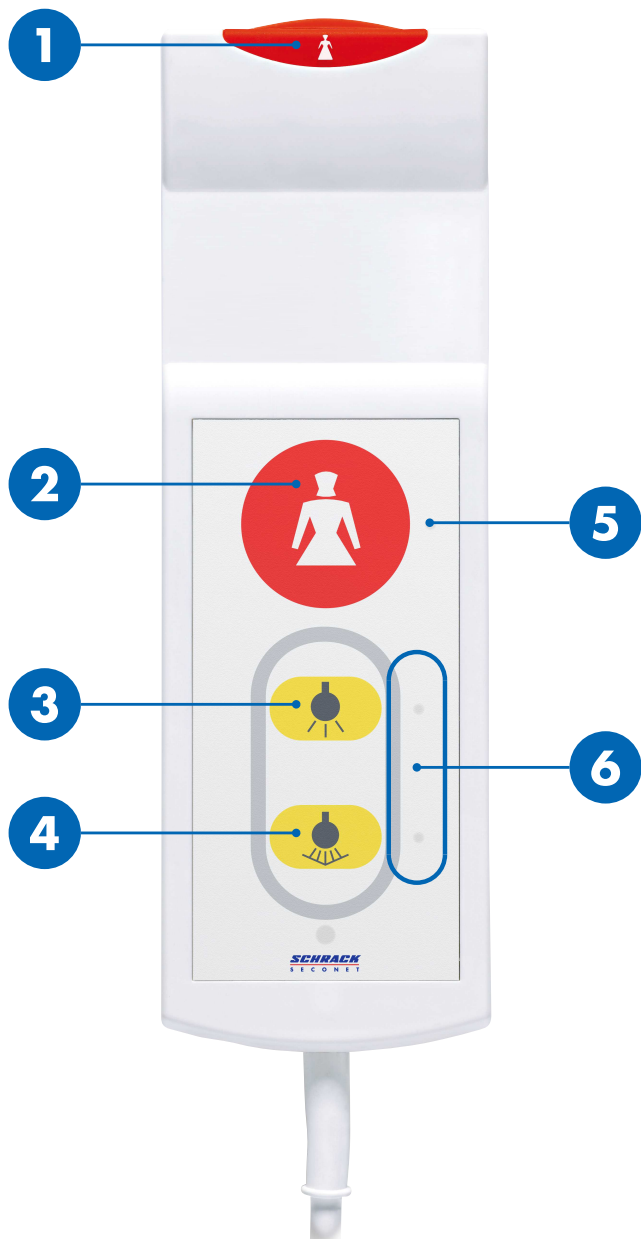

- 1 / 2** Tilkallingsknapp
- 3** Romlys
- 4** Leselys
- 5** LED på tilkallingsknapp (forsikringslys)
- 6** LED på lysknapp (søkelys)



FORSIKTIG

Ikke bruk som hjelp til å reise seg opp

Ledning og apparat er ikke hjelp til å reise seg opp. Ikke dra deg selv opp ved bruk av apparatet.

Tilkalling av omsorgspersonell

Tilkallingsknappen **1** og LED-lyset **5** lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Tilkall omsorgspersonell

Trykk på tilkallingsknappen **1** eller **2**.

- ▶ Tilkallingsknappen **1** og LED-lyset **5** lyser opp.

Skru lyset av og på

LED-lyset på lysknappene **6** lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Romlys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for romlys **3**.

- ▶ Romlyset skrur på eller av.

Leselys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for leselys **4**.

- ▶ Leselyset skrur på eller av.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199