


Peerdrukker BT-IP

Gebruikershandleiding

Overzicht

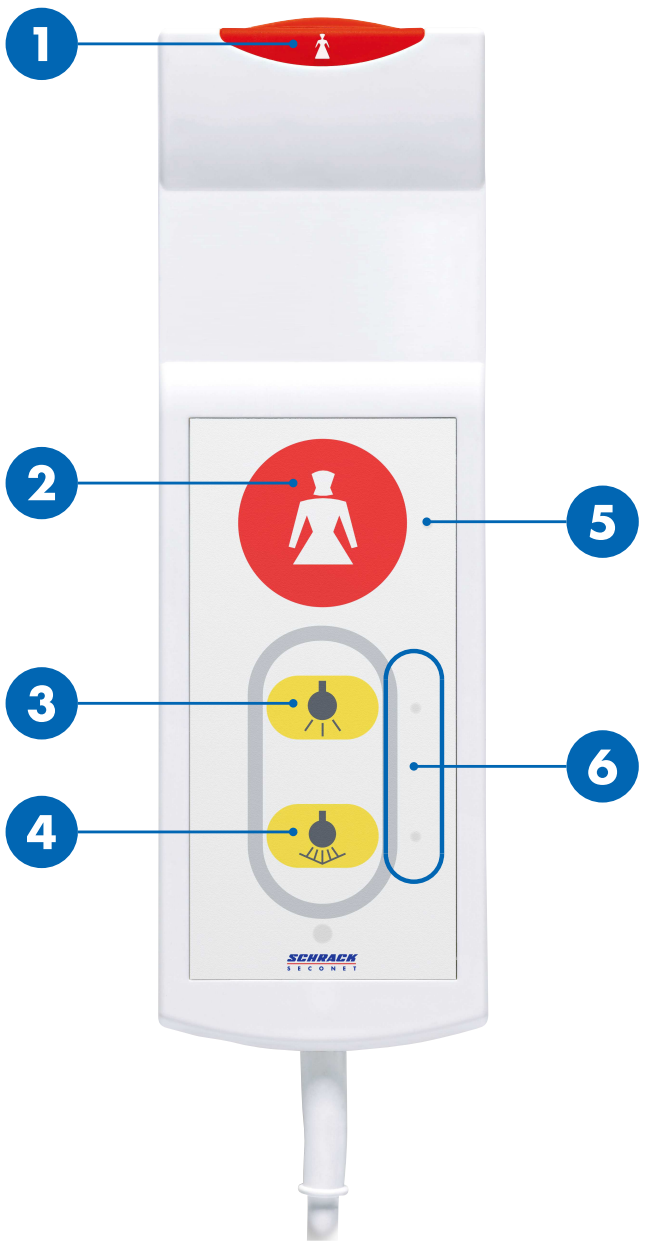

- 1 / 2 Verpleegkundige oproeptoetsen
- 3 Kamerverlichting
- 4 Bedleesverlichting
- 5 Geruystel LED verpleegkundige oproeptoets
- 6 Oriëntatie LED verlichting



VOORZICHTIG

Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken

Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf niet op met behulp van dit toestel.

Oproep verplegend personeel

De oproeptoets  1 en de LED 5 zijn continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is, zelfs in het donker.

Verplegend personeel oproepen

Druk op de oproeptoets  1 of 2.

- ▶ De oriëntatie LED's 5 van de oproeptoets  1 lichten nu fel op.

Verlichting aan of uitschakelen

De oriëntatie LED van de lichttoetsen 6 zijn continue verlicht, waardoor de toetsen gemakkelijk te lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

Kamerverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets kamerverlichting  3.

- ▶ De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Bedleesverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets bedleesverlichting  4.

- ▶ De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitvová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199