




Pacienta termināls PAT

Lietotāja rokasgrāmata

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Pärskats

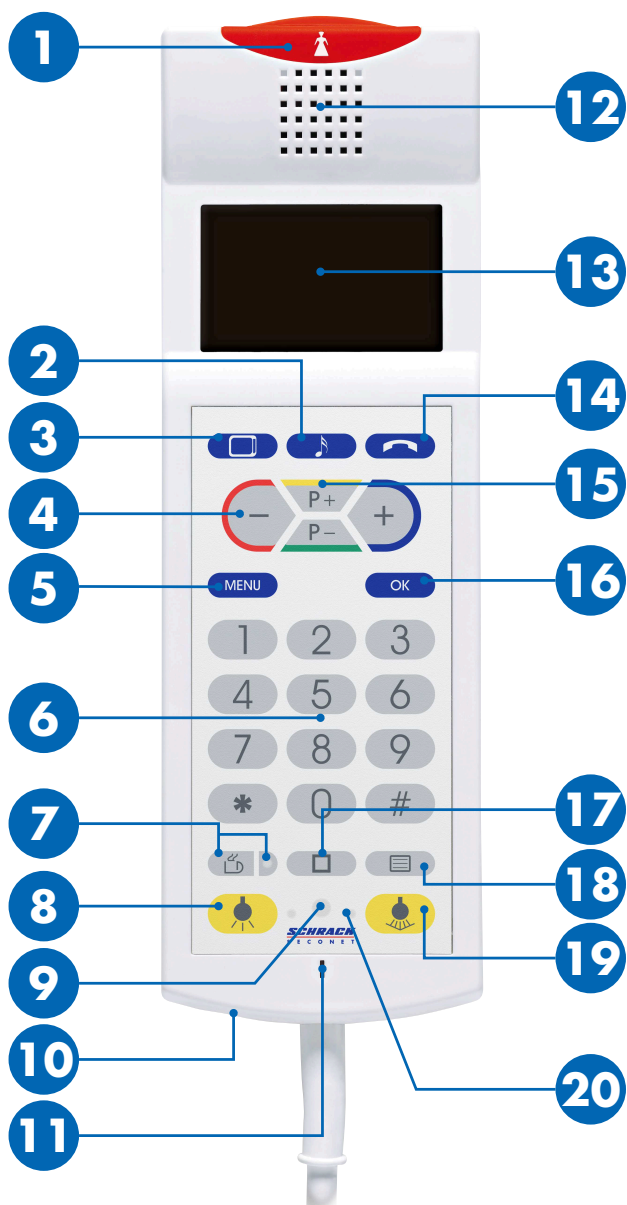

| | |
|-----------|--|
| 1 | Izsaukuma poga |
| 2 | Radio poga |
| 3 | Televīzijas poga |
| 4 | -/+ poga |
| 5 | Izvēlnes poga |
| 6 | Cipartastatūra |
| 7 | Servisa izsaukuma poga ar LED (meklēšanas gaisma) |
| 8 | Telpas apgaismojums |
| 9 | Infrasarkanais uztvērējs (papildaprīkojums) |
| 10 | Austiņu savienojums |
| 11 | Mikrofons |
| 12 | Skafrunis |
| 13 | Displejs |
| 14 | Tālruņa poga |
| 15 | Programmu atlasē pogas |
| 16 | Apstiprināšanas poga |
| 17 | Īpašo funkciju poga |
| 18 | Teleteksta poga |
| 19 | Lasīšanas gaisma |
| 20 | Gaismas pogas LED (meklēšanas gaisma) |



UZMANĪBU

Neizmantoj kā piecelšanās palīgīdzekli

Kabelis un ierīce nav piecelšanās palīgīdzekļi. Nepievelciet sevi, izmantojot ierīci.

Aprūpes personāla izsaukšana


Izsaukuma poga  1 ir pastāvīgi iedegta, lai to varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Kā izsaukt aprūpes personālu

Nospiediet pogu  1.

► Izsaukuma poga  1 iedegas.


Atbildēšana aprūpes personālam

1. Skaļrunī  12 dzirdams skaņas signāls un mirgo izsaukuma poga.
2. Pacienta terminālu izmantojiet kā tālruni, lai runātu ar aprūpes personālu.
3. Sarunas beigās aprūpes personāls izbeigs zvānu.

Servisa izsaukums


Pogas LED ir pastāvīgi iedegts, lai to varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Nospiediet servisa izsaukuma pogu  7.


► Servisa izsaukuma pogas LED  7 iedegas.

Servisa personāls piezvanīs jums uz ierīci vai apmeklēs jūs.

Gaismas ieslēgšana un izslēgšana

Gaismas pogu  20 LED ir pastāvīgi iedegtas, lai pogas varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Telpas apgaismojums (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet telpas apgaismojuma pogu  8.

► Telpas apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts.







Lasīšanas gaisma (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet lasīšanas gaismas pogu  19.







► Lasīšanas gaisma tiek ieslēgta vai izslēgta.

Izvēlnes funkcijas








Displeja spilgtuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU**  5.
2. Displejā  13 atlasiet vienumu **Spilgtums**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+**/**P-**  15.
3. Apstipriniet atlasi, nospiežot pogu **Labi**  16.
4. Iestatiet vēlamu spilgtumu, izmantojot **-/+** pogas  4.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE**  5.







Displeja kontrasta iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU**  5.
2. Displejā  13 atlasiet vienumu **Kontrasts**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+**/**P-**  15.
3. Apstipriniet atlasi, nospiežot pogu **Labi**  16.
4. Iestatiet vēlamo kontrastu, izmantojot **-/+** pogas  4.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE**  5.

Skaļuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU**  5.
2. Displejā  13 atlasiet vienumu **Skaļums**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+**/**P-**  15.
3. Apstipriniet atlasi, nospiežot pogu **Labi**  16.
4. Atlasiet, kurai funkcijai jāiestata skaļums, izmantojot programmu atlasē pogas **P+**/**P-**  15.
5. Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas  4.
6. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE**  5.


Zvana signāla iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU**  5.
2. Displejā  13 atlasiet vienumu **Zvana signāli**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+**/**P-**  15.
3. Apstipriniet atlasi, nospiežot pogu **Labi**  16.
4. Iestatiet vēlamo zvana signālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+**/**P-**  15.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE**  5.

Papildfunkcijas

Televīzija

Televizora ieslēgšana un izslēgšana

Nspiediet televīzijas pogu  3, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

- ▶ Tīks ieslēgts televizors, un displejā 13 tiks rādīts pēdējais skatītais kanāls.

Kanāla izvēle


Ievadiet kanāla numuru, izmantojot cipartastatūru 6, vai pārslēdziet nākamo kanālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** 15.

Skaņas un skaļuma iestatīšana

Skaņa tiek izvadīta caur skaļruni 12 vai pievienotajām austiņām (savienojuma līgza 10).

Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas 4.

Teleteksta izsaukšana

1. Nospiediet teleteksta pogu  18, lai izsauktu teletekstu vai izietu no teleteksta režīma.
2. Ievadiet lapas numuru, izmantojot cipartastatūru 6, vai pārejiet uz nākamo lapu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** 15.

Radio

Radio ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet radio pogu  2, lai ieslēgtu vai izslēgtu radio.

- ▶ Tīks ieslēgts radio, un displejā 13 tiks parādīts pēdējais klausītais radio kanāls.

Kanāla izvēle

Ievadiet kanāla numuru, izmantojot cipartastatūru 6, vai pārslēdziet nākamo kanālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** 15.



Skaņas un skaļuma iestatīšana

Skaņa tiek izvadīta caur skaļruni 12 vai pievienotajām austiņām (savienojuma līgza 10).



Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas 4.

Tālrunis



Zvana pieņemšana

1. Pieņemiet ienākošo zvanu, nospiežot tālruņa pogu  14.
2. Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **-/+** pogas 4.
3. Nospiediet tālruņa pogu  14, lai pēc sarunas pabeigtu zvanu.


Tālruņa zvana veikšana

1. Nospiediet tālruņa pogu  14.
2. Nospiediet cipartaustiņu, lai pieslēgtos maģistrālajai līnijai / publiskajam ieslēgtu tālruņu tīklam (parasti "0"; lūdzu, uzziņiet pie personāla).
3. Zvaniet pa vajadzīgo tālruņa numuru, izmantojot cipartastatūru 6.
4. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** 16.
5. Nospiediet tālruņa pogu  14, lai pēc sarunas pabeigtu zvanu.

Pārzvanišana uz pēdējo numuru

1. Nospiediet tālruņa pogu  14.
2. Displejā 13 tiek parādīti pēdējie desmit numuri, uz kuriem veikti zvani.
3. Atlasiet vajadzīgo numuru, izmantojot **-/+** pogas 4.
4. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi** 16.
5. Nospiediet tālruņa pogu  14, lai pēc sarunas pabeigtu zvanu.

Žalūziju vadība

1. Nospiediet īpašo funkciju pogu  17.
2. Displejā 13 atlasiet vienumu **Žalūzijas**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** 15.
3. Atveriet vai aizveriet žalūzijas, izmantojot **-/+** pogas 4.

Infrasarkanais uztvērējs

Infrasarkanais uztvērējs tiek lietots, lai nodrošinātu pacienta termināla tālvadību, izmantojot apkārtējās vides kontroles ierīces.



LV

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T