




Pacientský terminál PAT

Uživatel'ská příručka

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Prehľad

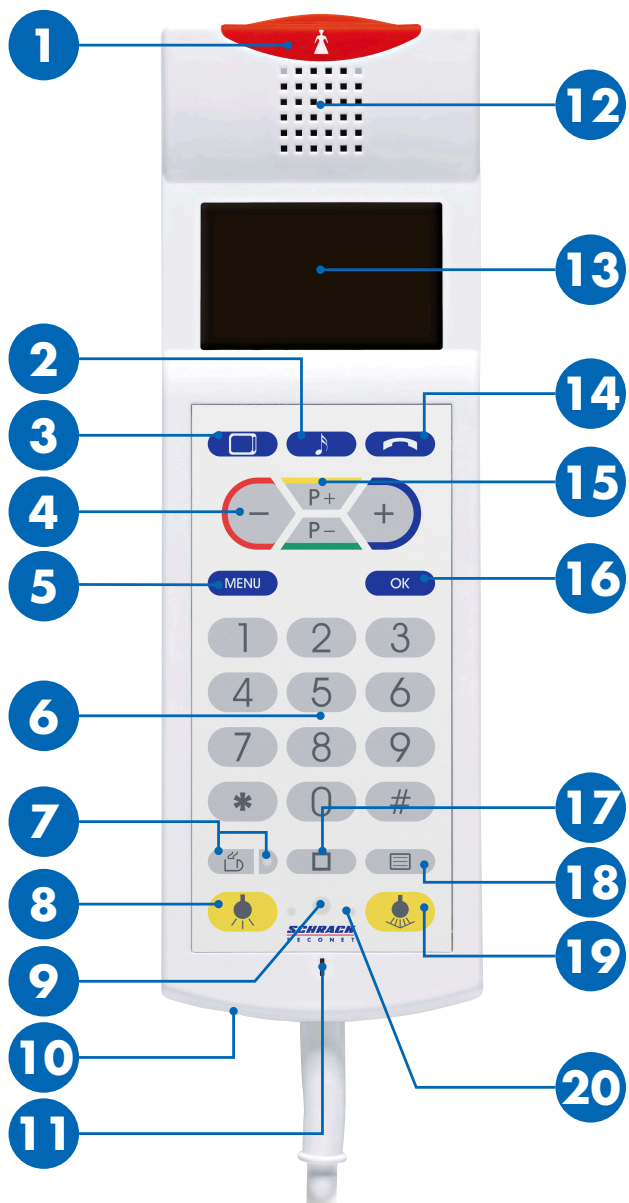

1	Tlačidlá privolaní
2	Rádio tlačidlo
3	TV tlačidlo
4	-/+ tlačidlo
5	Menu tlačidlo
6	Numerická klávesnica
7	Tlačidlo privolanie služby s LED
8	Izbové svetlo
9	Infračervený prijímač (voliteľné)
10	Pripojenie slúchadiel
11	Mikrofón
12	Reproduktor
13	Displej
14	Telefónne tlačidlo
15	Tlačidlá výberu programu
16	Potvrzovacie tlačidlo
17	Tlačidlo špeciálnej funkcie
18	Teletext tlačidlo
19	Svetlo na čítanie
20	LED tlačidlá svetla



UPOZORNENIE


Nepoužívajte na privolanie pomoci

Kábel a zariadenie neslúži na privolanie pomoci. Nepoužívajte zariadenie na dvíhanie sa.

Privolanie zdravotníckeho personálu


Tlačidlo privolanía  1 nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

Privolanie zdravotníckeho personálu

Stlačte tlačidlo  1.

► Tlačidlo privolanía  1 sa rozsvieti.

Odpovede zdravotníckemu personálu

1. Z reproduktora zaznie gong  12 a tlačidlo privolanía bliká.
2. Použite patientský terminál ako telefón na rozprávanie sa s personálom.
3. Zdravotnícky personál ukončí hovor na konci rozhovoru.

Privolanie služby

LED tlačidlá nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

Stlačte tlačidlo privolaníe služby  7.


► LED tlačidlá privolaníe služby  7 sa rozsvieti.

Služobný personál Vám zavolá na zariadenie alebo príde osobne.

Zapnutie a vypnutie svetla


LED tlačidiel svetla  20 nepretržite svietia, vďaka čomu je ľahké ich lokalizovať v tme.

Izbové svetlo (voliteľné)

Stlačte tlačidlo izbové svetlo  8 krátko.

► Izbové svetlo je zapnuté alebo vypnuté.







Svetlo na čítanie (voliteľné)

Stlačte tlačidlo svetlo na čítanie  19 krátko.







► Svetlo na čítanie je zapnuté alebo vypnuté.

Funkcie menu








Nastavenie jasú displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU**  5.
2. Vyberte **Brightness** na displeji  13 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-**  15.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom  16.
4. Nastavte želaný jas použitím **- / +** tlačidiel  4.
5. Použite tlačidlo menu **MENU**  5 na opustenie menu.







Nastavenie kontrastu displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU**  5.
2. Vyberte **Contrast** na displeji  13 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-**  15.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom  16.
4. Nastavte želaný kontrast použitím **- / +** tlačidiel  4.
5. Použite tlačidlo menu **MENU**  5 na opustenie menu.

Nastavenie hlasitosti

1. Stlačte tlačidlo **MENU**  5.
2. Vyberte **Volume** na displeji  13 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-**  15.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom  16.
4. Vyberte pre ktorú funkciu má byť hlasitosť nastavená použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-**  15.
5. Nastavte želanú hlasitosť použitím **- / +** tlačidiel  4.
6. Použite tlačidlo menu **MENU**  5 na opustenie menu.

Nastavenie zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **MENU**  5.
2. Vyberte **Ring tones** na displeji  13 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-**  15.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom  16.
4. Nastavte želaný tón zvonenia použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-**  15.
5. Použite tlačidlo menu **MENU**  5 na opustenie menu.

Voliteľné funkcie

TV

Zapnutie a vypnutie TV

Stlačte tlačidlo TV  3 na zapnutie alebo vypnutie TV.

- ▶ TV je zapnutý a na displeji sa zobrazí posledný pozeraný kanál 13.

Výber kanála


Zadajte číslo kanálu použitím numerickej klávesnice 6 alebo prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 15.

Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor 12 alebo slúchadlá (pripojovacia zásuvka 10).

Nastavte želanú hlasitosť použitím **- / +** tlačidiel 4.

Vyvolanie teletextu

1. Stlačte tlačidlo teletext  18 na vyvolanie alebo opustenie teletext módu.
2. Zadajte číslo strany použitím numerickej klávesnice 6 alebo prepnite na ďalšiu stranu použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 15.

Rádio

Zapnutie a vypnutie rádia

Stlačte tlačidlo rádio  2 na zapnutie alebo vypnutie rádia.

- ▶ Rádio je zapnuté a na displeji sa zobrazí posledný počúvaný kanál 13.

Výber kanála

Zadajte číslo kanálu použitím numerickej klávesnice 6 alebo prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 15.



Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor 12 alebo slúchadlá (pripojovacia zásuvka 10).



Nastavte želanú hlasitosť použitím **- / +** tlačidiel 4.

Telefonovanie



Prijatie hovoru

1. Prijmite prichádzajúci hovor pomocou tlačidla telefonovanie  14.
2. Nastavte želanú hlasitosť použitím **- / +** tlačidiel 4.
3. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14 na ukončenie hovoru po konverzácii.


Uskutočnenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14.
2. Stlačte tlačidlo numerickej klávesnice pre verejnú telefónnu sieť (obvykle 0, overte si to u personálu).
3. Zadajte želané telefónne číslo použitím numerickej klávesnice 6.
4. Potvrďte s **OK** tlačidlom 16.
5. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14 na ukončenie hovoru po konverzácii.

Vytočenie posledného čísla

1. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14.
2. Na displeji sa zobrazí posledných desať volaných čísel 13.
3. Vyberte želané číslo použitím **- / +** tlačidiel 4.
4. Potvrďte s **OK** tlačidlom 16.
5. Stlačte tlačidlo telefonovanie  14 na ukončenie hovoru po konverzácii.

Ovládanie žalúzií

1. Stlačte tlačidlo špeciálnej funkcie  17.
2. Vyberte **Blinds** na displeji 13 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 15.
3. Vytiahnite alebo zatiahnite žalúzie použitím **- / +** tlačidiel 4.

Infračervený prijímač

Infračervený prijímač sa používa na vzdialenú kontrolu patientskeho terminálu kontrolnými zariadeniami.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

SK

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET