


Terminale pazienti PAT

Istruzioni per l'uso

Panoramica

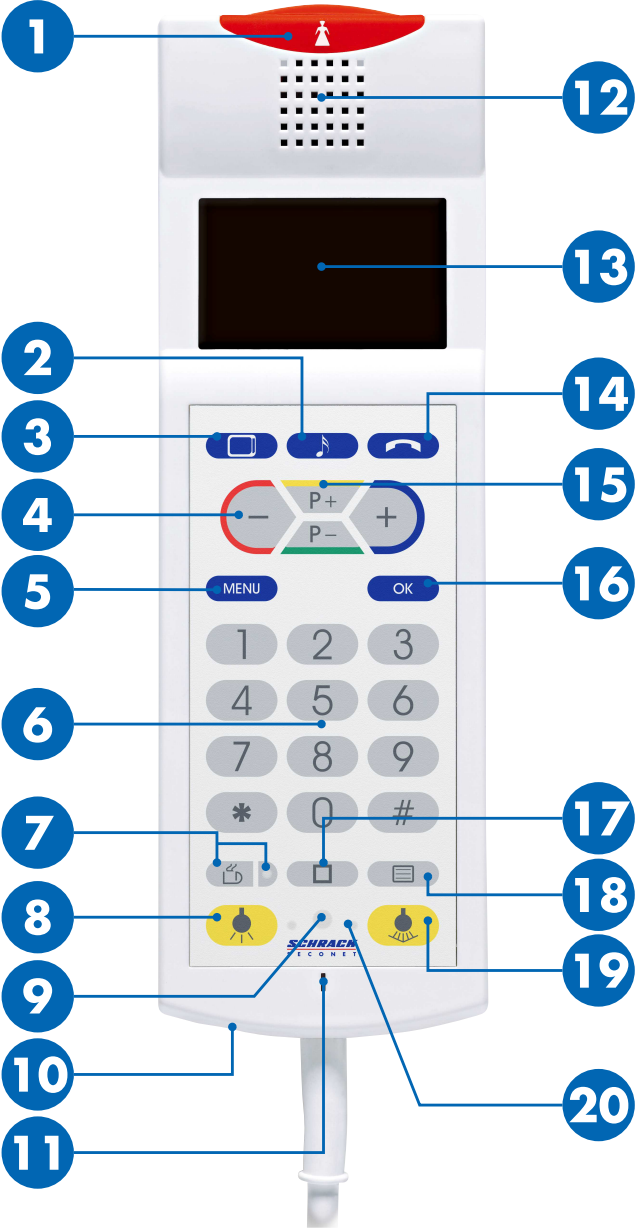

- 1 Tasto di chiamata
- 2 Tasto radio
- 3 Tasto TV
- 4 Tasti -/+
- 5 Tasto menu
- 6 Tastierino numerico
- 7 Tasto di chiamata di servizio con LED (di individuazione)
- 8 Luce di stanza
- 9 Ricevitore a infrarossi (opzionale)
- 10 Presa cuffie
- 11 Microfono
- 12 Altoparlante
- 13 Display
- 14 Tasto telefono
- 15 Tasti di selezione
- 16 Tasto di conferma
- 17 Tasto funzioni speciali
- 18 Televideo
- 19 Luce di lettura
- 20 LED (di individuazione) del tasto luce



ATTENZIONE

Non utilizzare come ausilio per sollevarsi

Il cavo e il terminale non sono dispositivi per il sollevamento. Non utilizzare per cercare di sollevarsi.

In servizio

Chiamata per il personale di assistenza

Il pulsante di chiamata  **1** resta costantemente acceso, in modo che sia più facile da individuare anche al buio.

Chiamata per il personale di servizio

Premere il tasto  **1**.

- Il pulsante di chiamata  **1** si illumina.

Il personale di assistenza risponde

1. Il gong suona attraverso l'altoparlante **12** e il pulsante di chiamata lampeggia.
2. Utilizzare il terminale paziente come un telefono per parlare con il personale di assistenza.
3. Il personale termina la chiamata alla fine della conversazione.

Chiamata di servizio

Il LED del tasto resta costantemente acceso, in modo che sia più facile da individuare anche al buio.

Premere il tasto di chiamata  **7**.

- Il LED del tasto chiamata di servizio  **7** si illumina.

Il personale di servizio ti chiamerà sul terminale o verrà da te di persona.

Accendere e spegnere la luce

Il LED dei tasti luce **20** resta costantemente acceso, in modo che sia più facile individuarli anche al buio.

Luce di stanza (opzionale)

Premere il tasto luce di stanza  **8** brevemente.

- La luce della stanza si accenderà o spegnerà.

Luce di lettura (opzionale)

Premere il tasto luce di lettura  **19** brevemente.

- La luce di lettura si accenderà o spegnerà.

Funzioni del menu

Regolazione della luminosità del display

1. Premere il tasto **MENU** **5**.
2. Selezionare la voce **Luminosità** sul display **13** premendo i tasti di selezione **P+/P-** **15**.
3. Confermare con il tasto **OK** **16**.
4. Impostare la luminosità desiderata usando i tasti **-/+** **4**.
5. Premere nuovamente il tasto **MENU** **5** per abbandonare il menu.

Regolazione del contrasto del display

1. Premere il tasto **MENU** **5**.
2. Selezionare la voce **Contrasto** sul display **13** premendo i tasti di selezione **P+/P-** **15**.
3. Confermare con il tasto **OK** **16**.
4. Regolare il contrasto usando i tasti **-/+** **4**.
5. Premere nuovamente il tasto **MENU** **5** per abbandonare il menu.

Regolazione del volume

1. Premere il tasto **MENU** **5**.
2. Selezionare la voce **Volume** sul display **13** premendo i tasti di selezione **P+/P-** **15**.
3. Confermare con il tasto **OK** **16**.
4. Selezionare per quale funzione il volume deve essere impostato premendo i tasti di selezione **P+/P-** **15**.
5. Regolare il volume usando i tasti **-/+** **4**.
6. Premere nuovamente il tasto **MENU** **5** per abbandonare il menu.

Imposta suoneria

1. Premere il tasto **MENU** **5**.
2. Selezionare la voce **Suoneria** sul display **13** premendo i tasti di selezione **P+/P-** **15**.
3. Confermare con il tasto **OK** **16**.
4. Scegliere la suoneria desiderata utilizzando i tasti di selezione **P+/P-** **15**.
5. Premere nuovamente il tasto **MENU** **5** per abbandonare il menu.

Funzioni opzionali

TV

Accendere e spegnere la TV

Premere il tasto TV  3 per accendere o spegnere la TV.

- L'ultimo canale visualizzato comparirà automaticamente sul display 13.

Scelta dei programmi

Digitare il numero del canale utilizzando la tastiera numerica 6 o passare al canale successivo utilizzando i tasti di selezione **P+/P-** 15.

Impostazione del suono e del volume

Ascolto tramite l'altoparlante 12 o con le cuffie (presa di connessione 10).

Regolare il volume usando i tasti **-/+** 4.

Televideo

1. Premere il tasto televideo  18 per accedere o uscire dal televideo.
2. Digitare il numero di pagina utilizzando la tastiera numerica 6 o passare alla pagina successiva utilizzando i tasti di selezione **P+/P-** 15.

Radio

Accendere e spegnere la radio

Premere il tasto radio  2 per accendere o spegnere radio.

- La radio si accenderà e l'ultimo canale radio ascoltato verrà indicato sul display 13.

Scelta dei programmi

Digitare il numero del canale utilizzando la tastiera numerica 6 o passare al canale successivo utilizzando i tasti di selezione **P+/P-** 15.

Impostazione del suono e del volume

Ascolto tramite l'altoparlante 12 o con le cuffie (presa di connessione 10).

Regolare il volume usando i tasti **-/+** 4.

Telefono

Ricezione di una chiamata

1. Ricevere una chiamata in arrivo utilizzando il tasto telefono  14.
2. Regolare il volume usando i tasti **-/+** 4.
3. Premere il tasto telefono  14 per terminare la conversazione.

Telefonata in uscita

1. Premere il tasto telefono  14.
2. Premere il tasto per prendere la linea in uscita (di solito "0"; verificare con il personale).
3. Digitare il numero di telefono desiderato utilizzando la tastiera numerica 6.
4. Confermare con il tasto **OK** 16.
5. Premere il tasto telefono  14 per terminare la conversazione.

Ripetizione dell'ultimo numero di telefono

1. Premere il tasto telefono  14.
2. Gli ultimi dieci numeri di telefono composti verranno indicati sul display 13.
3. Selezionare il numero desiderato utilizzando i tasti **-/+** 4.
4. Confermare con il tasto **OK** 16.
5. Premere il tasto telefono  14 per terminare la conversazione.

Controllo tapparelle

1. Premere il tasto funzioni speciali  17.
2. Selezionare la voce **Tapparelle** sul display 13 premendo i tasti di selezione **P+/P-** 15.
3. Alzare o abbassare le tapparelle utilizzando i tasti **-/+** 4.

Ricevitore a infrarossi

Il ricevitore a infrarossi viene utilizzato per controllare a distanza il terminale paziente tramite dispositivi di controllo ambientale.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199