


Terminal patient PAT-E

Manuel d'utilisation

Aperçu

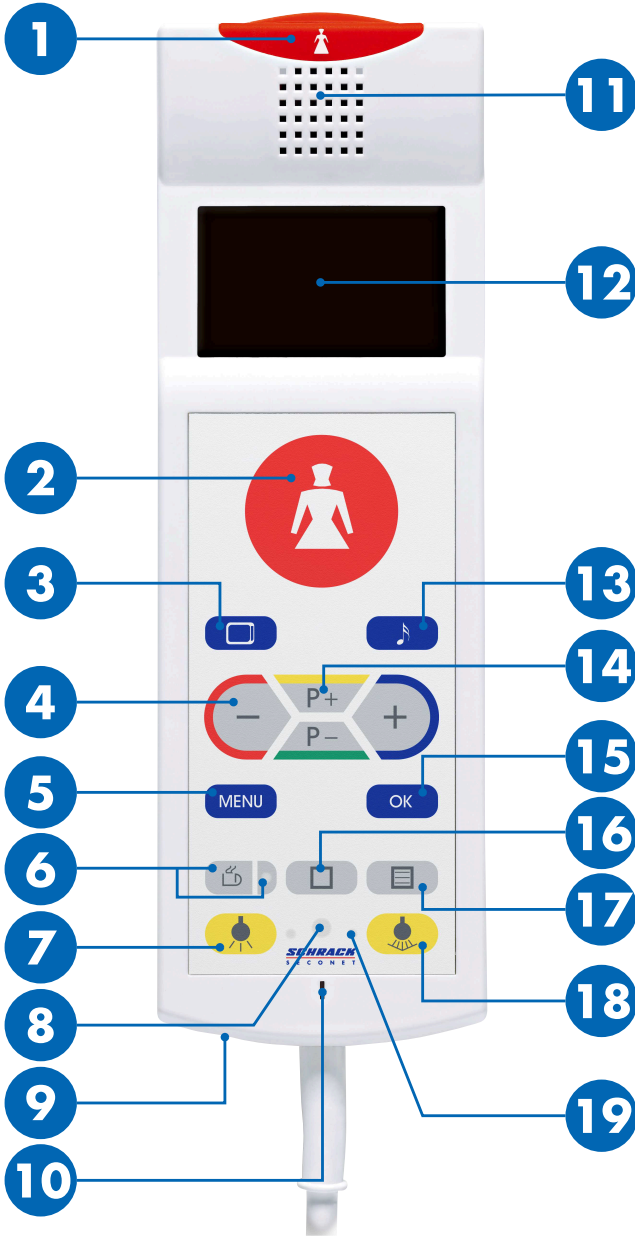

- 1 / 2 Boutons d'appel
- 3 Bouton TV
- 4 Bouton -/+
- 5 Bouton menu
- 6 Bouton d'appel de service avec LED (voyant)
- 7 Lumière de la chambre
- 8 Récepteur infrarouge (en option)
- 9 Prise casque
- 10 Microphone
- 11 Haut-parleur
- 12 Écran
- 13 Bouton radio
- 14 Boutons de sélection de programme
- 15 Bouton de confirmation
- 16 Bouton de fonction spéciale
- 17 Bouton télétexte
- 18 Lampe de lecture
- 19 LED du bouton de lumière (voyant de position)



ATTENTION

Ne pas utiliser pour se lever

Le câble et le dispositif ne sont pas une aide pour se lever. Ne pas tirer sur le dispositif pour se redresser.

Fonctionnement

Appel personnel soignant

Le bouton d'appel  1 est éclairé en permanence pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans le noir.

Appeler le personnel soignant

Appuyer sur le bouton d'appel  1 ou 2.

- ▶ Le bouton d'appel  1 s'allume.

Réponse du personnel soignant

1. Un gong retentit dans le haut-parleur 11 et le bouton d'appel clignote.
2. Utiliser le terminal patient comme un téléphone pour discuter avec le personnel soignant.
3. Le personnel soignant met fin à l'appel à l'issue de la conversation.

Appel de service

La LED du bouton est allumée en permanence pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans le noir.

Appuyer sur le bouton d'appel de service  6.

- ▶ La LED du bouton d'appel de service  6 s'allume.

Le personnel de service vous appellera directement sur le dispositif ou viendra en personne.

Allumer et éteindre la lumière

Les LED des boutons de lumière 19 sont allumées en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

Lumière de la chambre (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lumière dans la chambre  7.

- ▶ La lumière s'allume ou s'éteint.

Lampe de lecture (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lampe de lecture

 18.

- ▶ La lampe de lecture s'allume ou s'éteint.

Fonctions de menu

Ajuster la luminosité de l'écran

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Brightness** à l'écran 12 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 15.
4. Ajuster la luminosité comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

Ajuster le contraste de l'écran

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Contrast** à l'écran 12 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 15.
4. Ajuster le contraste comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

Ajuster le volume

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Volume** à l'écran 12 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 15.
4. Sélectionner la fonction pour laquelle vous souhaitez ajuster le volume à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.
5. Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
6. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

Fonctions en option

Télévision

Allumer et éteindre la TV

Appuyer sur le bouton TV  3 pour allumer ou éteindre la TV.

- Le téléviseur s'allume et la dernière chaîne regardée est indiquée à l'écran 12.

Sélectionner une chaîne


Pour passer à la chaîne suivante, utiliser les boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.

Ajuster le son et le volume

Sortie du son par les haut-parleurs 11 ou le casque branché (prise casque 9).

Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.

Afficher le télétexte

1. Appuyer sur le bouton télétexte  17 pour activer ou désactiver le mode télétexte.
2. Pour passer à la page suivante, utiliser les boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.

Radio

Allumer et éteindre la radio

Appuyer sur le bouton radio  13 pour allumer ou éteindre la radio.

- La radio s'allume et la dernière station de radio écoutée est affichée à l'écran 12.

Sélectionner une chaîne


Pour passer à la chaîne suivante, utiliser les boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.

Ajuster le son et le volume

Sortie du son par les haut-parleurs 11 ou le casque branché (prise casque 9).

Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.

Contrôle des stores

1. Appuyer sur le bouton de fonction spéciale  16.
2. Sélectionner **Blinds** à l'écran 12 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 14.
3. Pour ouvrir ou fermer les stores, utiliser les boutons **-/+** 4.

Récepteur infrarouge

Le récepteur infrarouge permet de contrôler à distance le terminal patient grâce à une télécommande à proximité.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199