

SCHRACK
SECONET


Tlačidlo BT-B

Uživatelská příručka

SK

HEALTH CARE

Prehľad

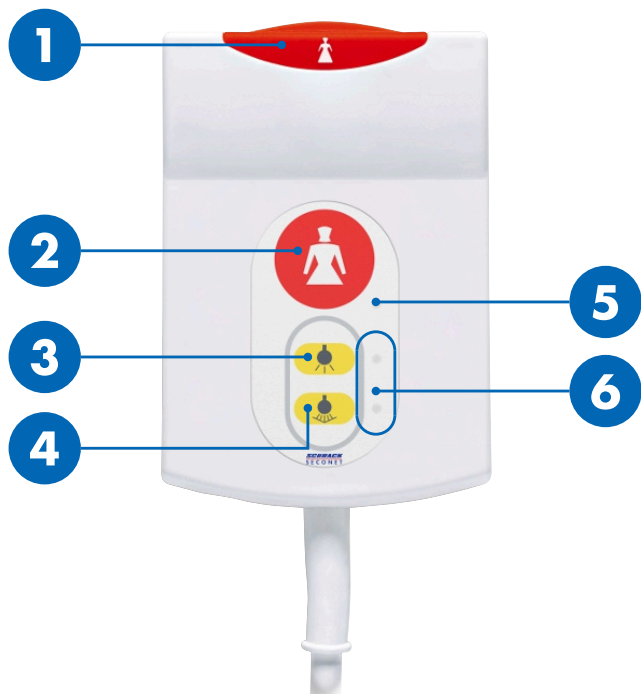

- 1 / 2 Tlačidlá privolanía
- 3 Izbové svetlo
- 4 Svetlo na čítanie
- 5 LED tlačidlá privolanía
- 6 LED tlačidlá svetla



UPOZORNENIE

Nepoužívajte na privolanie pomoci

Kábel a zariadenie neslúži na privolanie pomoci. Nepoužívajte zariadenie na dvíhanie sa.

Privolanie zdravotníckeho personálu

Tlačidlo privolanía  1 a LED 5 nepretržite svietia, vďaka čomu je ľahké ich lokalizovať v tme.

Privolanie zdravotníckeho personálu

Stlačte tlačidlo privolanía  1 alebo 2.

- ▶ Tlačidlo privolanía  1 a LED 5 sa rozsvietia.

Zapnutie a vypnutie svetla

LED tlačidiel svetla 6 nepretržite svietia, vďaka čomu je ľahké ich lokalizovať v tme.

Izbové svetlo (voliteľné)

Stlačte tlačidlo izbové svetlo  3 krátko.

- ▶ Izbové svetlo je zapnuté alebo vypnuté.

Svetlo na čítanie (voliteľné)

Stlačte tlačidlo svetlo na čítanie  4 krátko.

- ▶ Svetlo na čítanie je zapnuté alebo vypnuté.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitvová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199