


# Bouton poire de lit BT-IP

---

**Manuel d'utilisation**

# Aperçu

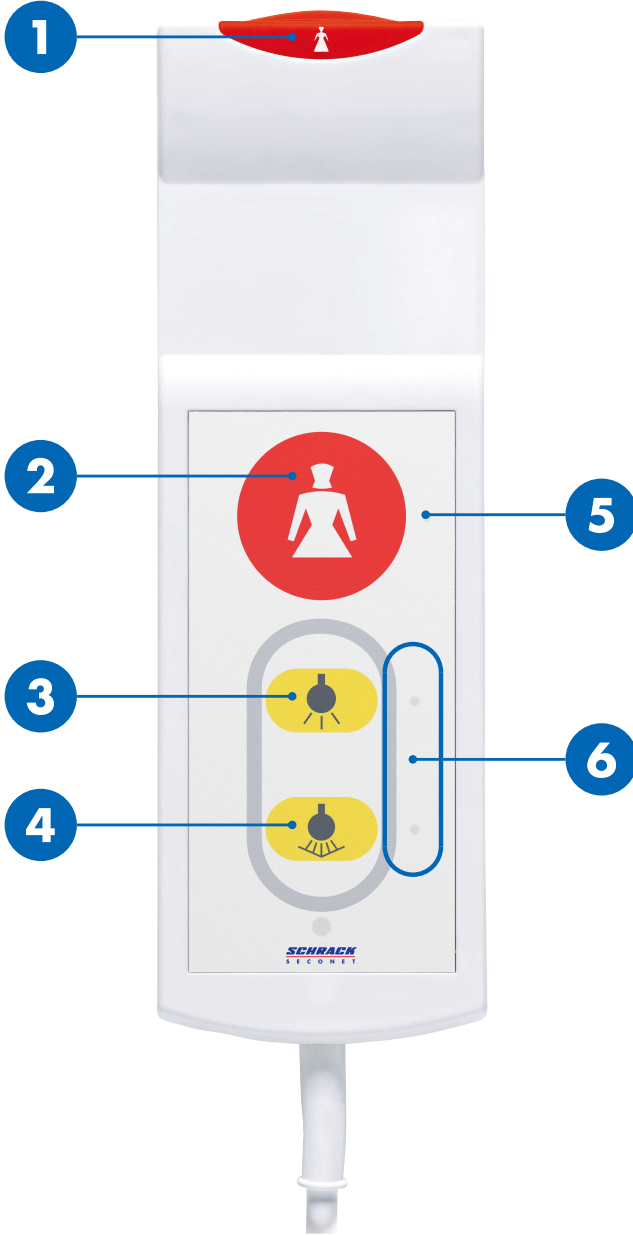

- 1 / 2 Boutons d'appel
- 3 Lumière de la chambre
- 4 Lampe de lecture
- 5 LED du bouton d'appel (voyant rassurant)
- 6 LED du bouton de lumière (voyant de position)



#### **ATTENTION**

#### **Ne pas utiliser pour se lever**

Le câble et le dispositif ne sont pas une aide pour se lever. Ne pas tirer sur le dispositif pour se redresser.

## **Appel personnel soignant**

Le bouton d'appel  1 et la LED 5 sont allumés en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

### **Appeler le personnel soignant**

Appuyer sur le bouton d'appel  1 ou 2.

- ▶ Le bouton d'appel  1 et la LED 5 s'allument.

## **Allumer et éteindre la lumière**

Les LED des boutons de lumière 6 sont allumées en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

### **Lumière de la chambre (en option)**

Appuyer brièvement sur le bouton de lumière dans la chambre  3.

- ▶ La lumière s'allume ou s'éteint.

### **Lampe de lecture (en option)**

Appuyer brièvement sur le bouton de lampe de lecture



- ▶ La lampe de lecture s'allume ou s'éteint.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

## **schrack-seconet.com**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199