

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
office@schrack-seconet.com | 857 50 43+

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hågersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

לחצני קריאה	1 / 2
תאורת חדר	3
תאורת קריאה	4
מיקרופון	5
רמקול	6
צג	7
LED של לחצן קריאה (תאורת הרגעה)	8
LED של כפתור תאורה (תאורת גילוי)	9

זהירות אסור להשתמש כעזר לטיפוס

הכבל והמכשיר אינם עוזר לטיפוס. אל תמשוך את עצמך מעלה ע"י שימוש במכשיר.

קריאה לצוות סיוע

לחצן הקריאה **1** וה-**8** LED מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הלחצנים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

יצירת קשר עם צוות הסיוע

לחץ על לחצן הקריאה **1** או **2**.
 ◀ לחצן קריאה **1** ו-**8** LED נדלקים.

תשובות צוות הסיוע

1. רעשי נוגג ברמקול **6** ולחצן קריאה/LED מהבהב.
2. השתמש במסוף המטופל כמו בטלפון כדי לדבר עם צוות הסיוע.
3. צוות הסיוע ינתק את ההתקשרות בסוף השיחה.

כיבוי והדלקה של התאורה

ה-LED של כפתורי התאורה **9** מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הכפתורים גם בחושך, בקלות רבה יותר.


תאורת חדר (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר **3**  לחיצה קצרה.
 ◀ תאורת החדר נדלקת ונכבית.

תאורת קריאה (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר **4**  לחיצה קצרה.
 ◀ תאורת הקריאה נדלקת ונכבית.

סקירה כללית

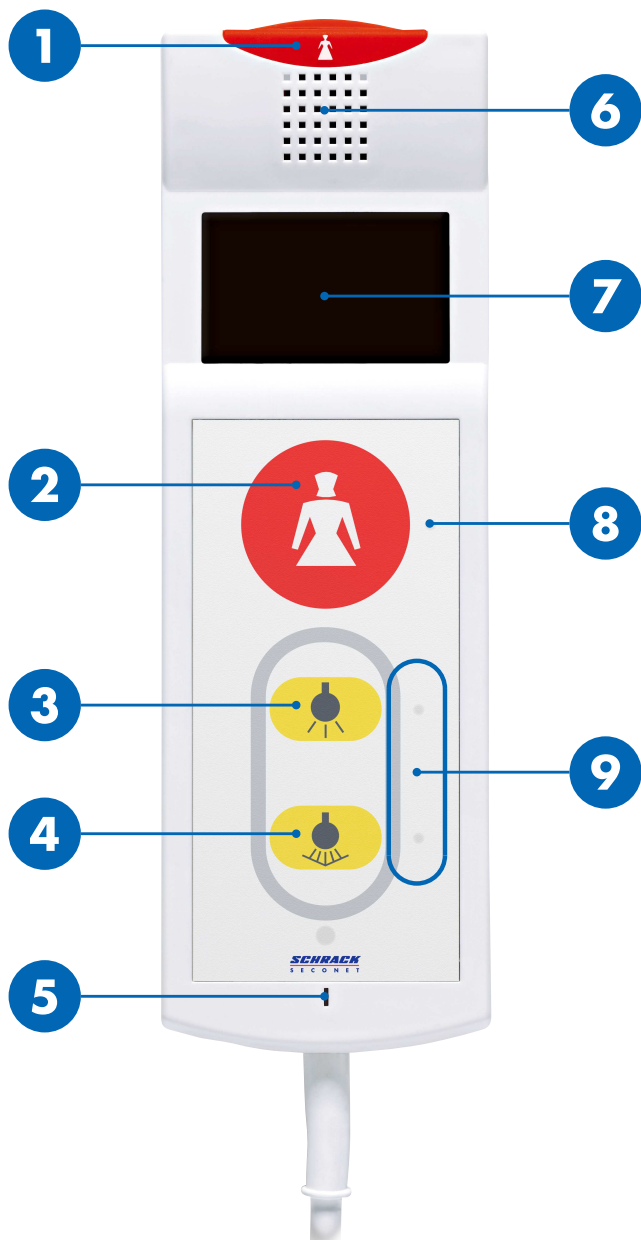

מסוף מטופל PAT-L

מדריך למשתמש