


Pasientterminal PAT

Bruksanvisning

Oversikt

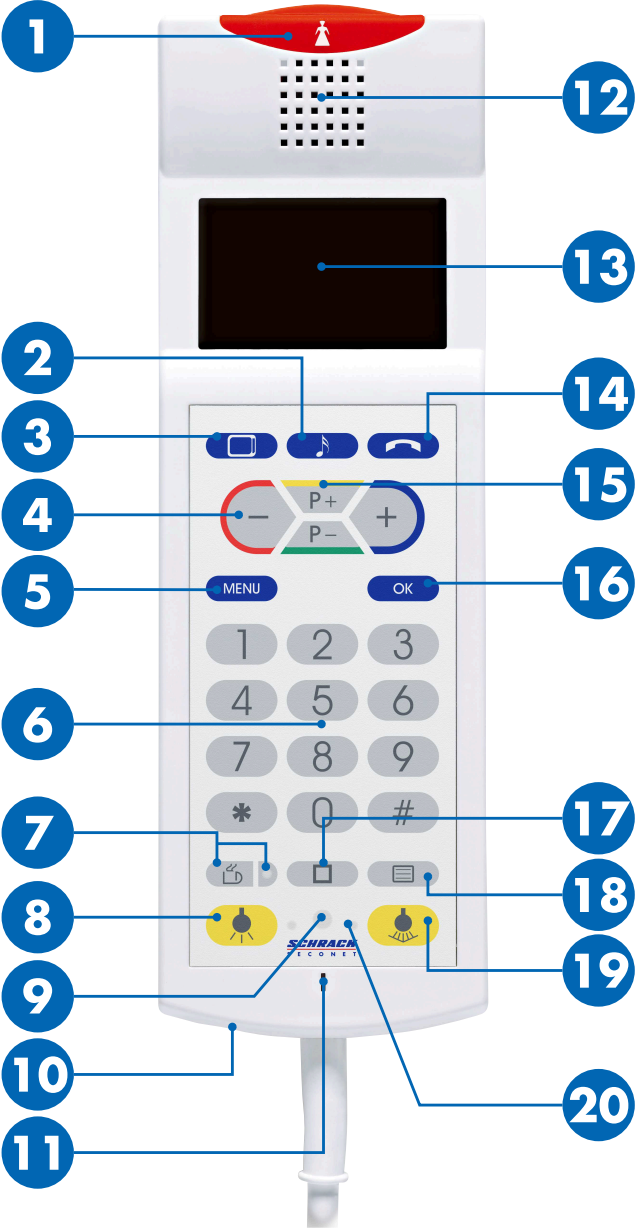

- 1 Tilkallingsknapp
- 2 Radio-knapp
- 3 TV-knapp
- 4 -/+ -knapp
- 5 Meny-knapp
- 6 Talltastatur
- 7 Tilkalle service-knapp med LED-lys (søkelys)
- 8 Romlys
- 9 Infrarød mottaker (valgfri)
- 10 Hodetelefonuttak
- 11 Mikrofon
- 12 Høytaler
- 13 Display
- 14 Telefon-knapp
- 15 Programvalg-knapper
- 16 Bekreftelsesknapp
- 17 Spesialfunksjon-knapp
- 18 Tekst-TV-knapp
- 19 Leselys
- 20 LED på lysknapp (søkelys)

**FORSIKTIG****Ikke bruk som hjelp til å reise seg opp**

Ledning og apparat er ikke hjelp til å reise seg opp. Ikke dra deg selv opp ved bruk av apparatet.

Drift

Tilkalling av omsorgspersonell

Tilkallingsknappen  **1** lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Tilkall omsorgspersonell

Trykk på knappen  **1**.

- Tilkallingsknappen  **1** lyser opp.

Svar fra omsorgspersonell

1. Pling-lyd over høyttaleren **12** og tilkallingsknappen blinker.
2. Bruk pasientterminalen som en telefon for å snakke med omsorgspersonellet.
3. Omsorgspersonellet avslutter samtalen når denne er ferdig.

Tilkall service

LED-lyset på lysknappene lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Trykk på knappen for å tilkalle service  **7**.

- Knappen for å tilkalle service  **7** lyser opp.

Servicepersonalet vil enten ringe deg opp på apparatet eller komme til deg personlig.

Skru lyset av og på

LED-lyset på lysknappene **20** lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Romlys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for romlys  **8**.

- Romlyset skrur på eller av.

Leselys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for leselys  **19**.

- Leselyset skrur på eller av.

Menyfunksjoner

Sette lysstyrke på display

1. Trykk på knappen **MENY** **5**.
2. Velg **Lysstyrke** på displayet **13** ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-** **15**.
3. Bekreft med **OK**-knappen **16**.
4. Still inn den ønskede lysstyrken med **-/+** knappene **4**.
5. Bruk meny-knappen **MENY** **5** for å forlate menyen.

Sette kontrast på display

1. Trykk på knappen **MENY** **5**.
2. Velg **Kontrast** på displayet **13** ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-** **15**.
3. Bekreft med **OK**-knappen **16**.
4. Still inn den ønskede kontrasten med **-/+** knappene **4**.
5. Bruk meny-knappen **MENY** **5** for å forlate menyen.

Sette lydstyrke

1. Trykk på knappen **MENY** **5**.
2. Velg **Lydstyrke** på displayet **13** ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-** **15**.
3. Bekreft med **OK**-knappen **16**.
4. Velg funksjonen lydstyrken skal stilles for ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-** **15**.
5. Still inn den ønskede lydstyrken med **-/+** knappene **4**.
6. Bruk meny-knappen **MENY** **5** for å forlate menyen.

Sette ringetone

1. Trykk på knappen **MENY** **5**.
2. Velg **Ringetoner** på displayet **13** ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-** **15**.
3. Bekreft med **OK**-knappen **16**.
4. Velg ønsket ringetone ved å bruke programvalg-knappene **P+/P-** **15**.
5. Bruk meny-knappen **MENY** **5** for å forlate menyen.

Valgfrie funksjoner

TV

Skru TV-en på og av

Trykk på TV-knappen  3 for å skru TV-en av eller på.

- ▶ TV-en er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet 13.

Velg kanal

Tast inn nummeret på kanalen på talltastaturet 6 eller bytt til neste kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+/P-** 15.

Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler 12 eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak 10).

Still inn den ønskede lydstyrken med **-/+** knappene 4.

Sette på tekst-TV

1. Trykk knappen for tekst-TV  18 for å gå inn eller ut av tekst-TV.
2. Tast inn nummeret på siden på talltastaturet 6 eller gå til neste side ved å bruke programvalg-knappene **P+/P-** 15.

Radio

Skru radio av og på

Trykk på radio-knappen  2 for å skru radioen av eller på.

- ▶ Radioen er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet 13.

Velg kanal

Tast inn nummeret på kanalen på talltastaturet 6 eller bytt til neste kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+/P-** 15.

Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler 12 eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak 10).

Still inn den ønskede lydstyrken med **-/+** knappene 4.

Telefon

Ta imot en samtale

1. Ta imot en innkommende samtale med telefon-knappen  14.
2. Still inn den ønskede lydstyrken med **-/+** knappene 4.
3. Trykk på telefon-knappen  14 for å avslutte en samtale.

Gjøre en telefonoppringning

1. Trykk på telefon-knappen  14.
2. Trykk på talltastaturet for å få linje ut (vanligvis 0, forhør deg med de ansatte).
3. Ring til det nummeret du ønsker ved bruk av talltastaturet 6.
4. Bekreft med **OK**-knappen 16.
5. Trykk på telefon-knappen  14 for å avslutte en samtale.

Ring siste nummer

1. Trykk på telefon-knappen  14.
2. Det ti siste oppringte numre vises på displayet 13.
3. Velg det ønskede nummeret ved bruk av **-/+** knappene 4.
4. Bekreft med **OK**-knappen 16.
5. Trykk på telefon-knappen  14 for å avslutte en samtale.

Kontroll av persiennene

1. Trykk spesialfunksjon-knappen  17.
2. Velg **Persienn** på displayet 13 ved bruk av programvalg-knappene **P+/P-** 15.
3. Åpne eller lukke persiennene med **-/+** knappene 4.

Infrarød mottaker

Den infrarøde mottakeren bruker for å fjernstyre pasientterminalen gjennom miljøkontrollenheter.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199