


Pacientský terminál PAT-E

Uživatelská příručka

Prehľad

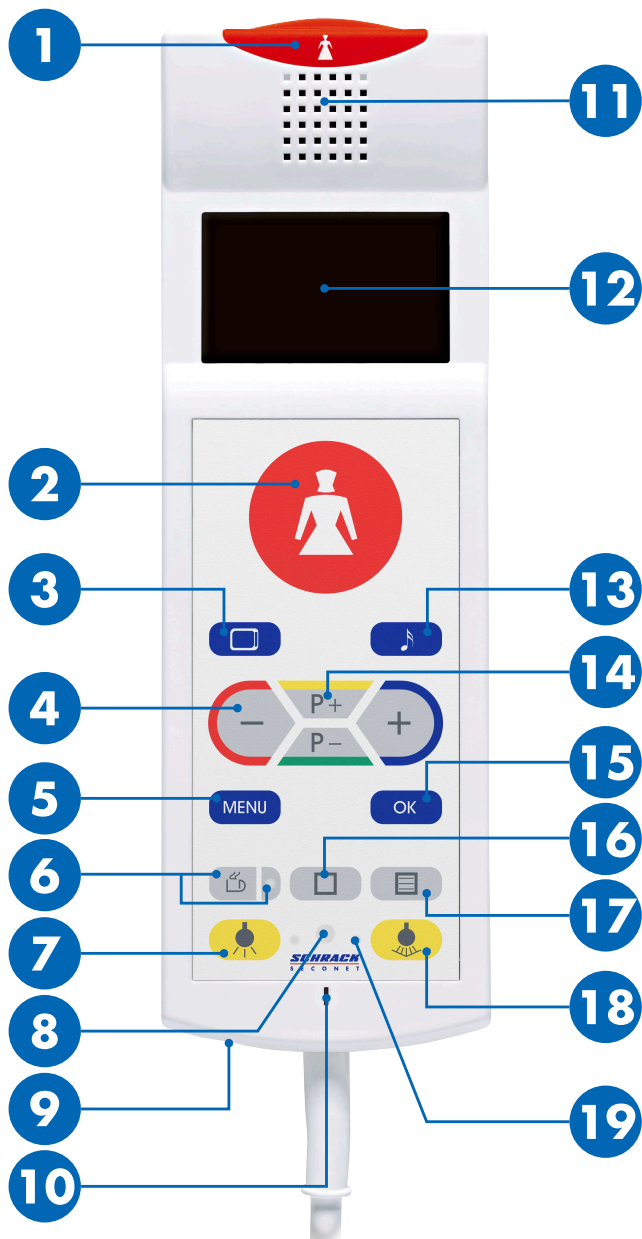

- 1 / 2 Tlačidlá privolania
- 3 TV tlačidlo
- 4 -/+ tlačidlo
- 5 Menu tlačidlo
- 6 Tlačidlo privolanie služby s LED
- 7 Izbové svetlo
- 8 Infračervený prijímač (voliteľné)
- 9 Pripojenie slúchadiel
- 10 Mikrofón
- 11 Reproduktor
- 12 Displej
- 13 Rádio tlačidlo
- 14 Tlačidlá výberu programu
- 15 Potvrdzovacie tlačidlo
- 16 Tlačidlo špeciálnej funkcie
- 17 Teletext tlačidlo
- 18 Svetlo na čítanie
- 19 LED tlačidla svetla



UPOZORNENIE

Nepoužívajte na privolanie pomoci

Kábel a zariadenie neslúži na privolanie pomoci. Nepoužívajte zariadenie na dvíhanie sa.

Prevádzka

Privolanie zdravotníckeho personálu


Tlačidlo privolaní  1 nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

Privolanie zdravotníckeho personálu

Stlačte tlačidlo privolaní  1 alebo 2.

- ▶ Tlačidlo privolaní  1 sa rozsvieti.

Odpovede zdravotníckemu personálu

1. Z reproduktora zaznie gong  1 a tlačidlo privolaní bliká.
2. Použite patientský terminál ako telefón na rozprávanie sa s personálom.
3. Zdravotnícky personál ukončí hovor na konci rozhovoru.

Privolanie služby

LED tlačidla nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

Stlačte tlačidlo privolanie služby  6.

- ▶ LED tlačidla privolaní služby  6 sa rozsvieti.

Služobný personál Vám zavolá na zariadenie alebo príde osobne.

Zapnutie a vypnutie svetla

LED tlačidiel svetla  19 nepretržite svietia, vďaka čomu je ľahké ich lokalizovať v tme.

Izbové svetlo (voliteľné)

Stlačte tlačidlo izbové svetlo  7 krátko.

- ▶ Izbové svetlo je zapnuté alebo vypnuté.







Svetlo na čítanie (voliteľné)

Stlačte tlačidlo svetlo na čítanie  18 krátko.







- ▶ Svetlo na čítanie je zapnuté alebo vypnuté.

Funkcie menu








Nastavenie jasu displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU**  5.
2. Vyberte **Brightness** na displeji  12 použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-**  14.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom  15.
4. Nastavte želaný jas použitím **-/+** tlačidiel  4.
5. Použite tlačidlo menu **MENU**  5 na opustenie menu.

Nastavenie kontrastu displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU**  5.
2. Vyberte **Contrast** na displeji  12 použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-**  14.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom  15.
4. Nastavte želaný kontrast použitím **-/+** tlačidiel  4.
5. Použite tlačidlo menu **MENU**  5 na opustenie menu.

Nastavenie hlasitosti

1. Stlačte tlačidlo **MENU**  5.
2. Vyberte **Volume** na displeji  12 použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-**  14.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom  15.
4. Vyberte pre ktorú funkciu má byť hlasitosť nastavená použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-**  14.
5. Nastavte želanú hlasitosť použitím **-/+** tlačidiel  4.
6. Použite tlačidlo menu **MENU**  5 na opustenie menu.

Voliteľné funkcie

TV

Zapnutie a vypnutie TV

Stlačte tlačidlo TV  **3** na zapnutie alebo vypnutie TV.

- ▶ TV je zapnutý a na displeji sa zobrazí posledný pozieraný kanál **12**.

Výber kanála


Prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **14**.

Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor **11** alebo slúchadlá (prípojovacia zásuvka **9**).

Nastavte želanú hlasitosť použitím **-/+** tlačidiel **4**.

Vyvolanie teletextu

1. Stlačte tlačidlo teletext  **17** na vyvolanie alebo opustenie teletext módu.
2. Prepnite na ďalšiu stranu použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **14**.

Rádio

Zapnutie a vypnutie rádia

Stlačte tlačidlo rádio  **13** na zapnutie alebo vypnutie rádia.

- ▶ Rádio je zapnuté a na displeji sa zobrazí posledný počúvaný kanál **12**.

Výber kanála


Prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **14**.

Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor **11** alebo slúchadlá (prípojovacia zásuvka **9**).

Nastavte želanú hlasitosť použitím **-/+** tlačidiel **4**.

Ovládanie žalúzií

1. Stlačte tlačidlo špeciálnej funkcie  **16**.
2. Vyberte **Blinds** na displeji **12** použitím tlačidiel výberu programu **P+/P-** **14**.
3. Vytiahnite alebo zatiahnite žalúzie použitím **-/+** tlačidiel **4**.

Infračervený prijímač

Infračervený prijímač sa používa na vzdialenú kontrolu pacientského terminálu kontrolnými zariadeniami.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199