




Patiënten terminal PAT-L

Gebbruikershandleiding

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Overzicht

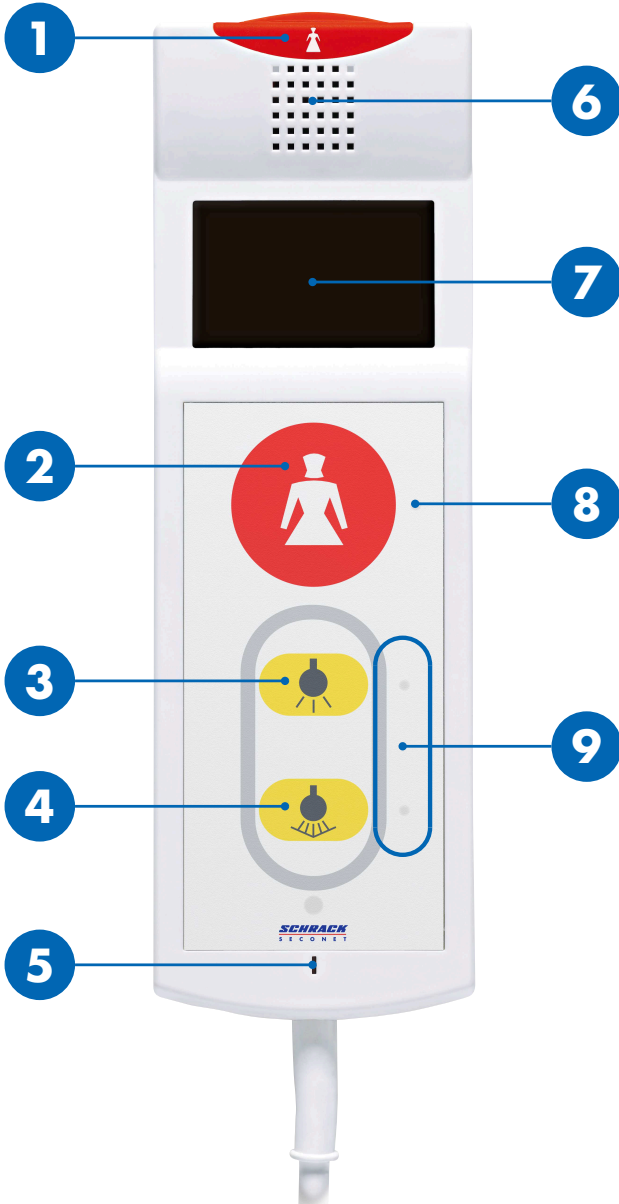

1 / 2	Verpleegkundige oproeptoetsen
3	Kamerverlichting
4	Bedleesverlichting
5	Microfoon
6	Luidspreker
7	Display
8	Geruystel LED verpleegkundige oproeptoets
9	Oriëntatie LED verlichting



VOORZICHTIG

Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken

Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf niet op met behulp van dit toestel.

Oproep verplegend personeel

De oproeptoets  **1** en de LED **8** zijn continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is, zelfs in het donker.

Verplegend personeel oproepen

Druk op de oproeptoets  **1** of **2**.

- De oriëntatie LED's **8** van de oproeptoets  **1** lichten nu fel op.

Binnenkomende oproep verplegend personeel

1. Oproepsignaal is hoorbaar over de luidspreker **6** en de oproeptoets/LED knippert.
2. Houdt de patiëntterminal tegen het oor zoals een telefoonhoorn.
3. Het verplegend personeel eindigt het gesprek en verbreekt de verbinding.

Verlichting aan of uitschakelen

De oriëntatie LED van de lichttoets **9** zijn continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

Kamerverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets kamerverlichting .

3.

- De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Bedleesverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets bedleesverlichting .

4.

- De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

NL

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET