




VISOCALL IP. Personalterminal ST-TOUCH.

Hurtigveiledning.

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

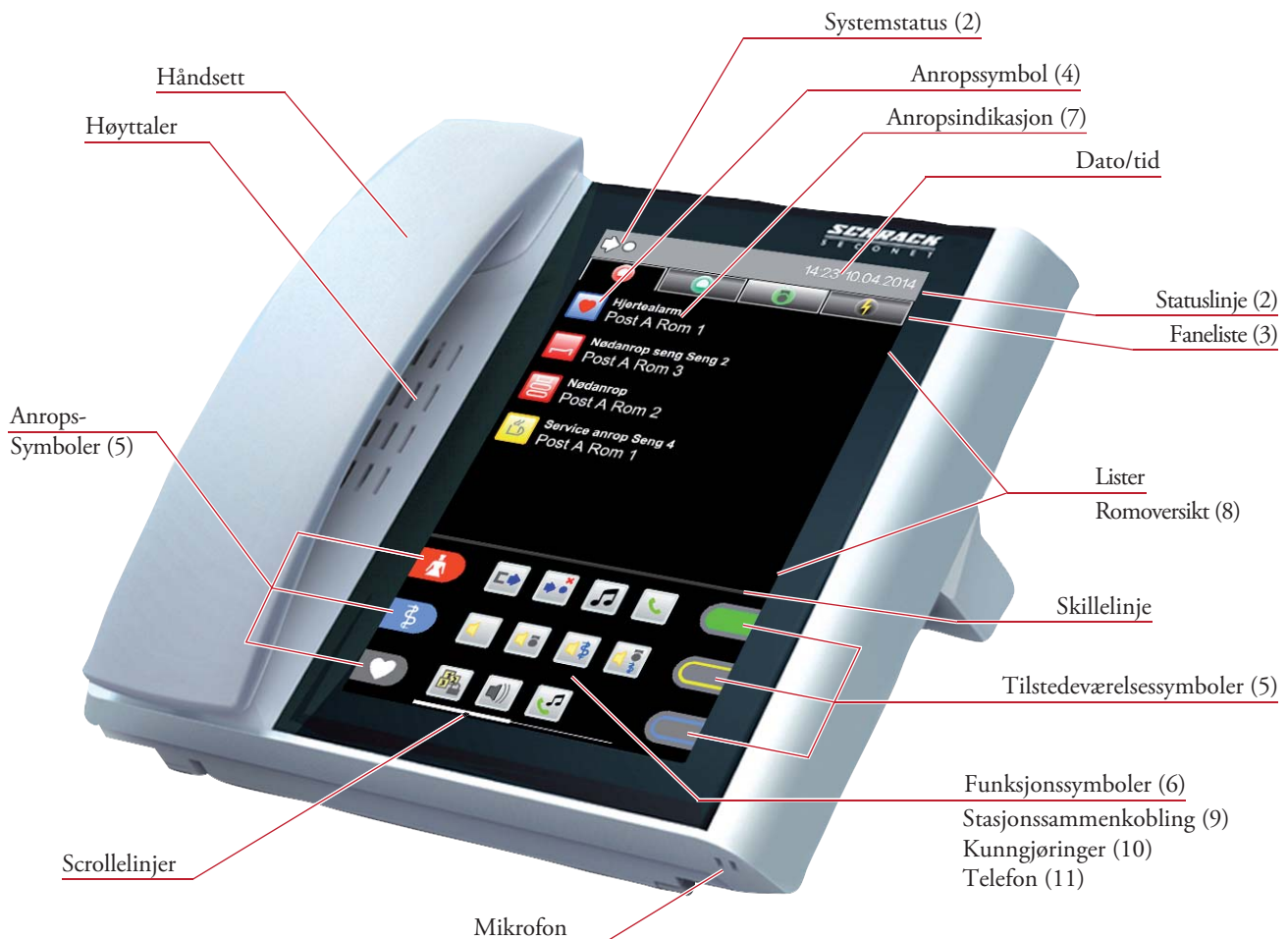


(1) Generelt

Du betjener brukergrensesnittet via berørings skjermen. Navigasjon av Staff Terminal programvare tar deg gjennom menyer, som du kan hente frem ved å trykke på symboler og knapper. For utvidet visning av innhold i lister med mer enn 6 oppføringer, drar du fingeren oppover eller nedover på skjermen. For utvidet visning av innhold i menyen til enkelte funksjoner, drar du fingeren til høyre eller venstre på skjermen. Avhengig av program vises en hvit scrollelinje på høyre eller nedre displaykant.

Du kan åpne tilhørende ulike faner eller undermenyer ved å trykke på de korresponderende symbolene i henhold til symbolikk eller forklaring. Dette gjelder for fanelisten, listeoppføringene og funksjonsområdet.

Trykk én gang til på samme faneliste for å åpne romlisten.

Trykk på symbolet  i undermenyen for listeoppføringer og i funksjonsmenyene for å gå ut av den aktuelle listen eller undermenyen.

Hurtigveiledningen til VISOCALL IP Staff Terminal skal brukes som støtte, og forutsetter grunnleggende kunnskap som du har fått i **bruksanvisningen til VISOCALL IP Staff Terminal** (K-HB-023NO).

(2) Statuslinje



Manuell stasjonssammenkobling

Den egne stasjonen er manuelt koblet sammen med en annen.



Passiv stasjonssammenkobling

En annen stasjon er manuelt koblet sammen med den egne.



Lokal sentralisering aktiv

Stasjonen viser kun anrop på Staff Terminal.



Global sentralisering aktiv

Anropene fra stasjonen gjengis med lyd kun på én sentral kontrollstasjon.



Servicenivå 1 eller 2

Denne statusen vises når man bytter fra standardnivå 0 (ingen indikator) til nivå 1 eller 2.



(3) Kategori



Anropsliste

Inneholder alle anropshendelser til hele omsorgssektoren.



Påminnellesliste

Inneholder alle rommene med angitt påminnelse.



Tilstedeværelsesliste

Inneholder alle rommene med angitt tilstedestatus.



Feilliste

Inneholder alle aktuelle tap og feil for omsorgssektoren, samt fra eventuelle tredjepartssystemer.

Fanelistens tilstander:



Listen inneholder ingen oppføringer og er ikke valgt.



Listen inneholder oppføringer og er ikke valgt.



Fanelisten ble valgt og fanen er åpnet.

(4) Anropsskjermikoner

Følgende symboler for anropstype kan vises:







	Romanrop		Diagnoseanrop kan ikke spørres
	Nødanrop fra rom		Brannalarm kan ikke spørres
	Legeanrop		DESO-alarm kan ikke spørres
	Hjertealarm		DESO lite batteri kan ikke spørres
	WC-anrop kan ikke spørres		DESO-manipulering kan ikke spørres
	WC-nødanrop kan ikke spørres		DESO-trussel kan ikke spørres
	Sengeanrop		Diagnoseutløser kan ikke spørres
	Nødanrop fra seng		Sengeutløser
	Serviceanrop		Generell hendelse

(5) Tilstedeværelses- og anropssymboler







Du kan definerte opptil 3 symboler (anrop eller tilstedeværelse) per side, og sortere dem slik du vil (systemkonfigurasjon).

- Tilstedeværelse med definert personale (sykepleier, servicepersonale eller lege),
- Utløsning av anrop med definert anrop (anrop eller nødanrop).

Anropsfunksjon (anrop eller nødanrop):
inaktivt/aktiv

		Sykepleier
		Lege
		Hjertealarm

Tilstedeværelsesfunksjon:
inaktivt/aktiv

		Sykepleier
		Servicepersonale
		Lege

(Kontinuerlig lys ved anrop,
blinkende lys ved nødanrop)

(6) Funksjonssymboler

Funksjonssymbolene vises i midten av funksjonsområdet, og kan også deles opp over flere skjermbilder (se scrollelinje). Visning av funksjonssymbol avhenger av det aktuelle servicenivået.

	Sammenkobling		
	Lokal sentralisering aktivere		Lokal sentralisering deaktivere
	Generell kunngjøring		Kunngjøring sykepleier
	Kunngjøring lege		Kunngjøringen personale
	Telefon		Radio
	Ringetone		Lydstyrke
	Stille inn tid og dato		Innstillinger – display
	Servicenivå bytte		Servicenivå avslutte

(7) Anropsindikasjon

Så snart et anrop utløses i stasjonen, endres displayvisningen automatisk, og anroplisten åpnes. Anropet fremstilles detaljert med rom- eller sengenummer og anropstype. Hvis flere anrop kommer samtidig, vises anropet med høyest prioritet alltid øverst.



The screenshot shows a mobile application interface for a call station. At the top, there is a status bar with a back arrow, a signal strength indicator, and the time and date: 14:23 10.04.2014. Below the status bar is a navigation bar with four icons: a red circle with a white exclamation mark, a green circle with a white exclamation mark, a green circle with a white exclamation mark, and a yellow lightning bolt. The main area displays a list of calls. Each call entry consists of a colored icon, a call type, and a room or bed number. Red lines with labels point to specific elements in the list:

- Anrop med høyest prioritet** points to the top call: **Legeanrop** Post A Rom 1.
- Anropstype** points to the text **Legeanrop**.
- Symbol – Anropstype** points to the blue medical symbol icon.
- Sengeposisjon** points to the text **Post A Rom 1**.
- Romposisjon** points to the text **Post A Rom 1**.

The list contains the following entries:


- Legeanrop** Post A Rom 1
- WC-nødanrop Korridor** Post A Rom 3
- Nødanrop fra seng Seng 1** Post A Rom 2
- Nødanrop** Post A Rom 4
- Serviceanrop Seng 2** Post A Rom 2

(7.1) Spørring av anrop

Følgende fremstilling viser de valgte spørringene av et nødanrop fra seng .



Trykk på listeoppføringen, så spørres anropet og menyen åpnes.

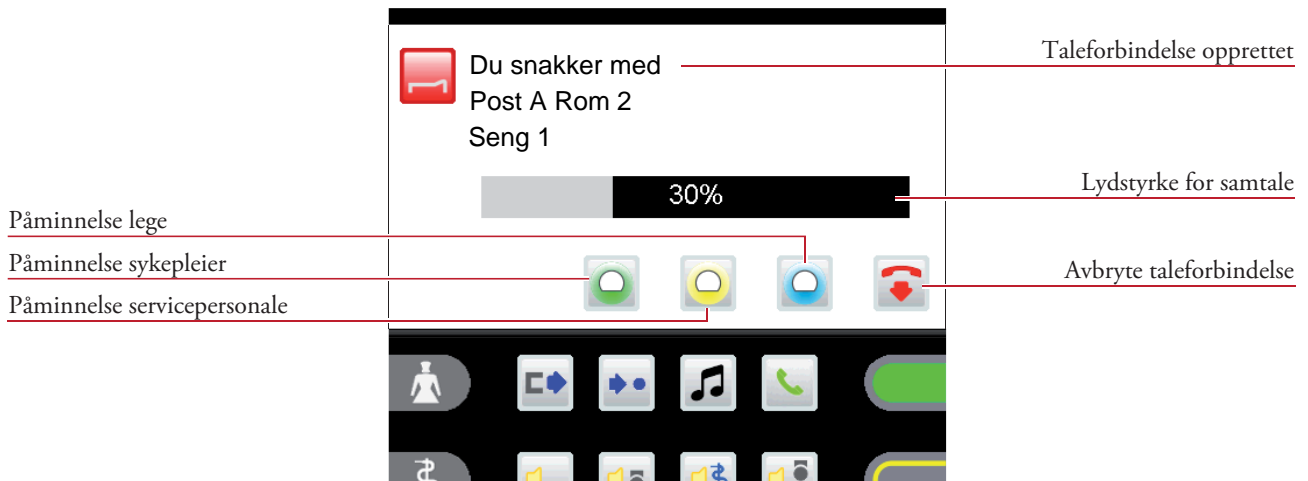

Taleforbindelse

Taleforbindelsen opprettes automatisk når man trykker på oppføringen i anropslisten. Lydstyrke for samtale (høytaler/telefonrør) kan endres under en samtale ved å trykke på linjen for lydstyrke.

Trykk på symbolet  for å avslutte taleforbindelsen umiddelbart, og et automatisk avbrudd av forbindelsen skjer etter 2 minutter.


Trykk på symbolet , , eller  for å angi en påminnelse for sykepleier, servicepersonale eller lege (se kapittel 7.2 - Påminnelse).


Spørring av anrop uten mulighet for tale

Hvis det på grunn av eksterne enheter (f.eks. WC-anrop) ikke er mulig å ha en samtale, kan du ikke svare på det gjeldende anropet .



Trykk på listeoppføringen for å spørre WC-anropet og åpne menyen. Det høres et advarselssignal.

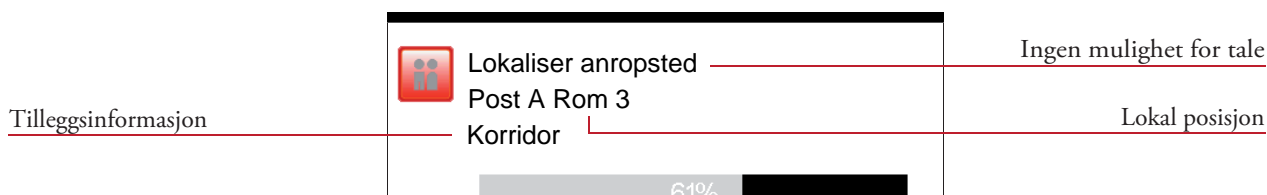







Dette anropet kan ikke bekrefte ved å trykke på symbol et . Du må gå til anropsstedet og bekrefte det der.

Man kan angi påminnelser for servicepersonale, sykepleier eller lege.

(7.2) Påminnelse

Du kan slik markere rom etter spørring av anrop, i tilfelle det ikke kommer noe svar fra den som ringer, det dreier seg om et anrop uten taleforbindelse, opptattsignalet høres, andre anrop mottas før anropsstedet oppsøkes, eller anrop til andre personer (sykepleier, servicepersonale eller lege) delegeres.

Trykk på det respektive symbolet for å aktivere påminnelsen:

	for sykepleieren	(statusindikator: 	blinker grønt)
	for servicepersonalet	(statusindikator: 	blinker gult)
	for legen	(statusindikator: 	blinker blått)

Oppføringen (aktuelt anrop - f.eks. nødanrop fra seng) fjernes fra anropslisten og overføres til påminnelleslisten.


Tilbakestilling av en påminnelse skjer ved å bruke den respektive tilstedeværelsesknappen i rommet til den som ringer!

Anrop som parkeres med påminnelser og ikke tilbakestilles ved bruk av den respektive tilstedeværelsesknappen (i rommet til den som ringer), dukker automatisk opp igjen etter en definert tid, og anropslisten åpnes.




(8.1) Romoversikt


Trykk én gang til på en valgt kategori i fanelisten, uavhengig om det er en anrops-, påminnelse-, tilstedeværelses- eller feilliste (f.eks. anropsliste).

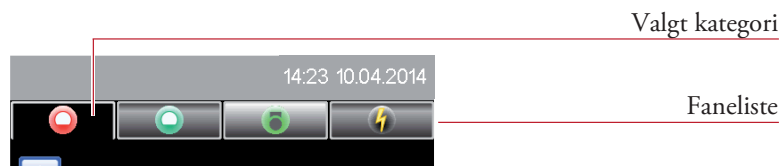


Trykk på den respektive oppføringen etter at romlisten er åpnet.

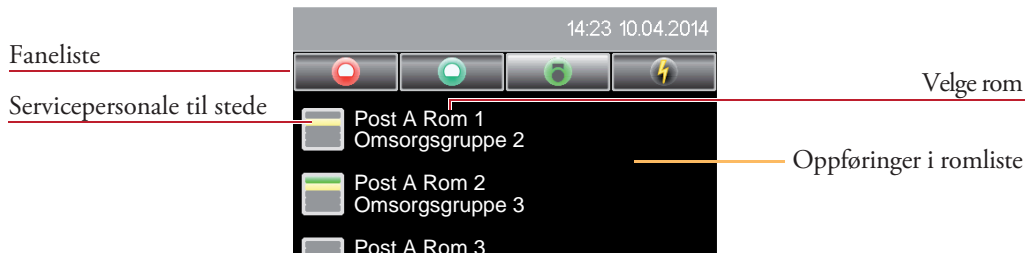

I romoversikten vises alle sengene i rommet. Alle romfunksjonene som man kan bruke på dette rommet, vises.

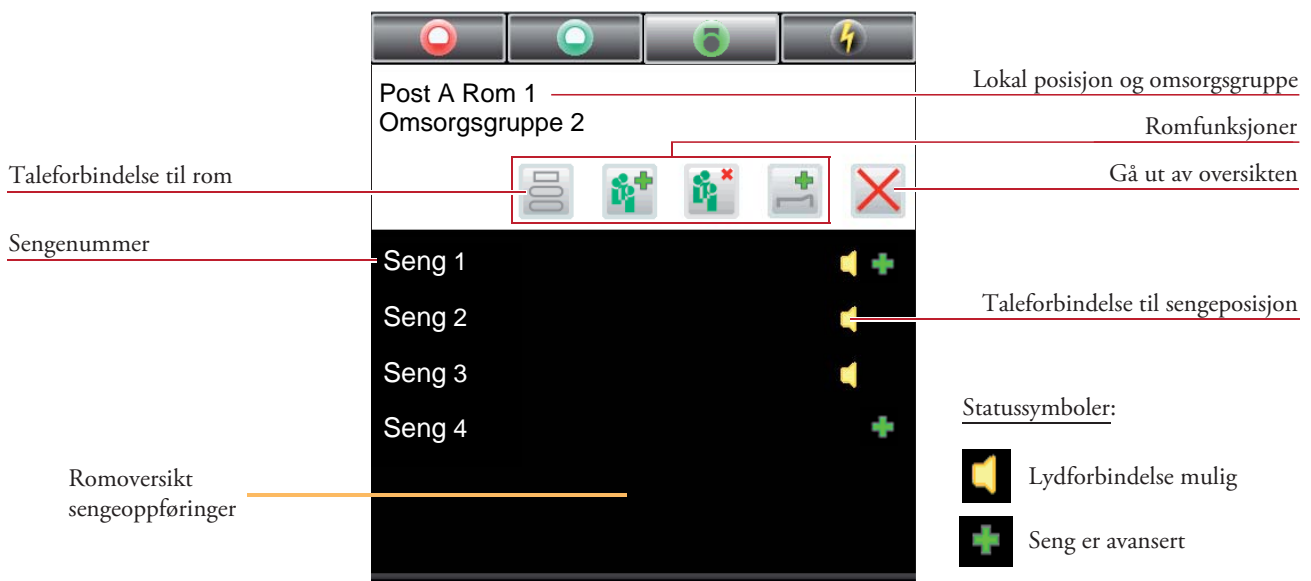

Du kan opprette en taleforbindelse til kommunikasjonsterminalen ved å trykke på romsymbolet . Trykk på et sengenummer for å opprette en taleforbindelse direkte til en pasient.

(8.2) Romfunksjoner

Du kan utføre følgende funksjoner for et rom:



Tilordne omsorgsgruppe



Oppheve omsorgsgruppe



Avansert seng



Taleforbindelse til rom


(9) Sammenkobling av stasjoner

Denne funksjoner danner omsorgsområder, som består av to eller flere stasjoner. Indikatoren, viderekobling og spørremulighet for et anrop utvides da i samsvar med prioriteringene på alle kontorterminaler og kommunikasjonsterminaler i dette området.

(9.1) Sammenkobling inaktiv

Trykk på symbolet  i funksjonsområdet. Listen over sammenkobling åpnes.


Hvis det ennå ikke finnes en aktiv sammenkobling av den egne stasjonen med en annen, vises en liste over stasjoner som det er mulig å opprette en sammenkobling med. Trykk på ønsket stasjon i listeoppføringen for å aktivere stasjonssammenkobling.

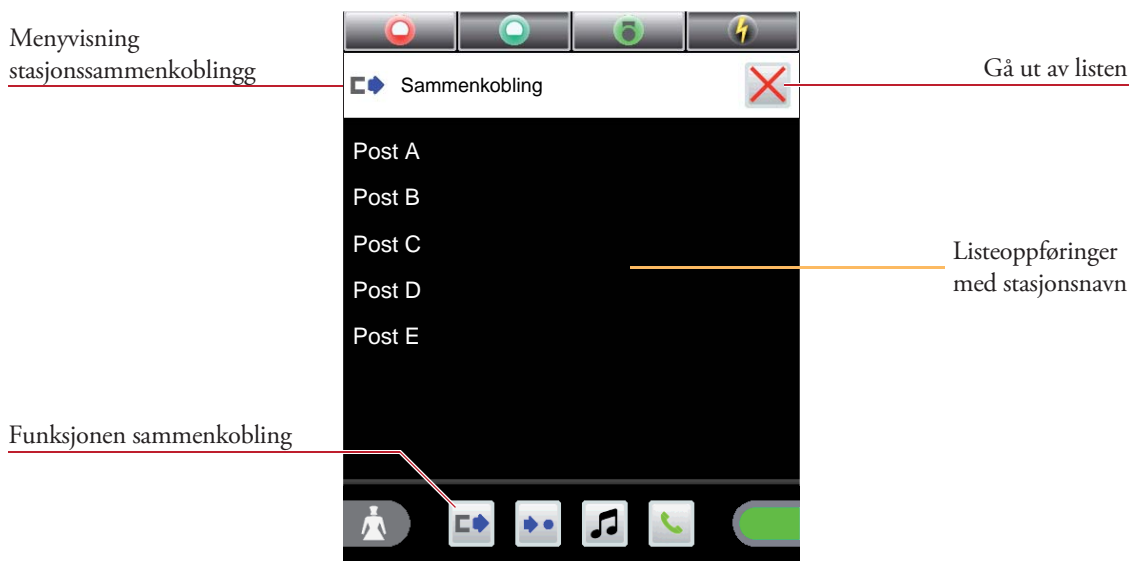

(9.2) Sammenkobling aktiv

Trykk på symbolet  i funksjonsområdet. Listen over sammenkobling åpnes.

Hvis den egne stasjonen er koblet sammen med en annen stasjon, vises alle stasjonene som er i samme stasjonsgruppe.

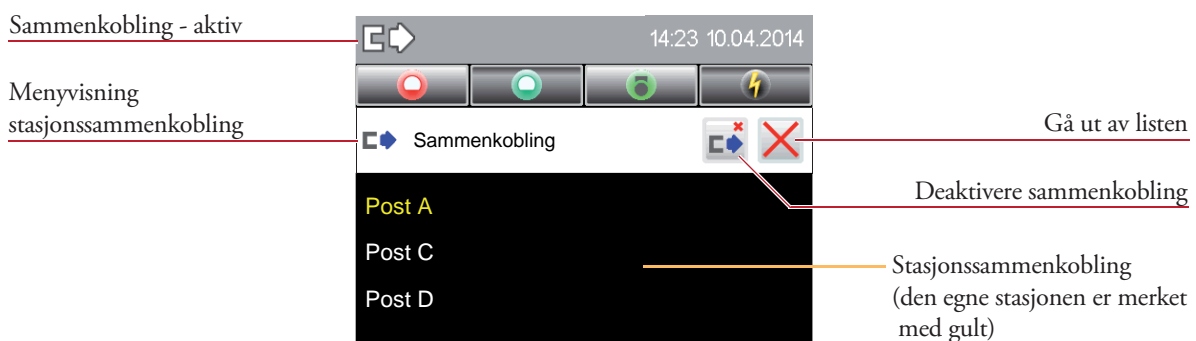

Stasjonssammenkoblingen kan oppheves i denne visningen ved å trykke på symbolet .

(10) Kunngjøringer



Kunngjøringen kan enten gjennomføres når håndsettet er lagt på via den innebygde mikrofonen, eller via håndsettet selv.



Generell kunngjøring

En kunngjøring til alle rommene i omsorgsområdet startes.



Kunngjøring sykepleier

En kunngjøring sendes til alle rommene i omsorgsområdet, der tilstedestatus for sykepleier eller servicepersonale har blitt aktivert.



Kunngjøring lege

En kunngjøring sendes til alle rommene i omsorgsområdet, der tilstedestatus for lege har blitt aktivert.



Kunngjøring personale

En kunngjøring sendes til alle rommene i omsorgsområdet, der tilstedestatus for sykepleier, servicepersonale eller lege har blitt aktivert.

Trykk på det respektive kunngjørings symbolet i funksjonsområdet. Kunngjøringen startes.




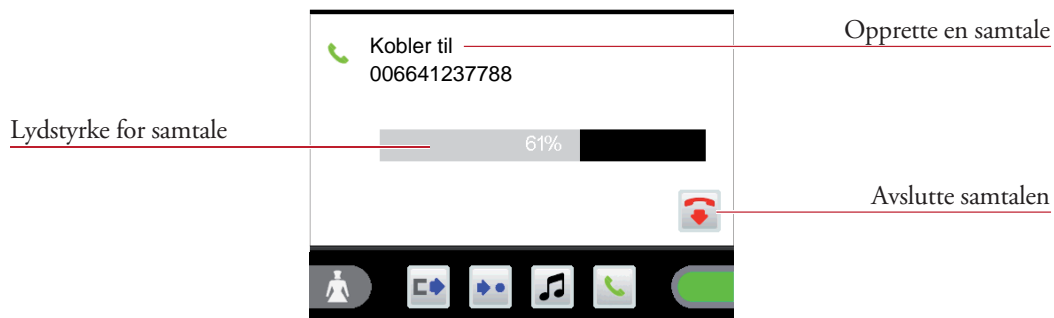
Kunngjøringen kan avsluttes enten ved å trykke på symbolet  eller ved å legge på.

(11.1) Telefon - Opprette en samtale

Trykk på symbolet  i funksjonsområdet. Menyen åpnes. I det aktive området trykker du på tallsymbolene  -  for å velge det respektive anropsnummeret.




Trykk på symbolet  for å bekrefte nummeret. Samtaleforbindelse opprettes.




Lydstyrke for samtale (høytaler/håndsett) kan endres under samtalen ved å trykke på linjen for lydstyrke.

(11.2) Spørre anrop fra telefon

Ved anrop fra telefon vises anropsnummer og navn, avhengig av konfigurasjonen av telefonsystemet.

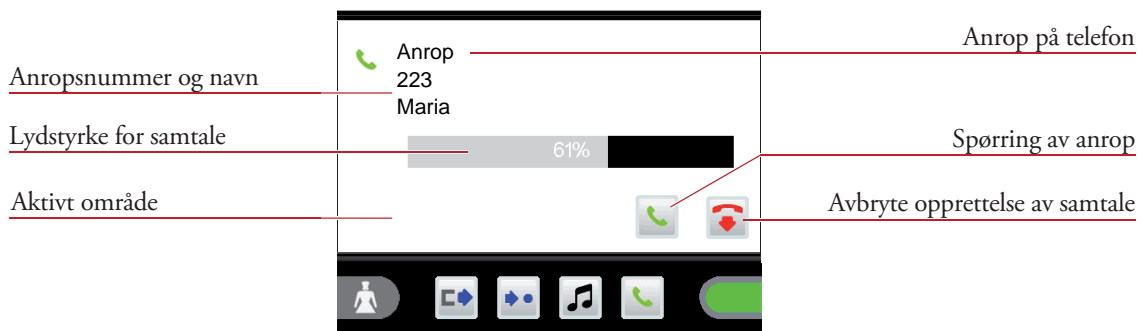

Trykk på symbolet  i det aktive området. En taleforbindelse opprettes .
Lydstyrke for samtale (høytaler/håndsett) kan endres under samtalen ved å trykke på linjen for lydstyrke.

(12) Rengjøring og desinfisering

Til Staff Terminal skal utelukkende kun desinfeksjonsmiddel brukes, som ikke inneholder estere eller ketoner, delvis eller helt. Kun desinfeksjon med tørking skal brukes, ikke desinfeksjon ved nedsenking.

Hvis det kan antas at defekte produkter har blitt forurenset, må disse rengjøres og desinfiseres før de sendes til reparasjon, i henhold til disse instruksjonene.

(13) Drift og vedlikehold

Drift av lyssignaliseringsanlegget VISOCALL IP. er underlagt artikkel 9 i standarden DIN VDE0834 del 1. Vi vil gjerne påpeke at det i denne artikkelen er påkrevd at man blant annet utfører regelmessige inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid, noe vi gjerne utfører på deres vegne.



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnnergasse 18

A-1120 Vienna

Tel.: +43-1-81157-0

office@schrack-seconet.com

www.schrack-seconet.com

NO

Czech Rep. • CZ-100 00 Prague 10, V Úžlabině 1490/70 • Tel.: +420-2-74782284

Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel.: +36-1-4644300

India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel.: +91-124-4141501

Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinum V • Tel.: +48-22-33 00 620

Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A/1, Sector 2 • Tel.: +40-372 756 316

Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel.: +7-495-510 50 15

Slovakia • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel.: +421-2-44635595

Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel.: +46-8-680 18 60

Turkey • TR-34722 Kadıköy–İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel.: +90-216-345 51 99

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T