


Potilaspääte PAT-E

Käyttöopas

Yleiskuvaus

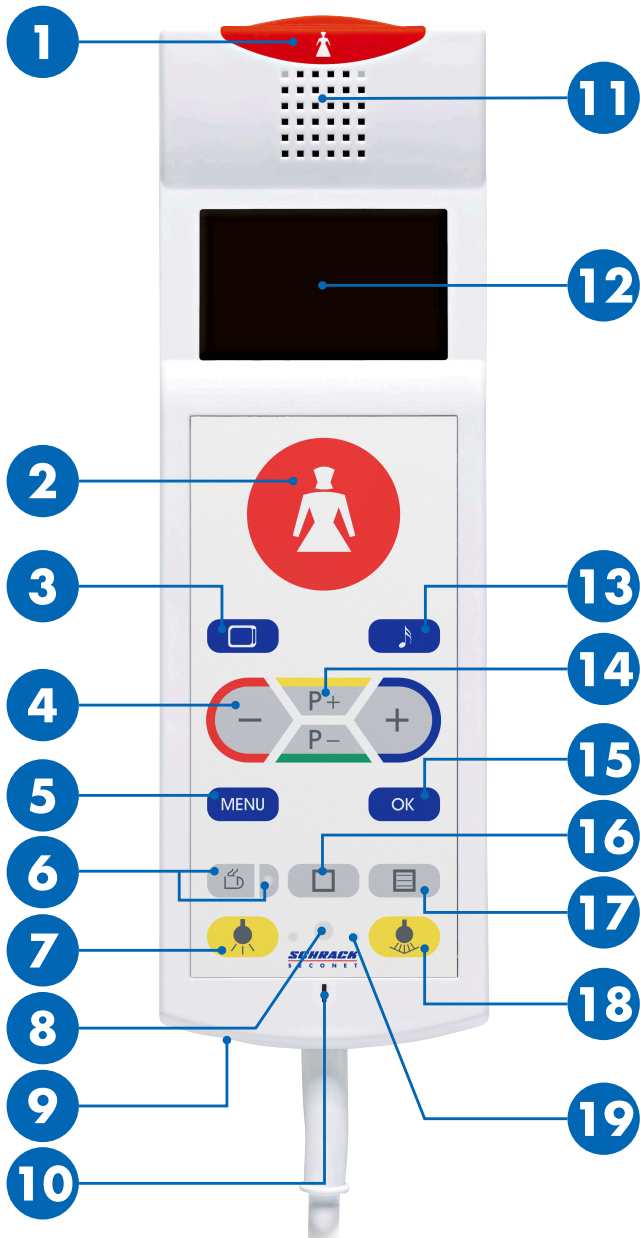

- 1 / 2 Kutsupainikkeet
- 3 TV-painike
- 4 +/--painike
- 5 Valikkopainike
- 6 Palvelukutsupainike ja LED-valo (apuvalo)
- 7 Huonevalo
- 8 Infrapunavastaanotin (valinnainen)
- 9 Kuulokeliitäntä
- 10 Mikrofoni
- 11 Kaiutin
- 12 Näyttö
- 13 Radio-painike
- 14 Ohjelman valintapainikkeet
- 15 Vahvistuspainike
- 16 Erityistoimintopainike
- 17 Teksti-TV-painike
- 18 Lukuvalo
- 19 Valopainikkeen LED-valo (apuvalo)



HUOMIO

Ei saa käyttää nousutukena

Johto ja laite eivät ole nousutukia. Älä vedä itseäsi ylös laitteen avulla.

Toiminnassa

Hoitajakutsu


Kutsupainike  1 palaa jatkuvasti, jotta se on helpompi nähdä myös pimeässä.

Hoitajan kutsuminen

Paina kutsupainiketta  1 tai  2.

► Kutsupainikkeen merkkivalo  1 syttyy.

Hoitaja vastaa

1. Merkkiääni kuuluu kaiuttimesta  1 ja kutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu.
2. Puhu hoitajan kanssa käyttämällä potilaspäätettä puhelimen tavoin.
3. Hoitaja katkaiseen puhelun sen päätyttyä.

Huoltokutsu

Painikkeen LED-valo palaa jatkuvasti, jotta se on helpompi nähdä myös pimeässä.

Paina huoltokutsupainiketta  6.

► Huoltokutsupainikkeen LED-valo  6 syttyy.

Huoltohenkilö joko soittaa takaisin laitteeseen tai saapuu luoksesi.

Valon syyttäminen ja sammuttaminen

Valopainikkeiden LED-valot  19 palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

Huonevalo (valinnainen)

Paina huonevalon painiketta  7 lyhyesti.

► Huonevalo syttyy tai sammuu.







Lukuvalo (valinnainen)

Paina lukuvalon painiketta  18 lyhyesti.







► Lukuvalo syttyy tai sammuu.

Valikkotoiminnot








Näytön kirkkauden säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta  5.
2. Valitse **Brightness** (Kirkkaus) näytössä  12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+/P-**  14.
3. Vahvista painamalla **OK**-painiketta  15.
4. Säädä kirkkaus haluamallesi tasolle **-/+**-painikkeilla  4.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta  5.

Näytön kontrastin säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta  5.
2. Valitse **Contrasti** (Kontrasti) näytössä  12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+/P-**  14.
3. Vahvista painamalla **OK**-painiketta  15.
4. Säädä kontrasti haluamallesi tasolle **-/+**-painikkeilla  4.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta  5.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta  5.
2. Valitse **Volume** (Äänenvoimakkuus) näytössä  12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+/P-**  14.
3. Vahvista painamalla **OK**-painiketta  15.
4. Valitse toiminto, jonka äänenvoimakkuutta haluat säätää, käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+/P-**  14.
5. Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle **-/+**-painikkeilla  4.
6. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta  5.

Lisätoiminnot

TV

Television kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke televisio päälle tai pois päältä painamalla TV-painiketta  3.

- ▶ Televisio kytkeytyy päälle, ja ilmoitus viimeksi katsellusta kanavasta näkyy näytöllä 12.

Kanavan valinta


Vaihda kanavaa kanavan valintapainikkeilla **P+/P-** 14.

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänen ulostulo kaiuttimesta 11 tai kuulokkeista (kuulokeliitäntä 9).

Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle -/+ painikkeilla 4.

Tekstitelevisio

1. Siirry teksti-TV-tilaan tai poistu siitä painamalla teksti-TV-painiketta  17.
2. Siirry seuraavalle sivulle ohjelman valintapainikkeilla **P+/P-** 14.

Radio

Radion kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke radio päälle tai pois päältä painamalla radio-painiketta  13.

- ▶ Radio kytkeytyy päälle, ja ilmoitus viimeksi kuunnellusta kanavasta näkyy näytöllä 12.

Kanavan valinta


Vaihda kanavaa kanavan valintapainikkeilla **P+/P-** 14.

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänen ulostulo kaiuttimesta 11 tai kuulokkeista (kuulokeliitäntä 9).

Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle -/+ painikkeilla 4.

Verhojen säätäminen

1. Paina erityistoimintojen painiketta  16.
2. Valitse **Blinds** (Verhot) näytössä 12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+/P-** 14.
3. Avaa tai sulje verhot -/+-painikkeella 4.

Infrapunavastaanotin

Potilas päätetään etäohjataan ohjauslaitteilla infrapunavastaanottimen avulla.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199