




Hasta El Seti PAT-E

Kullanım kılavuzu

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Genel bakış

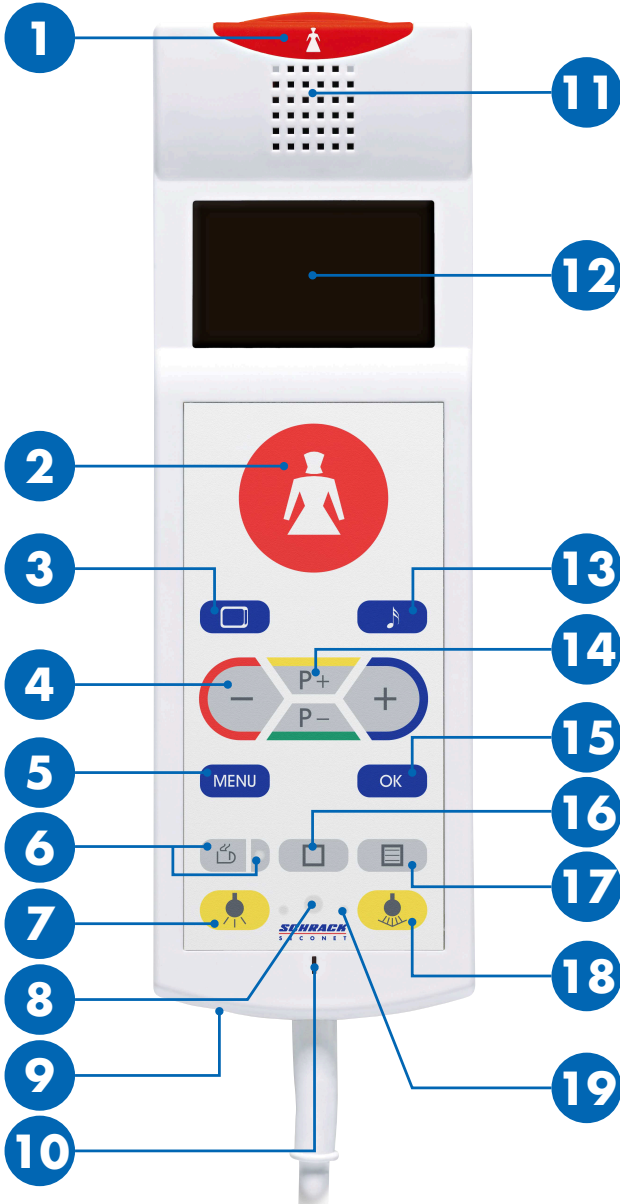

1 / 2	Çaęrı butonları
3	TV butonu
4	-/+ butonu
5	Menü butonu
6	LED'li servis çağrı butonu
7	Oda lambası
8	Kızılötesi alıcı (opsiyonel)
9	Kulaklık bağlantısı
10	Mikrofon
11	Hoparlör
12	Ekran
13	Radyo butonu
14	Program seçim butonları
15	Onay butonu
16	Özel fonksiyon butonu
17	Teletekst butonu
18	Okuma lambası
19	LED'li lamba butonu




DİKKAT

Kalkmaya yardım için kullanmayın


Kablo ve cihaz kalkmaya yardımcı değildir. Cihazı kullanarak kendinizi yukarı kaldırmayın.

Bakım personeli çağırısı


Çağrı butonu  1 sürekli yanar, böylece karanlıkta yeri daha kolay bulunur.

Bakım personelinin arama

Çağrı butonuna  1 veya  2 basılır.


► Çağrı butonu  1 yanar.

Bakım personel çağrı cevabı

1. Hoparlörden gong sesi duyulur  11 ve çağrı butonu yanıp söner.
2. Hasta el seti bakım personeli ile konuşmak için telefon gibi kullanılır.
3. Bakım personeli görüşmenin sonunda aramayı sonlandırır.

Servis çağırısı


Buton LED'i sürekli yanar, böylece karanlıkta yeri daha kolay bulunur.

Çağrı butonuna  6 basılır.


► Servis çağrı buton LED'i  6 yanar.

Servis personeli hastayı ya arayacak yada bizzat yanına gidecektir.

Aydınlatma açma ve kapatma


Aydınlatma butonlarının LED'i  19 sürekli yanar, böylece karanlıkta butonlar daha kolay bulunur.

Oda lambası (opsiyonel)

Oda lambası butonuna  7 kısa basılır.

► Oda lambası açılır veya kapanır.







Okuma lambası (opsiyonel)

Okuma lambası butonuna  18 kısa basılır.







► Okuma lambası açılır veya kapanır.

Menü fonksiyonları








Ekran parlaklık ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+ / P-**  14 kullanılarak **Parlaklık** ekran  12 üzerinden seçilir.
3. **OK**  15 butonu ile onaylanır.
4. **- / +** butonları  4 kullanılarak istenilen parlaklık ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Ekran kontrast ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+ / P-**  14 kullanılarak **Kontrast** ekran  12 üzerinden seçilir.
3. **OK**  15 butonu ile onaylanır.
4. **- / +** butonları  4 kullanılarak istenilen kontrast ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Ses ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+ / P-**  14 kullanılarak **Ses** ekran  12 üzerinden seçilir.
3. **OK**  15 butonu ile onaylanır.
4. Program seçim butonları **P+ / P-**  14 kullanılarak hangi ses seviyesinin ayarlanacağı seçilir.
5. **- / +** butonları  4 kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.
6. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Opsiyonel fonksiyonlar

TV

TV setini açma ve kapatma

TV setini açmak veya kapatmak için TV butonuna  **3** basılır.

- ▶ TV seti açılır ve izlenen son kanal ekranda **12** gösterilir.

Kanal seçimi


Program seçim butonları **P+/P-** **14** kullanılarak bir sonraki kanala geçilebilir.

Ses ve ses seviyesi ayarı

Ses çıkışı hoparlör **11** veya bağlı kulaklıklardan (bağlantı soketi **9**) sağlanır.


-/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.

Teletext

1. Teletext modunu getirmek veya çıkmak için teletext butonuna  **17** basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-** **14** kullanılarak bir sonraki sayfaya geçilebilir.

Radyo

Radyo açma ve kapatma

Radyoyu açmak veya kapatmak için Radyo butonuna  **13** basılır.

- ▶ Radyo açılır ve dinlenen son kanal ekranda **12** gösterilir.

Kanal seçimi


Program seçim butonları **P+/P-** **14** kullanılarak bir sonraki kanala geçilebilir.

Ses ve ses seviyesi ayarı

Ses çıkışı hoparlör **11** veya bağlı kulaklıklardan (bağlantı soketi **9**) sağlanır.

-/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.

Panjur kontrol

1. Özel fonksiyon butonuna  **16** basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-** **14** kullanılarak **Panjur** ekran **12** üzerinden seçilir.
3. -/+ butonları **4** kullanılarak panjur açılır yada kapanır.

Kızılötesi alıcı

Kızılötesi alıcı, hasta el setini çevredeki kontrol cihazları aracılığıyla uzaktan kontrol etmek için kullanılır.



TR

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T