




Potilaspääte PAT

Käyttöopas

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Yleiskuvaus

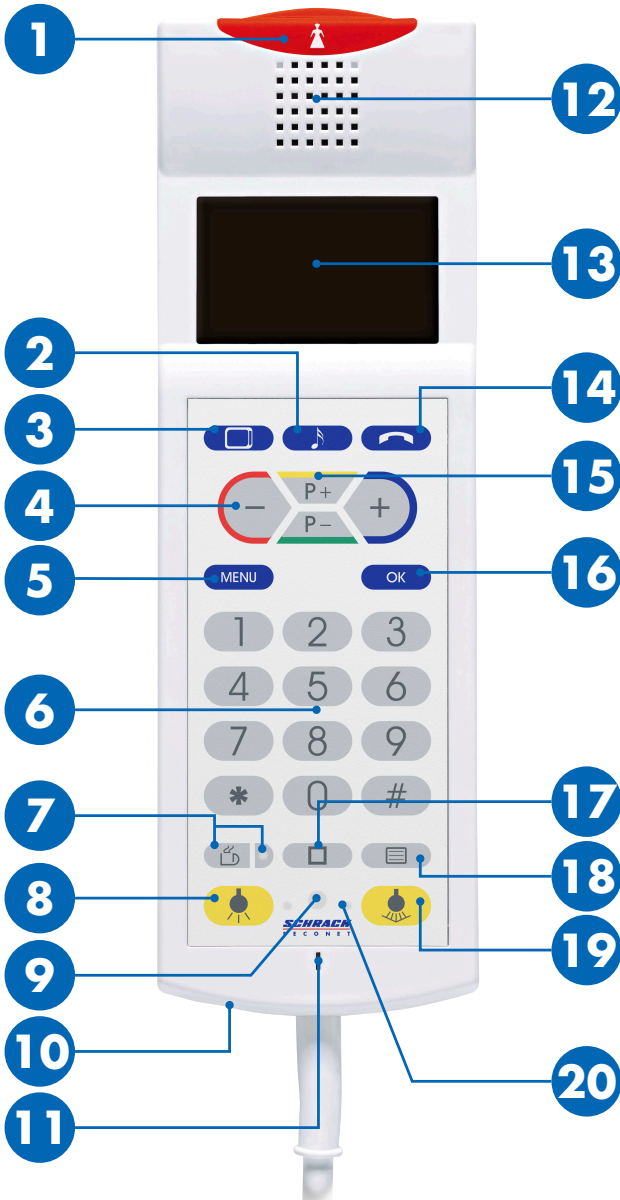

1	Kutsupainike
2	Radio-painike
3	TV-painike
4	-/+ -painike
5	Valikkopainike
6	Numeropainikkeet
7	Palvelukutsupainike ja LED-valo (apuvalo)
8	Huonevalo
9	Infrapunavastaanotin (valinnainen)
10	Kuulokeliitäntä
11	Mikrofoni
12	Kaiutin
13	Näyttö
14	Puhelin-painike
15	Ohjelman valintapainikkeet
16	Vahvistuspainike
17	Erityistoimintopainike
18	Teksti-TV-painike
19	Lukuvalo
20	Valopainikkeen LED-valo (apuvalo)




HUOMIO

Ei saa käyttää nousutukena

Johto ja laite eivät ole nousutukia. Älä vedä itseäsi ylös laitteen avulla.

Hoitajakutsu

Kutsupainike  **1** palaa jatkuvasti, jotta se on helpompi nähdä myös pimeässä.

Hoitajan kutsuminen

Paina painiketta  **1**.

► Kutsupainikkeen merkivalo  **1** syttyy.

Hoitaja vastaa

1. Merkkiääni kuuluu kaiuttimesta **12** ja kutsupainikkeen merkivalo vilkkuu.
2. Puhu hoitajan kanssa käyttämällä potilaspäätettä puhelimen tavoin.
3. Hoitaja katkaiseen puhelun sen päätyttyä.

Huoltokutsu

Painikkeen LED-valo palaa jatkuvasti, jotta se on helpompi nähdä myös pimeässä.

Paina huoltokutsupainiketta  **7**.


► Huoltokutsupainikkeen LED-valo  **7** syttyy.

Huoltohenkilö joko soittaa takaisin laitteeseen tai saapuu luoksesi.

Valon sytyttäminen ja sammuttaminen


Valopainikkeiden LED-valot **20** palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

Huonevalo (valinnainen)

Paina huonevalon painiketta  **8** lyhyesti.

► Huonevalo syttyy tai sammuu.

Lukuvalo (valinnainen)

Paina lukuvalon painiketta  **19** lyhyesti.

► Lukuvalo syttyy tai sammuu.

Valikkotoiminnot

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.
2. Valitse **Brightness** (Kirkkaus) näytössä **13** käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+ / P-** **15**.
3. Vahvasta painamalla **OK**-painiketta **16**.
4. Säädä kirkkaus haluamallesi tasolle **- / +**-painikkeilla **4**.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.

Näytön kontrastin säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.
2. Valitse **Contrasti** (Kontrasti) näytössä **13** käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+ / P-** **15**.
3. Vahvasta painamalla **OK**-painiketta **16**.
4. Säädä kontrasti haluamallesi tasolle **- / +**-painikkeilla **4**.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.
2. Valitse **Volume** (Äänenvoimakkuus) näytössä **13** käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+ / P-** **15**.
3. Vahvasta painamalla **OK**-painiketta **16**.
4. Valitse toiminto, jonka äänenvoimakkuutta haluat säätää, käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+ / P-** **15**.
5. Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle **- / +**-painikkeilla **4**.
6. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.


Soittoäänien valinta

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.
2. Valitse **Ring tones** (Soittoäänit) näytössä **13** käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+ / P-** **15**.
3. Vahvasta painamalla **OK**-painiketta **16**.
4. Valitse haluamasi soittoääni ohjelman valintapainikkeilla **P+ / P-** **15**.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta **5**.

Lisätoiminnot

TV

Television kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke televisio päälle tai pois päältä painamalla TV-painiketta  3.

- Televisio kytkeytyy päälle, ja ilmoitus viimeksi katsellusta kanavasta näkyy näytöllä 13.

Kanavan valinta


Valitse kanavanumero numeronäppäimillä 6 tai vaihda kanavaa ohjelman valintapainikkeilla **P+ / P-** 15.

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänen ulostulo kaiuttimesta 12 tai kuulokkeista (kuulokeliitäntä 10).

Säädä äänenvoimakkuus haluamallasi tasolle **- / +**-painikkeilla 4.

Tekstitelevisio

1. Siirry teksti-TV-tilaan tai poistu siitä painamalla teksti-TV-painiketta  18.
2. Valitse sivunumero numeronäppäimillä 6 tai siirry seuraavalle sivulle ohjelman valintapainikkeilla **P+ / P-** 15.

Radio

Radion kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke radio päälle tai pois päältä painamalla radio-painiketta  2.

- Radio kytkeytyy päälle, ja ilmoitus viimeksi kuunnellusta kanavasta näkyy näytöllä 13.

Kanavan valinta

Valitse kanavanumero numeronäppäimillä 6 tai vaihda kanavaa ohjelman valintapainikkeilla **P+ / P-** 15.



Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänen ulostulo kaiuttimesta 12 tai kuulokkeista (kuulokeliitäntä 10).



Säädä äänenvoimakkuus haluamallasi tasolle **- / +**-painikkeilla 4.

Puhelin



Puheluun vastaaminen

1. Vastaa saapuvaan puheluun puhelin-painikkeella  14.
2. Säädä äänenvoimakkuus haluamallasi tasolle **- / +**-painikkeilla 4.
3. Päätä puhelu painamalla puhelin-painiketta  14.


Puhelun soittaminen

1. Paina puhelin-painiketta  14.
2. Valitse linja (yleensä 0, mutta kysy henkilökunnalta) soittaaksesi ulos.
3. Valitse haluamasi numero numeronäppäimillä 6.
4. Vahvista painamalla **OK**-painiketta 16.
5. Päätä puhelu painamalla puhelin-painiketta  14.

Viimeisen numeron uudelleenvalinta

1. Paina puhelin-painiketta  14.
2. Viimeksi valitut kymmenen numeroa näkyvät näytöllä 13.
3. Valitse haluamasi numero **- / +**-painikkeilla 4.
4. Vahvista painamalla **OK**-painiketta 16.
5. Päätä puhelu painamalla puhelin-painiketta  14.

Verhojen säätäminen

1. Paina erityistoimintojen painiketta  17.
2. Valitse **Blinds** (Verhot) näytössä 13 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+ / P-** 15.
3. Avaa tai sulje verhot **- / +**-painikkeilla 4.

Infrapunavastaanotin

Potilas päätettä etäohjataan ohjauslaitteilla infrapunavastaanottimen avulla.



FI

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T