




Pacienta termināls PAT-E

Lietotāja rokasgrāmata

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Pärskats

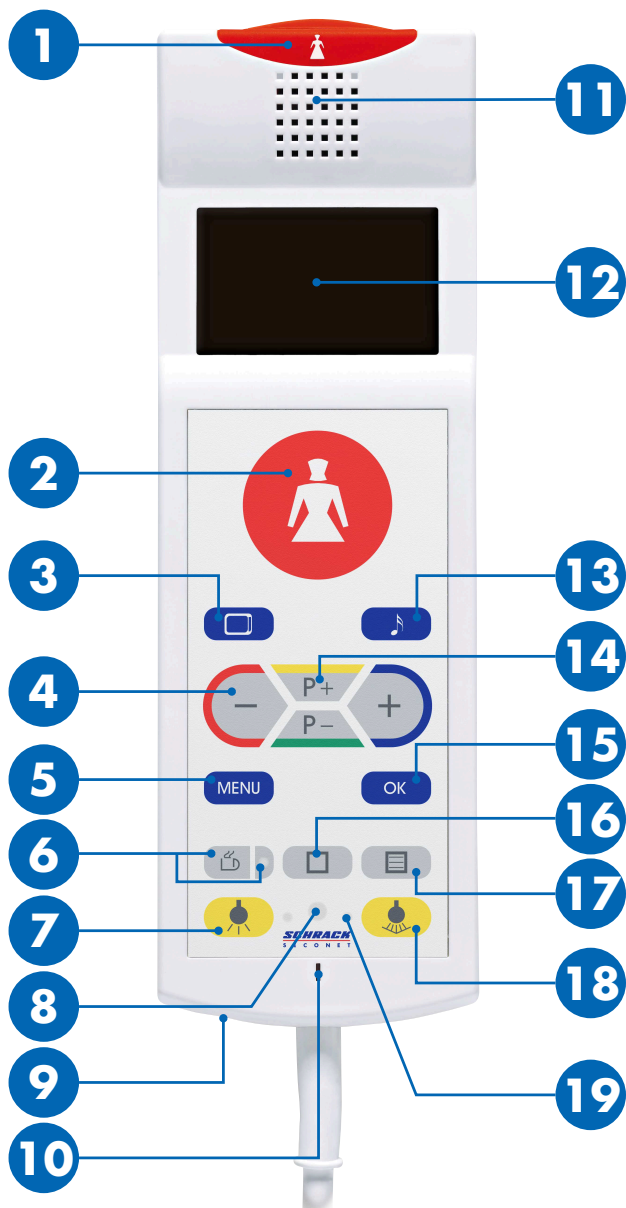

1 / 2	Izsaukuma pogas
3	Televīzijas poga
4	-/+ poga
5	Izvēlnes poga
6	Servisa izsaukuma poga ar LED (meklēšanas gaisma)
7	Telpas apgaismojums
8	Infrasarkanais uztvērējs (papildaprīkojums)
9	Austiņu savienojums
10	Mikrofons
11	Skaļrunis
12	Displejs
13	Radio poga
14	Programmu atlases pogas
15	Apstiprināšanas poga
16	Īpašo funkciju poga
17	Teleteksta poga
18	Lasīšanas gaisma
19	Gaismas pogas LED (meklēšanas gaisma)



UZMANĪBU

Neizmantot kā piecelšanās palīg līdzekli

Kabelis un ierīce nav piecelšanās palīg līdzekļi. Nepievelciet sevi, izmantojot ierīci.

Aprūpes personāla izsaukšana


Izsaukuma poga  1 ir pastāvīgi iedegta, lai to varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Kā izsaukt aprūpes personālu

Nospiediet izsaukuma pogu  1 vai 2.

► Izsaukuma poga  1 iedegas.


Atbildēšana aprūpes personālam

1. Skaļrunī  dzirdams skaņas signāls un mirgo izsaukuma poga.
2. Pacienta terminālu izmantojiet kā tālruni, lai runātu ar aprūpes personālu.
3. Sarunas beigās aprūpes personāls izbeigs zvanu.

Servisa izsaukums


Pogas LED ir pastāvīgi iedegts, lai to varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Nospiediet servisa izsaukuma pogu  6.


► Servisa izsaukuma pogas LED  6 iedegas.

Servisa personāls piezvanīs jums uz ierīci vai apmeklēs jūs.

Gaismas ieslēgšana un izslēgšana

Gaismas pogu  19 LED ir pastāvīgi iedegtas, lai pogas varētu vieglāk atrast pat tumsā.

Telpas apgaismojums (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet telpas apgaismojuma pogu  7.

► Telpas apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts.







Lasišanas gaisma (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet lasišanas gaismas pogu  18.







► Lasišanas gaisma tiek ieslēgta vai izslēgta.

Izvēlnes funkcijas








Displeja spilgtuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU**  5.
2. Displejā  12 atlasiet vienumu **Spilgtums**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-**  14.
3. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi**  15.
4. Iestatiet vēlamu spilgtumu, izmantojot **- / +** pogas  4.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE**  5.

Displeja kontrasta iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU**  5.
2. Displejā  12 atlasiet vienumu **Kontrasts**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-**  14.
3. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi**  15.
4. Iestatiet vēlamu kontrastu, izmantojot **- / +** pogas  4.
5. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE**  5.


Skaiļuma iestatīšana

1. Nospiediet pogu **MENU**  5.
2. Displejā  12 atlasiet vienumu **Skaiļums**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-**  14.
3. Apstipriniet atlasī, nospiežot pogu **Labi**  15.
4. Atlasiet, kurai funkcijai jāiestata skaiļums, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-**  14.
5. Iestatiet vēlamu skaiļumu, izmantojot **- / +** pogas  4.
6. Izejiet no izvēlnes, nospiežot pogu **IZVĒLNE**  5.

Papildfunkcijas

Televīzija

Televizora ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet televīzijas pogu  **3**, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

- ▶ Tiks ieslēgts televizors, un displejā **12** tiks rādīts pēdējais skatītais kanāls.

Kanāla izvēle


Pārslēdziet nākamo kanālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** **14**.

Skaņas un skaļuma iestatīšana

Skaņa tiek izvadīta caur skaļruni **11** vai pievienotajām austiņām (savienojuma līzda **9**).

Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **- / +** pogas **4**.

Teleteksta izsaukšana

1. Nospiediet teleteksta pogu  **17**, lai izsauktu teletekstu vai izietu no teleteksta režīma.
2. Pārslēdziet nākamo lapu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** **14**.

Radio

Radio ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet radio pogu  **13**, lai ieslēgtu vai izslēgtu radio.

- ▶ Tiks ieslēgts radio, un displejā **12** tiks parādīts pēdējais klausītais radio kanāls.

Kanāla izvēle


Pārslēdziet nākamo kanālu, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** **14**.

Skaņas un skaļuma iestatīšana

Skaņa tiek izvadīta caur skaļruni **11** vai pievienotajām austiņām (savienojuma līzda **9**).

Iestatiet vēlamo skaļumu, izmantojot **- / +** pogas **4**.

Žalūziju vadība

1. Nospiediet īpašo funkciju pogu  **16**.
2. Displejā **12** atlasiet vienumu **Žalūzijas**, izmantojot programmu atlasē pogas **P+ / P-** **14**.
3. Atveriet vai aizveriet žalūzijas, izmantojot **- / +** pogas **4**.

Infrasarkanais uztvērējs

Infrasarkanais uztvērējs tiek lietots, lai nodrošinātu pacienta termināla tālvadību, izmantojot apkārtējās vides kontroles ierīces.



LV

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T