




Patiënten terminal PAT-E

Gebruikershandleiding

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Overzicht

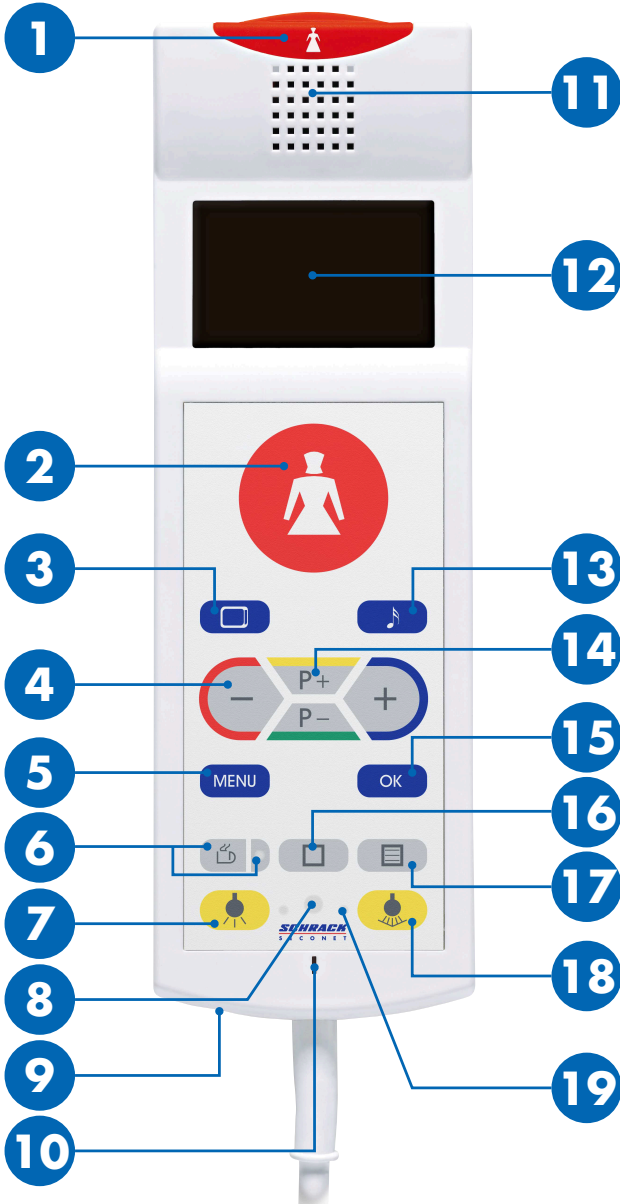

1 / 2	Verpleegkundige oproeptoetsen
3	TV toets
4	-/+ toetsen
5	Menu selectie toets
6	Service oproeptoets met oriëntatie LED
7	Kamerverlichting
8	Infrarood ontvanger (optioneel)
9	Koptelefoon aansluiting
10	Microfoon
11	Luidspreker
12	Display
13	Radio toets
14	Programma selectie toets
15	Bevestigings toets
16	Toets speciale functies
17	Teletekst toets
18	Bedleesverlichting
19	Oriëntatie LED verlichting




VOORZICHTIG

Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken

Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf niet op met behulp van dit toestel.

Oproep verplegend personeel

De oriëntatie LED's van de oproeptoets  1 is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

Verplegend personeel oproepen

Druk op de oproeptoets  1 of 2.

► De oproeptoets  1 licht nu fel op.


Binnenkomende oproep verplegend personeel

1. Beltoon is hoorbaar over de luidspreker 11 en de oproeptoets knippert.
2. Houdt de patiëntterminal tegen het oor zoals een telefoonhoorn.
3. Het verplegend personeel eindigt het gesprek en verbreekt de verbinding.

Service oproep

De oriëntatie LED van de toets is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

Druk op de service toets  6.


► De LED van de service toets  6 licht nu fel op.

De service medewerker zal u terugbellen of persoonlijk bij u langskomen.

Verlichting aan of uitschakelen


De oriëntatie LED van de lichttoets 19 zijn continue verlicht, waardoor de toetsen gemakkelijk te lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

Kamerverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets kamerverlichting  7.

► De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Bedleesverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets bedleesverlichting  18.

► De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Menufuncties

Display helderheid instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Helderheid** op het display 12 met de toetsen **P+ / P-** 14.
3. Bevestigt de keuze **OK** toets 15.
4. Stel de gewenste helderheid in met de **- / +** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

Display contrast instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Contrast** op het display 12 met de toetsen **P+ / P-** 14.
3. Bevestigt de keuze **OK** toets 15.
4. Stel het gewenste contrast in met de **- / +** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

Volume instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Volume** op het display 12 met de toetsen **P+ / P-** 14.
3. Bevestigt de keuze **OK** toets 15.
4. Selecteer voor welke functie het volume moet worden ingesteld met de toetsen **P+ / P-** 14.
5. Stel het gewenste volume in met de **- / +** toetsen 4.
6. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

Optionele functies

TV

TV aan- of uitzetten

Druk op de TV toets  3 om de TV aan of uit te zetten.

- ▶ De TV staat aan en de laatst bekeken zender staat in het display vermeld 12.

Zenderkeuze


Selecteer de volgende – of de vorige TV zender met de toetsen **P+ / P-** 14.

Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker 11 of via de aangesloten koptelefoon 9.

Stel het gewenste volume in met de **- / +** toetsen 4.

Teletekst

1. Druk op de teletekst toets  17 voor het selecteren van teletekst mode.
2. Selecteer de volgende – of de vorige teletekst pagina met de toetsen **P+ / P-** 14.

Radio

Radio aan- of uitzetten

Druk op de radio toets  13 om de radio aan of uit te zetten.

- ▶ De radio staat aan en de laatst ontvangen zender staat op het display vermeld 12.

Zenderkeuze

Selecteer de volgende – of de vorige TV zender met de toetsen **P+ / P-** 14.

Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker 11 of via de aangesloten koptelefoon 9.

Stel het gewenste volume in met de **- / +** toetsen 4.

Zonwering openen/sluiten

1. Druk op de toets speciale functies  16.
2. Selecteer **Zonwering** op het display 12 met de toetsen **P+ / P-** 14.
3. Open of sluit de zonwering met de **- / +** toetsen 4.

Infrarood ontvanger

Infrarood ontvanger voor de integratie met externe apparatuur.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

NL

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET