




# Pacientský terminál PAT-E

## Uživatel'ská příručka

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Prehľad

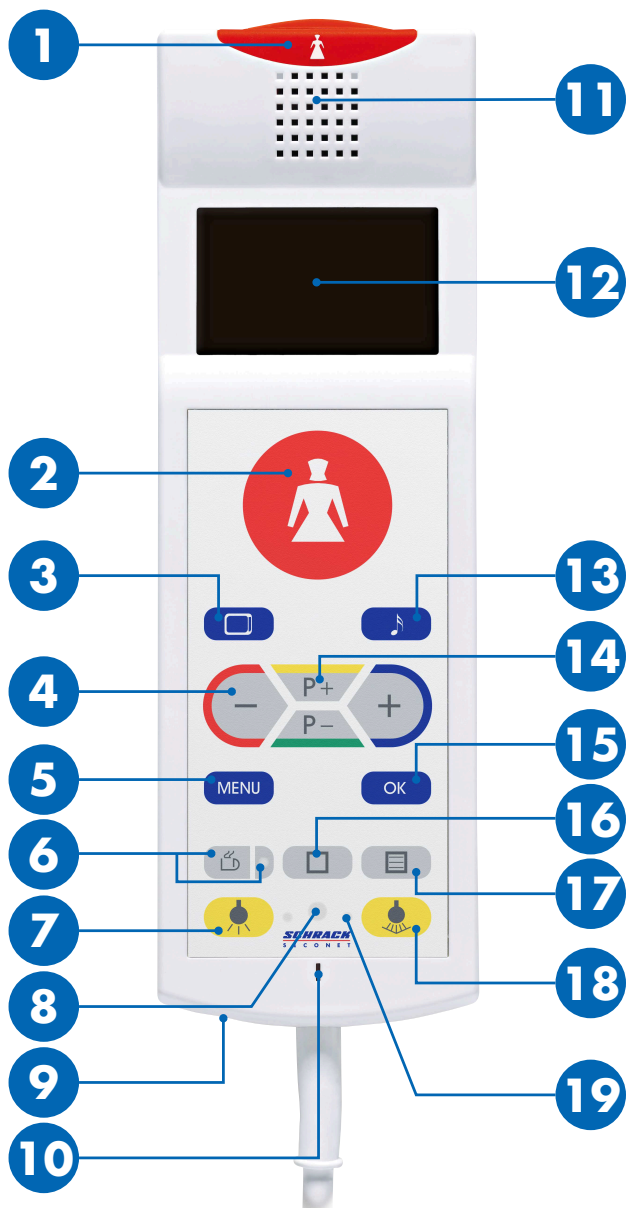

<b>1 / 2</b>	<b>Tlačidlá privolaní</b>
<b>3</b>	<b>TV tlačidlo</b>
<b>4</b>	<b>-/+ tlačidlo</b>
<b>5</b>	<b>Menu tlačidlo</b>
<b>6</b>	<b>Tlačidlo privolanie služby s LED</b>
<b>7</b>	<b>Izbové svetlo</b>
<b>8</b>	<b>Infračervený prijímač (voliteľné)</b>
<b>9</b>	<b>Pripojenie slúchadiel</b>
<b>10</b>	<b>Mikrofón</b>
<b>11</b>	<b>Reproduktor</b>
<b>12</b>	<b>Displej</b>
<b>13</b>	<b>Rádio tlačidlo</b>
<b>14</b>	<b>Tlačidlá výberu programu</b>
<b>15</b>	<b>Potvrdzovacie tlačidlo</b>
<b>16</b>	<b>Tlačidlo špeciálnej funkcie</b>
<b>17</b>	<b>Teletext tlačidlo</b>
<b>18</b>	<b>Svetlo na čítanie</b>
<b>19</b>	<b>LED tlačidla svetla</b>



#### **UPOZORNENIE**

**Nepoužívajte na privolanie pomoci**

Kábel a zariadenie neslúži na privolanie pomoci. Nepoužívajte zariadenie na dvíhanie sa.

## Privolanie zdravotníckeho personálu

Tlačidlo privolanía  1 nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

### Privolanie zdravotníckeho personálu

Stlačte tlačidlo privolanía  1 alebo 2.

► Tlačidlo privolanía  1 sa rozsvieti.

### Odpovede zdravotníckemu personálu

1. Z reproduktora zaznie gong 11 a tlačidlo privolanía bliká.
2. Použite patientský terminál ako telefón na rozprávanie sa s personálom.
3. Zdravotnícky personál ukončí hovor na konci rozhovoru.

## Privolanie služby

LED tlačidlá nepretržite svieti vďaka čomu je lokalizácia v tme jednoduchšia.

Stlačte tlačidlo privolaníe služby  6.


► LED tlačidlá privolaníe služby  6 sa rozsvieti.

Služobný personál Vám zavolá na zariadenie alebo príde osobne.

## Zapnutie a vypnutie svetla


LED tlačidiel svetla 19 nepretržite svietia, vďaka čomu je ľahké ich lokalizovať v tme.

### Izbové svetlo (voliteľné)

Stlačte tlačidlo izbové svetlo  7 krátko.

► Izbové svetlo je zapnuté alebo vypnuté.

### Svetlo na čítanie (voliteľné)

Stlačte tlačidlo svetlo na čítanie  18 krátko.

► Svetlo na čítanie je zapnuté alebo vypnuté.

## Funkcie menu

### Nastavenie jasú displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU** 5.
2. Vyberte **Brightness** na displeji 12 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom 15.
4. Nastavte želaný jas použitím **- / +** tlačidiel 4.
5. Použite tlačidlo menu **MENU** 5 na opustenie menu.

### Nastavenie kontrastu displeja

1. Stlačte tlačidlo **MENU** 5.
2. Vyberte **Contrast** na displeji 12 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom 15.
4. Nastavte želaný kontrast použitím **- / +** tlačidiel 4.
5. Použite tlačidlo menu **MENU** 5 na opustenie menu.

### Nastavenie hlasitosti

1. Stlačte tlačidlo **MENU** 5.
2. Vyberte **Volume** na displeji 12 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.
3. Potvrďte s **OK** tlačidlom 15.
4. Vyberte pre ktorú funkciu má byť hlasitosť nastavená použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.
5. Nastavte želanú hlasitosť použitím **- / +** tlačidiel 4.
6. Použite tlačidlo menu **MENU** 5 na opustenie menu.

# Voliteľné funkcie

## TV

### Zapnutie a vypnutie TV

Stlačte tlačidlo TV  3 na zapnutie alebo vypnutie TV.

- ▶ TV je zapnutý a na displeji sa zobrazí posledný pozeraný kanál 12.

### Výber kanála


Prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.

### Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor 11 alebo slúchadlá (pripojovacia zásuvka 9).

Nastavte želanú hlasitosť použitím **- / +** tlačidiel 4.

### Vyvolanie teletextu

1. Stlačte tlačidlo teletext  17 na vyvolanie alebo opustenie teletext módu.
2. Prepňte na ďalšiu stranu použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.

## Rádio

### Zapnutie a vypnutie rádia

Stlačte tlačidlo rádio  13 na zapnutie alebo vypnutie rádia.

- ▶ Rádio je zapnuté a na displeji sa zobrazí posledný počúvaný kanál 12.

### Výber kanála


Prepnite na iný kanál použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.

### Nastavenie zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup cez reproduktor 11 alebo slúchadlá (pripojovacia zásuvka 9).

Nastavte želanú hlasitosť použitím **- / +** tlačidiel 4.

## Ovládanie žalúzií

1. Stlačte tlačidlo špeciálnej funkcie  16.
2. Vyberte **Blinds** na displeji 12 použitím tlačidiel výberu programu **P+ / P-** 14.
3. Vytiahnite alebo zatiahnite žalúzie použitím **- / +** tlačidiel 4.

## Infračervený prijímač

Infračervený prijímač sa používa na vzdialenú kontrolu patientskeho termínalu kontrolnými zariadeniami.



SCHRACK SECONET AG  
Eibesbrunnergasse 18  
A-1120 Vienna  
Tel. +43 1 81157  
[office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)  
[www.schrack-seconet.com](http://www.schrack-seconet.com)

SK

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
SECONET