


# Patiënten terminal PAT-E

---

**Gebruikershandleiding**

# Overzicht

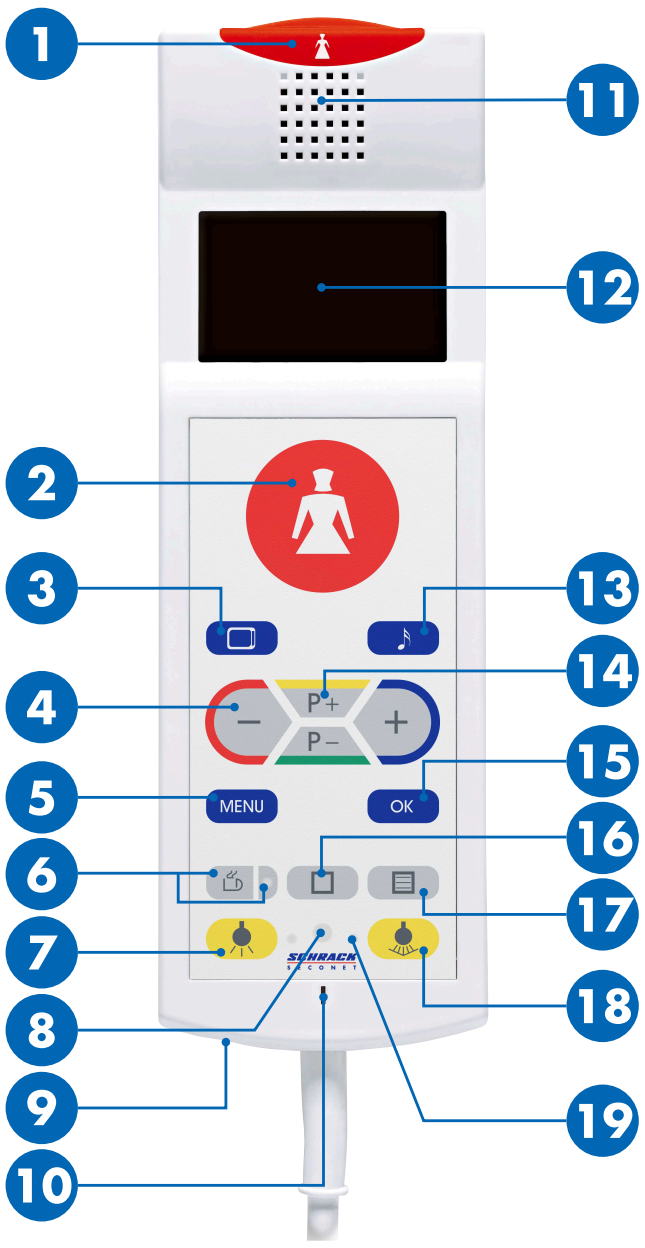

- 1 / 2 Verpleegkundige oproeptoetsen
- 3 TV toets
- 4 -/+ toetsen
- 5 Menu selectie toets
- 6 Service oproeptoets met oriëntatie LED
- 7 Kamerverlichting
- 8 Infrarood ontvanger (optioneel)
- 9 Koptelefoon aansluiting
- 10 Microfoon
- 11 Luidspreker
- 12 Display
- 13 Radio toets
- 14 Programma selectie toets
- 15 Bevestigings toets
- 16 Toets speciale functies
- 17 Teletekst toets
- 18 Bedleesverlichting
- 19 Oriëntatie LED verlichting




### **VOORZICHTIG**

#### **Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken**

Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf niet op met behulp van dit toestel.

# In Bedrijf

## Oproep verplegend personeel

De oriëntatie LED's van de oproeptoets  1 is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

### Verplegend personeel oproepen

Druk op de oproeptoets  1 of 2.

- ▶ De oproeptoets  1 licht nu fel op.

### Binnenkomende oproep verplegend personeel

1. Beltoon is hoorbaar over de luidspreker 11 en de oproeptoets knippert.
2. Houdt de patiëntterminal tegen het oor zoals een telefoonhoorn.
3. Het verplegend personeel eindigt het gesprek en verbreekt de verbinding.

## Service oproep

De oriëntatie LED van de toets is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

Druk op de service toets  6.

- ▶ De LED van de service toets  6 licht nu fel op.

De service medewerker zal u terugbellen of persoonlijk bij u langskomen.

## Verlichting aan of uitschakelen

De oriëntatie LED van de lichttoetsen 19 zijn continue verlicht, waardoor de toetsen gemakkelijk te lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

### Kamerverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets kamerverlichting  7.

- ▶ De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

### Bedleesverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets bedleesverlichting  18.

- ▶ De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

# Menufuncties

## Display helderheid instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Helderheid** op het display 12 met de toetsen **P+/P-** 14.
3. Bevestigd de keuze **OK** toets 15.
4. Stel de gewenste helderheid in met de **-/+** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

## Display contrast instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Contrast** op het display 12 met de toetsen **P+/P-** 14.
3. Bevestigd de keuze **OK** toets 15.
4. Stel het gewenste contrast in met de **-/+** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

## Volume instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Volume** op het display 12 met de toetsen **P+/P-** 14.
3. Bevestigd de keuze **OK** toets 15.
4. Selecteer voor welke functie het volume moet worden ingesteld met de toetsen **P+/P-** 14.
5. Stel het gewenste volume in met de **-/+** toetsen 4.
6. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

# Optionele functies

## TV

### TV aan- of uitzetten

Druk op de TV toets  **3** om de TV aan of uit te zetten.

- ▶ De TV staat aan en de laatst bekeken zender staat in het display vermeld **12**.

### Zenderkeuze


Selecteer de volgende – of de vorige TV zender met de toetsen **P+/P-** **14**.

### Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker **11** of via de aangesloten koptelefoon **9**.

Stel het gewenste volume in met de **-/+** toetsen **4**.

### Teletekst

1. Druk op de teletekst toets  **17** voor het selecteren van teletekst mode.
2. Selecteer de volgende – of de vorige teletekst pagina met de toetsen **P+/P-** **14**.

## Radio

### Radio aan- of uitzetten

Druk op de radio toets  **13** om de radio aan of uit te zetten.

- ▶ De radio staat aan en de laatst ontvangen zender staat op het display vermeld **12**.

### Zenderkeuze

Selecteer de volgende – of de vorige TV zender met de toetsen **P+/P-** **14**.

### Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker **11** of via de aangesloten koptelefoon **9**.

Stel het gewenste volume in met de **-/+** toetsen **4**.

### Zonwering openen/sluiten

1. Druk op de toets speciale functies  **16**.
2. Selecteer **Zonwering** op het display **12** met de toetsen **P+/P-** **14**.
3. Open of sluit de zonwering met de **-/+** toetsen **4**.

## Infrarood ontvanger

Infrarood ontvanger voor de integratie met externe apparatuur.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna  
+43 50 857 | [office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)

## **[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitvová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199