




# Pacientský terminál PAT

Uživatelská příručka

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Přehled

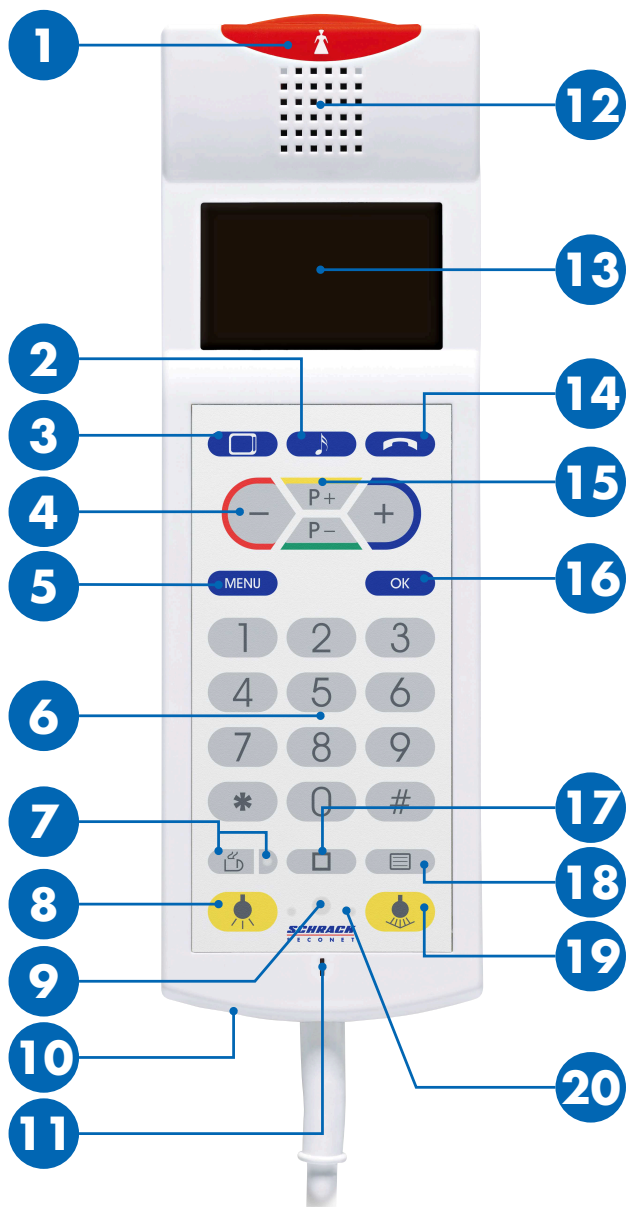

<b>1</b>	<b>Nouzové přivolávací tlačítko</b>
<b>2</b>	<b>Tlačítko rádia</b>
<b>3</b>	<b>Tlačítko TV</b>
<b>4</b>	<b>-/+ tlačítko</b>
<b>5</b>	<b>Tlačítko menu</b>
<b>6</b>	<b>Numerická klávesnice</b>
<b>7</b>	<b>Tlačítko pro přivolání pomocného personálu s LED diodou (pro snazší nalezení ve tmě)</b>
<b>8</b>	<b>Pokojové světlo</b>
<b>9</b>	<b>Infračervený přijímač (volitelné)</b>
<b>10</b>	<b>Připojení sluchátek</b>
<b>11</b>	<b>Mikrofon</b>
<b>12</b>	<b>Reproduktor (sluchátko)</b>
<b>13</b>	<b>Displej</b>
<b>14</b>	<b>Tlačítko telefonu</b>
<b>15</b>	<b>Tlačítka pro výběr programu</b>
<b>16</b>	<b>Potvrzovací tlačítko</b>
<b>17</b>	<b>Tlačítko speciální funkce</b>
<b>18</b>	<b>Tlačítko teletextu</b>
<b>19</b>	<b>Lůžkové světlo</b>
<b>20</b>	<b>LED dioda ovládání světel (pro snazší nalezení ve tmě)</b>




### **UPOZORNĚNÍ**

#### **Neslouží jako pomůcka pro zvedání**


Kabel ani zařízení nepředstavují pomůcku pro zvedání. Nepoužívejte zařízení jako pomůcku pro zvednutí.

## Přivolání ošetřujícího personálu

Nouzové přivolávací tlačítko  1 je trvale rozsvíceno, díky tomu jej lze snadno najít i ve tmě.

### Přivolat ošetřující personál

Stiskněte tlačítko  1.

- Nouzové přivolávací tlačítko  1 se rozsvítí.

### Reakce ošetřujícího personálu

1. Z reproduktoru se ozve gong 12 a LED dioda přivolávacího tlačítka začne blikat.
2. K rozhovoru s ošetřujícím personálem použijte patientský terminál jako telefon.
3. Na konci rozhovoru ošetřující personál hovor ukončí.

## Přivolání pomocného personálu

LED dioda tlačítek je trvale rozsvícena, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

Stiskněte tlačítko pro přivolání pomocného personálu  7.


- LED dioda  7 vedle tlačítka pro přivolání pomocného personálu se rozsvítí.

Pomocný personál s Vámi může komunikovat prostřednictvím reproduktoru nebo přijít osobně.

## Zapnutí a vypnutí světla


LED diody ovládání lůžkových světel 20 jsou trvale rozsvíceny, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

### Ovládání pokojového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání pokojového světla  8.

- Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

### Ovládání lůžkového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání lůžkového světla  19.

- Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

## Funkce menu

### Nastavení jasu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte **Jas** na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Nastavte požadovaný jas pomocí **- / +** tlačítek 4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

### Nastavení kontrastu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte **Kontrast** na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Nastavte požadovaný kontrast pomocí **- / +** tlačítek 4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

### Nastavení hlasitosti

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte **Hlasitost** na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15, vyberte funkci, pro kterou funkci má být hlasitost nastavena.
5. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **- / +** tlačítek 4.
6. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

### Nastavení vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte **Vyzváněcí tón** na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Požadovaný vyzváněcí tón nastavte pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.
5. Požadovaný vyzváněcí tón nastavte pomocí tlačítek pro výběr programu **MENU** 5.

# Volitelné funkce

## Televizor

### Zapnutí a vypnutí televizoru

Stisknutím TV tlačítka  3 zapnete nebo vypnete televizor.

- Televizor je zapnutý a na displeji se zobrazí poslední zvolený kanál 13.

### Výběr kanálu


Pomocí numerické klávesnice 6 zadejte číslo kanálu nebo přepněte na další kanál pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.

### Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor 12 nebo připojená sluchátka (připojovací konektor 10).


Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **- / +** tlačítek 4.

### Vyvolání teletextu

1. Stisknutím tlačítka teletext  18 vyvoláte nebo opustíte režim teletextu.
2. Pomocí numerické klávesnice 6 zadejte číslo stránky nebo přejděte na další stránku pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.

## Rádio

### Vypnutí a zapnutí rádia

Stisknutím tlačítka rádia  2 zapnete nebo vypnete rádio.

- Rádio se zapne a na displeji 13 se zobrazí poslední zvolený kanál rádia.

### Výběr kanálu

Pomocí numerické klávesnice 6 zadejte číslo kanálu nebo přepněte na další kanál pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.



### Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor 12 nebo připojená sluchátka (připojovací konektor 10).



Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **- / +** tlačítek 4.

## Telefon



### Přijetí hovoru

1. Přijměte příchozí hovor pomocí tlačítka telefonu  14.
2. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **- / +** tlačítek 4.
3. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko telefonu  14.


### Telefonování

1. Stiskněte tlačítko telefonu  14.
2. Stiskněte číselný kód pro volanou linku / veřejnou telefonní síť (obvykle 0, nutné ověřit u personálu).
3. Vytočte požadované telefonní číslo pomocí numerické klávesnice 6.
4. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
5. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko telefonu  14.

### Opakované vytočení posledního čísla

1. Stiskněte tlačítko telefonu  14.
2. Na displeji 13 se zobrazí posledních deset volaných čísel.
3. Vyberte požadované číslo pomocí **- / +** tlačítek 4.
4. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
5. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko telefonu  14.

### Ovládání žaluzií

1. Stiskněte tlačítko zvláštních funkcí  17.
2. Vyberte **Žaluzie** na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 15.
3. Pomocí **- / +** tlačítek 4 otevřete nebo zavřete žaluzie.

### Infračervený přijímač

Infračervený přijímač slouží k dálkovému ovládání patientského terminálu pomocí kompenzačních zařízení.



SCHRACK SECONET AG  
Eibesbrunnnergasse 18  
A-1120 Vienna  
Tel. +43 1 81157  
office@schrack-seconet.com  
www.schrack-seconet.com

CS

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
SECONET