



.VISOCALL IP צוות מוסף .ST-TOUCH

תקציר ההוראות.

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET



(1) כלליות

השימוש במכשיר המשמש מתבצע באמצעות מסך מגע. הניווט של תוכנת מסוף הוצאות מובילו אתכם דרך תפריטים שבlichkeit אצבע על סמלים ומשטחי מגע למי שאתם קוראים. לחווויו מרווח של תכנים ברשימות עם יותר מ-6 רשמי רשיומות, סroxק לאורך המסך כלפי מעלה אומטה. לחווויו מרווח של תכנים בתפריט של תפקדים, סroxk שמאלה או ימינה במסך. וכך יופיע, בהתאם לישום, פס גלילה לבן בשולי צד ימין או בשוליים התחתונות של המסך.

בנגיעה בסמל המסוים נפתחים הסמליות או ההסבר של כרטיסי רישום. זה תקף לגבי סרגל הרשימות, הרישומים ברשימה ותחום התפקיד.

בנגיעה נוספת תג רשימה נפתחת רשימת החדרים.

בנגיעה על הסמל בתת התפריטים של הרישומים ברשימה ובתפריט התפקיד אתה יצא מאותה רשימה או תית תפיריט.

תקציר ההוראות למסוף הוצאות **VISOCALL IP** המונחות לפניך מייעדות לתמוך בך וקובעת את ההכרות הבסיסית שנקנים לך ההוראות השימוש במוספות (K-HB-023HE).

(2) שורת המצב

- התחברות באופן יدني
תחנה העצמית מחוברת באופן יدني לאחרת.
- התחברות סבילה
תחנה אחרת מחוברת באופן יدني לתחנה העצמית.
- מרכז מקומי פעיל
תחנה מודיעה רק על קריזות בסיום הוצאות.
- מרכז גלובלי פעיל
קריזות התחנה נמסרות רק קולית בתחנת בקרה מרכזית.
- רמת שירות 1 או 2
מצב זה מוצג בהחלפה מהרמה התקנית 0 (אין תצוגה) לרמה 1 או 2.



(3) תagi רשימה



רשימת כשלים

כוללת את כל הליקויים הפעילים וההפרעות בתחום הטיפול וכן אפשרי מערכות זרות

רשימת נוכחות

כוללת את כל החדרים עם נוכחות קבועה.

רשימת תזכורות

כוללת את כל החדרים עם תזכורת קבועה.

רשימת קריאה

כוללת את כל אירועי הקריאה של כל תחום הטיפול.

מצבי תagi הרשימה

הרשימה אינה כוללת רישומים ולא נבחרה.

הרשימה כוללת רישומים ולא נבחרה.

tagi הרשימה נבחרו וכרטיס הרישום פתוח.



(4) סמלי חיוי כריזה

להלן סמלי סוג הכריזה שניתן להציג:

כריזת אבחן לא ניתן להשיב		כריזת חדר	
ازעקה שריפה לא ניתן להשיב		כריזת חרום מחדר	
ازעקה אי התמצאות לא ניתן להשיב		כריזת רפואי	
סוללת אי התמצאות שלשה לא ניתן להשיב		ازעקה לב	
מניפולציית אי התמצאות לא ניתן להשיב		כריזת חדר שירותים לא ניתן להשיב	
איום אי התמצאות לא ניתן להשיב		כריזת חרום מחדר שירותים לא ניתן להשיב	
נתק אבחן לא ניתן להשיב		כריזה מיטה	
נתק רפואי לא ניתן להשיב		כריזת חרום מיטה	
ארוע כללי		כריזת שירות	

(5) סמלי נוכחות וכריזה

ניתולгадיר עד 3 סמלים (כריזה או נוכחות) לעמוד, שסידורם כרצונך (צורת המערכת). ניתן לקבוע את הסמלים לתפקידים הבאים:


- נוכחות עם צוות מגדר (אחות, צוות שירות או רפואי),
- שחרור כריזה עם כריזה מוגדרת (כריזה או כריזת חרום).

	תפקיד כריזה פעיל/לא פעיל	תפקיד נוכחות (כריזה או כריזת חרום) פעיל/לא פעיל
אחות		
צוות שירות		
רופא		

(אור קבוע בכריזה,
אור מהבהב בכריזת חרום)

(6) סמלי תפקידים

סמלים הנקודות מוצגים בחלק האמצעי של תחום הפקידים וניתן להציגם בדף מסכם אחדים (ע"י בפס הגלילה). חיווי סמלים הנקודות הם בתלות ברמת השירות.

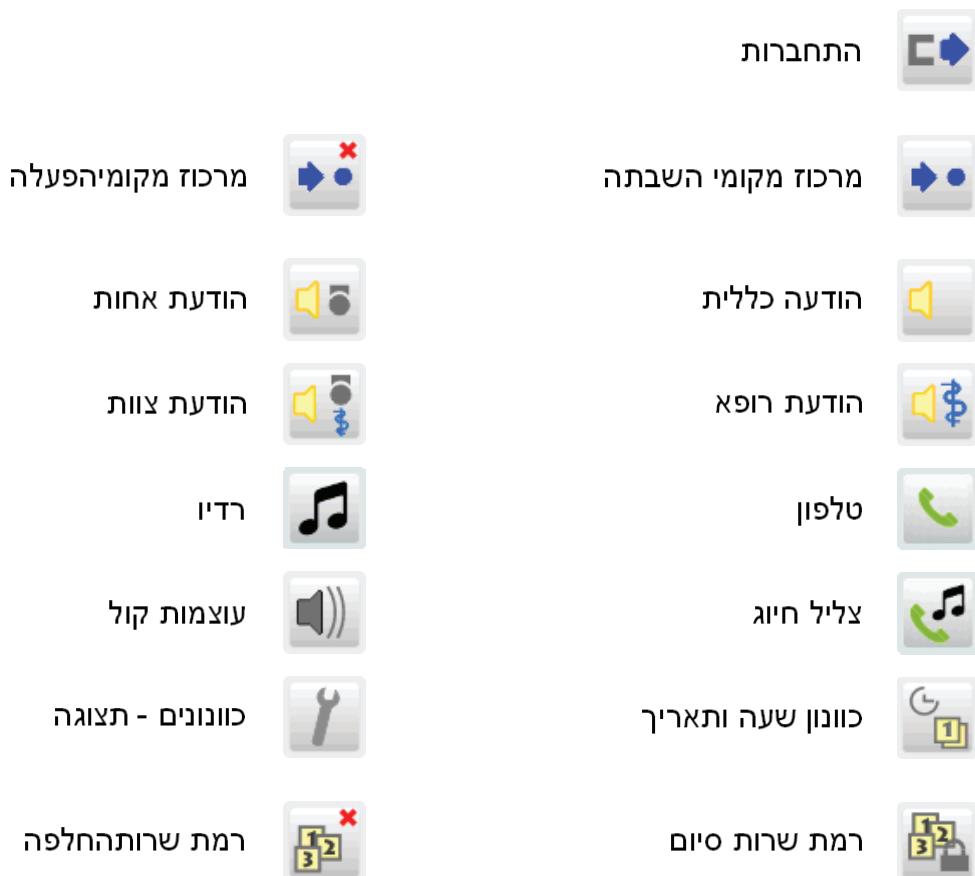

(7) חיווי כריזה

מיד בשחרור כריזה בתחנה, משתנה באופן אוטומטי חיווי התצוגה ונפתחת רשימת כריזות. הכריזה מפורטת עם נתוני החדר או מספר המיטה וסוג הכריזה מוצג. אם בו בזמן קיימות כריזות נוספות, תציג הכריזה תמיד בעדיפות העליונה במיקום העליוון ביותר.




(7.1) תשובה לכריזה

התאור הבא מציג את התשובה הנבחרת לכריזה ממיטה.



גע ברישום הרשימה, הכריזה נענית והתפריט נפתח.

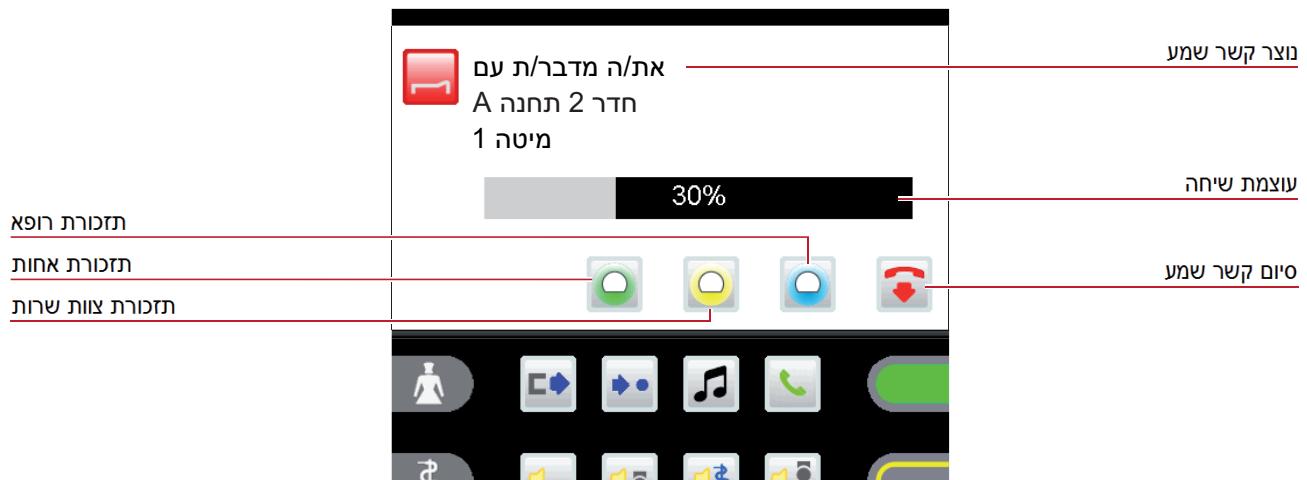

קשר שמע

הקשר הדיבורי נוצר באופן אוטומטי ברגעיה ברישום רשימת הכריזה.

במהלך השיחה ניתן לשנות את עצמת השיחה (רמקול/שפורת טלפון) ברגעיה בפוס עצמת הקול.

ברגעיה בסמל מסתiem הקשר הדיבורי מיד, לאחר 2 דקoot מתבצע ניתוק אוטומטי של הקשר.


ברגעיה בסמל או או נקבעת תזכורת לאחות, לצלות השירות או לרופא.
(עיין פרק 7.2 - תזכורת)

תשובה לכריזה ללא אפשרות דיבור

אם שיחה לא מתאפשרת מסיבות סביבתיות (למשל כריזת חדר שירותים), לא ניתן לענות לכריזה הנדונה.



גע ברישום הרשימה כדי לענות לכרזת חדר השירותים, התפריט נפתח ואות אזהרה נשמע.

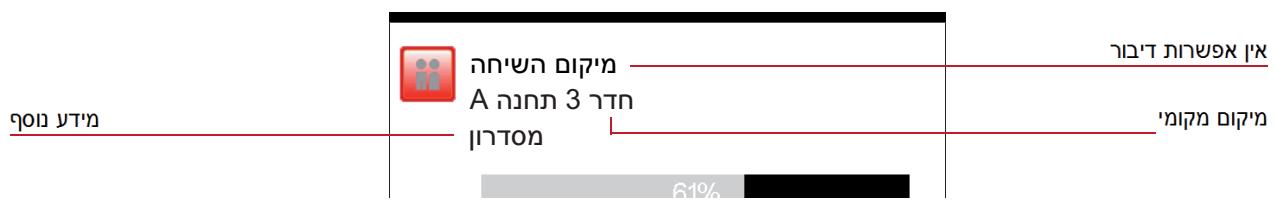


ניתן לאשר כריזה זאת בגיןה בסמל , אתר את מקום הכריזה ואשר אותה במקום.
ניתן לקבוע תזכורות לצוות השירות, לאחות או לרופא.

(7.2) **תזכורת**

היא מאפשרת לדוחות את חדר על פי התשובה לכריזה כאשר המכריז אינו עונה, הכריזה היא ללא קשר שמע, נשמע סימן תפוס, לפני התשובה למקום הכריזה נענות כריזות אחרות או שכריזות מייעדות נשלחות לאנשים אחרים (אחות, צוות השירות או הרופא).


גע באחד הסמלים להפעלת התזכורת:

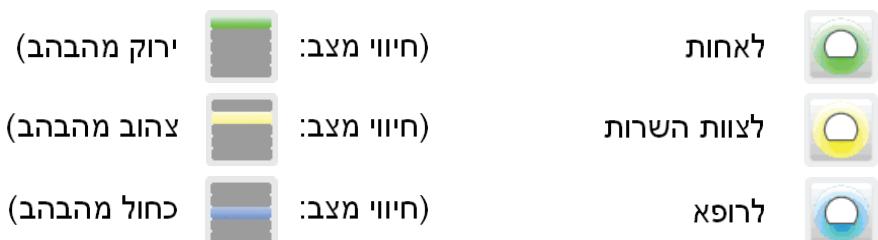

רישום הרשימה (כריזה בפועל - לדוגמא כריזת חרום ממיטה) מסולק מרשימה הכריזה ומוועבר לרשימת התזכורת.


אייפוא תזכורת מתבצע תמיד באמצעות אותו לחץ נוכחות בחדר של המכריז!

כריזות הקיימות בגין תזכורת ושלא אופסו באמצעות אותו לחץ נוכחות (בחדר של המכריז), לאחר זמן מוגדר מופעלות מחדש באופן אוטומטי ורשימת הכריזות נפתחת.

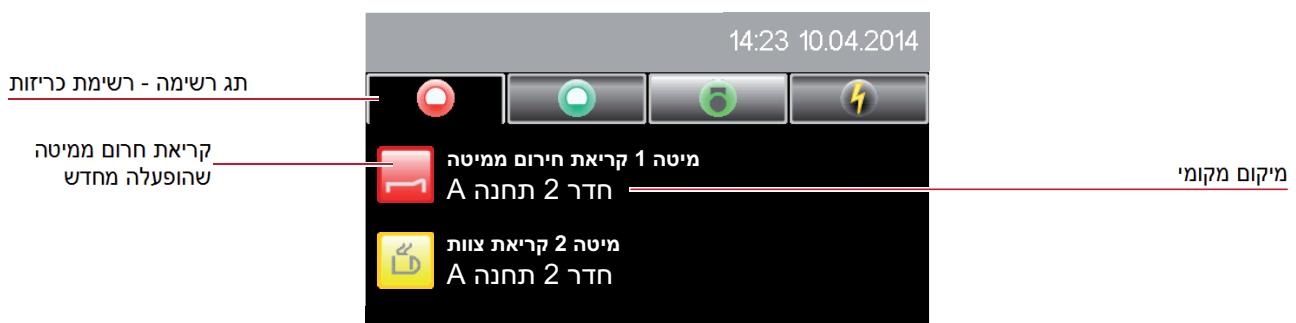


(8.1) סריקת חדר


גע שוב בתג הרשימה הנבחר בסרגל הרשימות, ואין זה משנה אם זו רשימת כריזה, רשימת תזכורות, רשימת נוכחות או רשימת כשלים (למשל, רשימת כריזה).

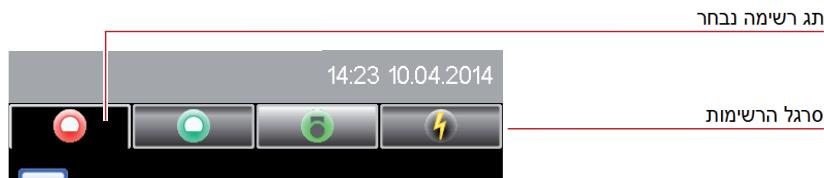

לאחר פתיחת רשימת החדרים גע באותו רישום ברשימה.

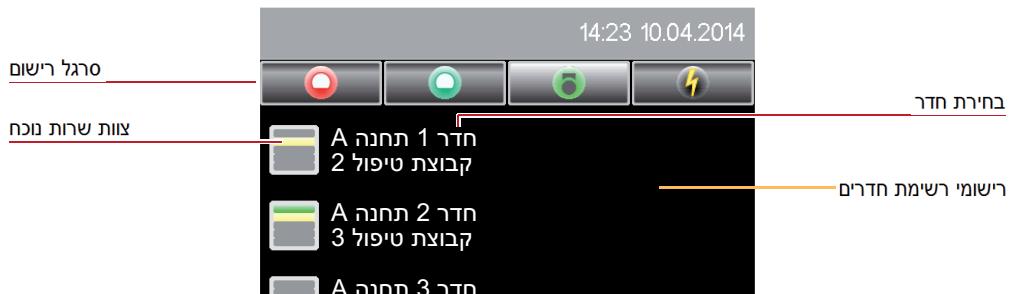



בסקרת החדרים מוצגות כל המידע המזמין בחדר.
מצגים כל תפקידי החדר הזמינים לחדר זה.

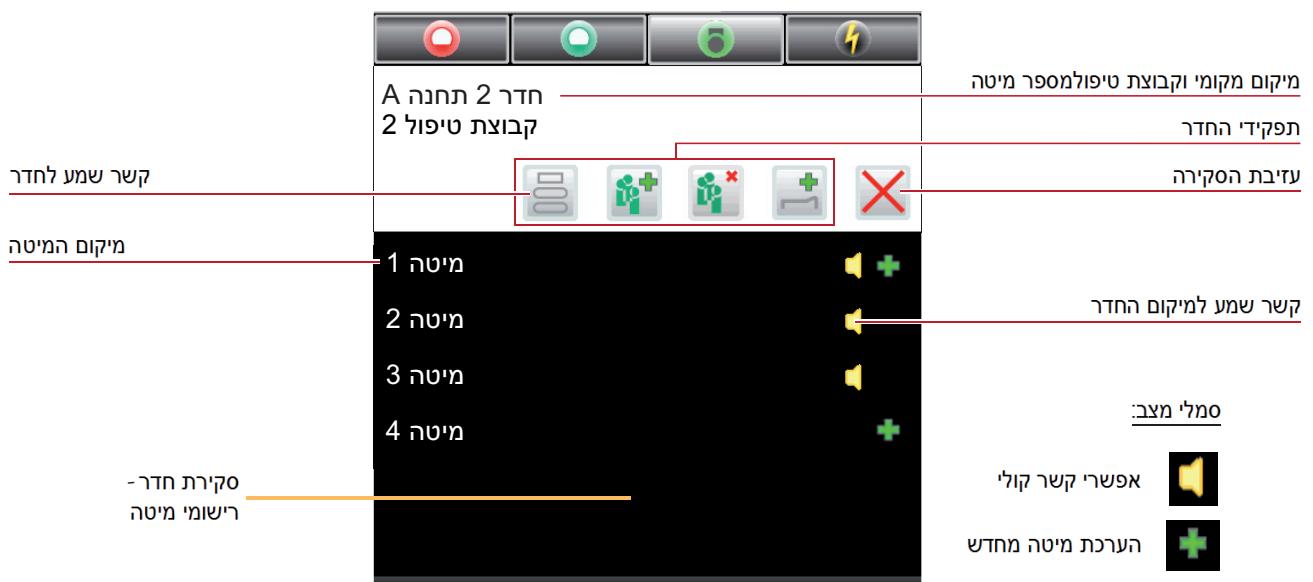

התהווות קשר שמע למסוף הקשר מתבצע באמצעות מגע על סמל החדר . כדי ליצור שייה ישירה לחולה, גע במספר מיטה.

(8.2) תפקידי החדר

להלן התפקדים שניתן לבצע לגבי חדר:

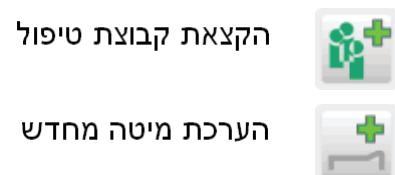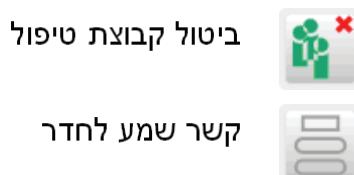


(9) התחברות בין תחנות

פעולה זאת מרשאה ליצור תחומי טיפול, הכוללים שתי תחנות או יותר. החיוו, שיגור הכרזיה ואפשרות לענות לכל כרזה מתרחבים, בהתאם לדיפיות, לכל מסופי חדרי השירות ומסופי הקשר בתחום זה.

(9.1) התחברות לא פעילה

בתוךם הפעולה, גע בסמל , נפתחת רשימת התחברות.


אם אין התחברות של תחנה עצמה עם תחנה אחרת, מוצעת רשימה של תחנות אפשריות אתן אפשרות להתחברות. ברגעה בתחנה המבוקשת ברישום הרשימות מופעלת התחברות עם התחנה.

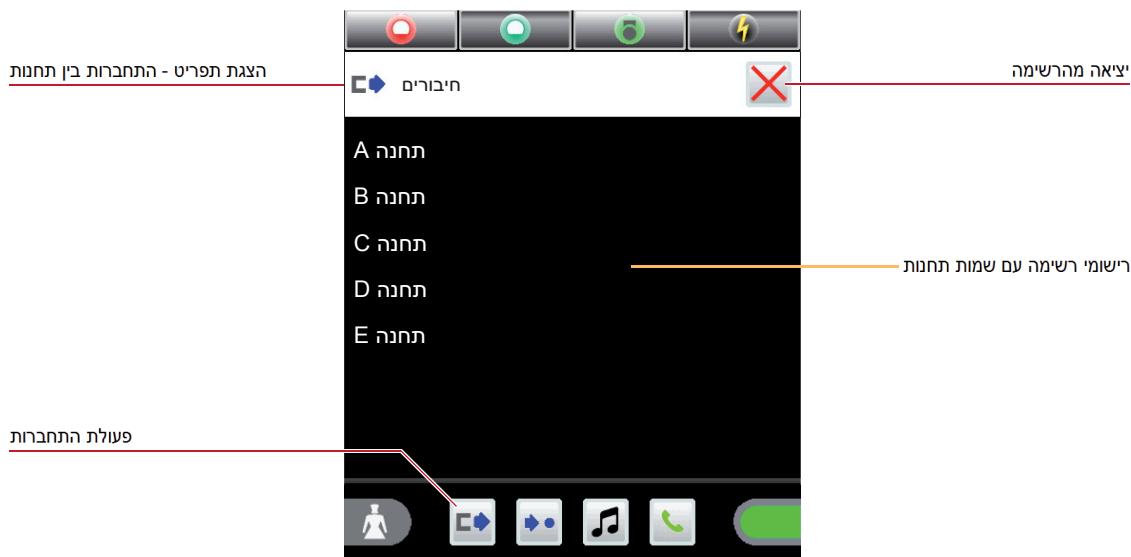

(9.2) התחברות פעילה

בתוךם הפעולה, גע בסמל , נפתחת רשימת התחברות.

אם תחנה עצמה מחוברת כבר עם תחנה אחרת, מוצגות כל התחנות הנמצאות בקבוצת התחנה הזאת.

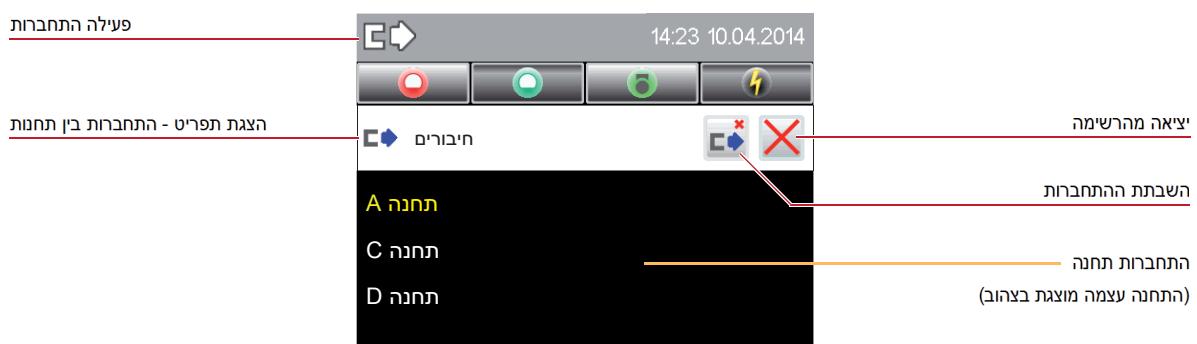

באיור זה ניתן לבטל שוב את התחברות בין התחנות על ידי נגיעה בסמל .

(10) הודעות

ניתן לבצע את ההודעה, כשההשופורת מונחת, על ידי המיקרופון המובנה או באמצעות השופורת עצמה.



הודעה כללית



movebrahdet hoduda lkl chadrim bthchom htipol.

הודעת אחותם עברת



הודעה lkl chadrim bthchom htipol bo mofalat nchot achot oz zoot shrot.

הודעת רופא מועברת




hoduda lkl chadrim bthchom htipol bo mofalat nchot rufa.

הודעת צוותם עברת



t hoduda lkl chadrim bthchom htipol bo mofalat nchot achot, zoot shrot oz rufa.

גע bthchom feulah ul otzo smel hoduda, hoduda matbatzut.

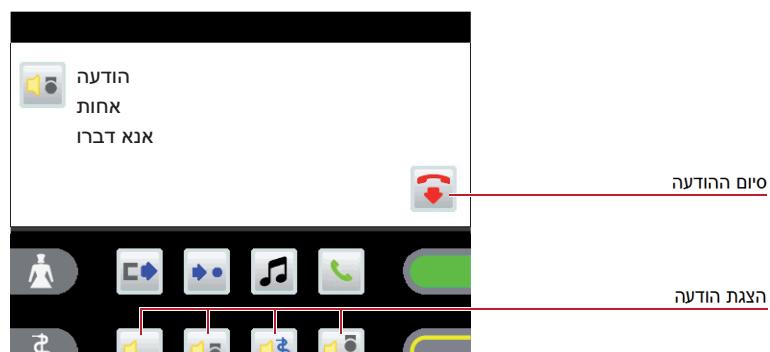


סיום ההודעה אפשרית בנגיעה בסמל או בהנחת השופורת.




(11.1) טלפון - כינון שיחה

בתחום הפעולה, גע בסמל , התפריט נפתח.

בתחום הפעולה גע בסמלי המספרים **0** - **9** לחיגוג מספר המני.

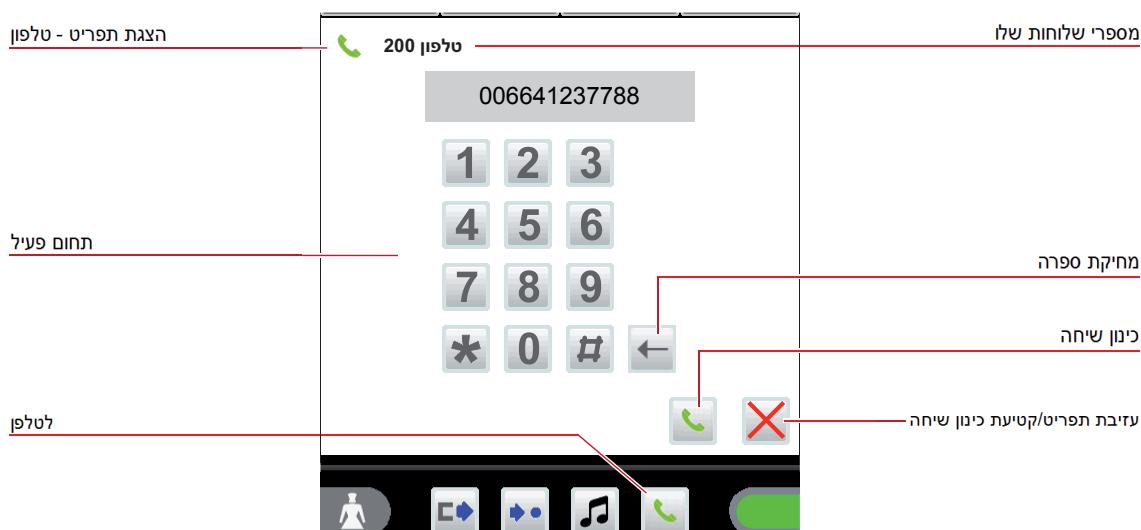

בנגיעה בסמל  יאשר מסpter החיוג, נוצר קשר הדיבור.

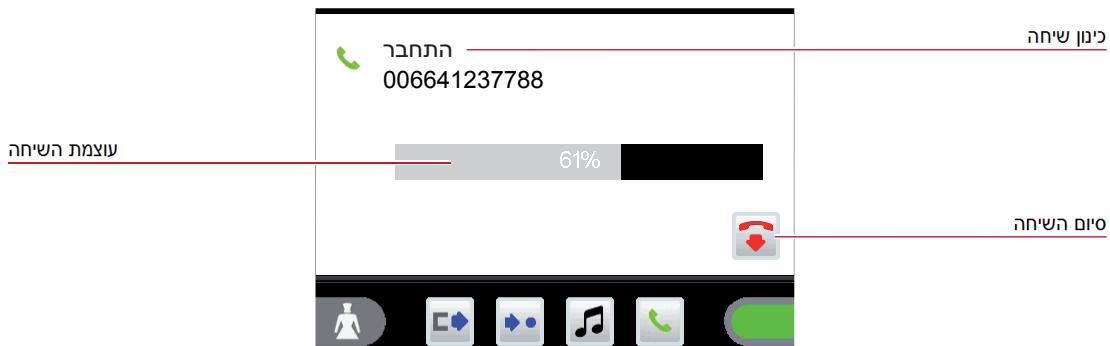

במהלך השיחה ניתן לשנות את עוצמת השיחה (רמקול/שפורת טלפון) בנגעה בפס עוצמת הקול.

11.2) תשובה לטלפון

בצלצול טלפון מוצגים מספר המחייג והשם, בתלות בתצורת מערכת הטלפון.



בתחומי הפעולה, גע בסמל  קשר השיחה נוצר. במהלך השיחה ניתן לשנות את עוצמת השיחה (רמקול/שפורת טלפון) בנגעה בפס עוצמת הקול.

12) ניקוי וחיטוי

לרכיבי למסוף הוצאות, מותר השימוש, ללא יצא דופן, באמצעות חיטוי הכלולים אסתר או קטון חלקית במלואם. כהלייך חיטוי מותר רק שימוש בחיטוי בניגוב ובשם מקרה לא חיטוי בטבילה.

אם נצא מקרים המוצר הפגום הזדहם, חייבים לשלווח אותו חזירה לתקן על פי הנחיה זאת לניקוי ולחיטוי.

13) הפעלה ותחזוקה

הפעלת המערכת האור קולית IP VISOCALL. מסתמכת על סעיף 9 של התקן VDE0834 DIN חלק 1. זכותנו להציג על כל שבמאמר זה, בין היתר, נדרשות ביקורות ותחזוקות תקופתיות, אותן נבצע בראzon על פי דרישתכם.



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com



Czech Rep. • CZ-149 00 Prague 4 – Újezd., Štítová 283 • Tel. +420 2 74784422
Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel. +36 1 4644300
India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel. +91 124 4141501
Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinium V • Tel. +48 22 3300620
Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A et. 1, Sector 2 • Tel. +40 372 756316
Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel. +7 495 5105015
Slovakia • SK-83527 Bratislava-Rača, Mudrochova 2 • Tel. +421 2 44635595
Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel. +46 8 6801860
Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel. +90 216 3455199

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET