




# Patiënten terminal PAT

## Gebbruikershandleiding

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Overzicht

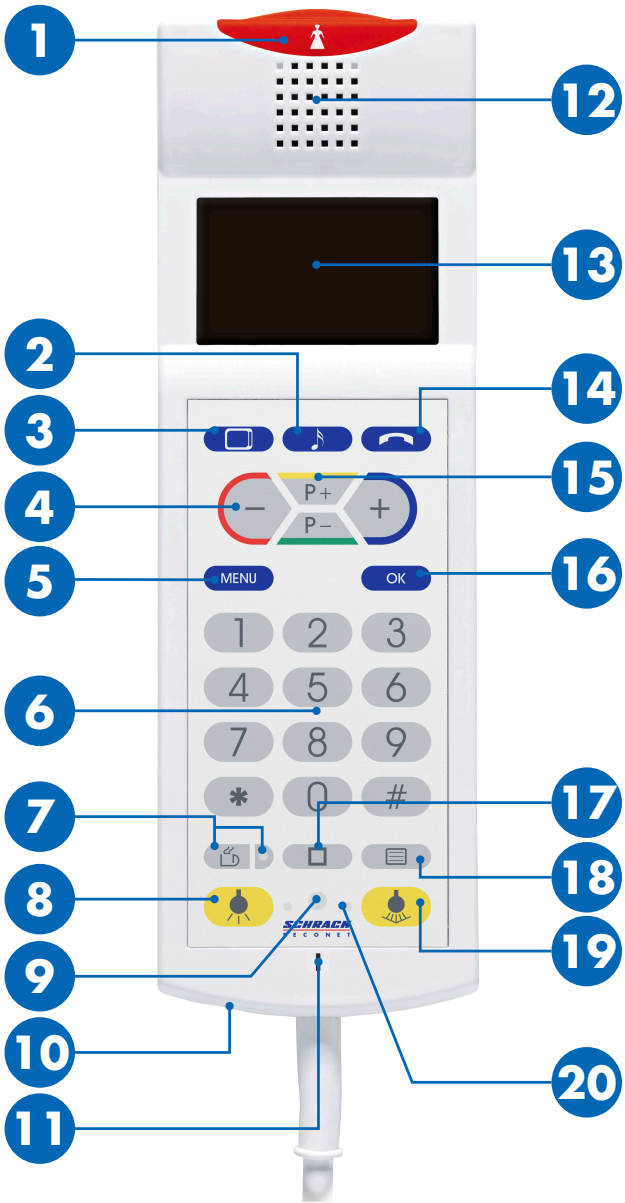

<b>1</b>	<b>Verpleegkundige oproeptoets</b>
<b>2</b>	<b>Radio toets</b>
<b>3</b>	<b>TV toets</b>
<b>4</b>	<b>-/+ toetsen</b>
<b>5</b>	<b>Menu selectie toets</b>
<b>6</b>	<b>Numeriek toetsenbord</b>
<b>7</b>	<b>Service oproeptoets met oriëntatie LED</b>
<b>8</b>	<b>Kamerverlichting</b>
<b>9</b>	<b>Infrarood ontvanger (optioneel)</b>
<b>10</b>	<b>Koptelefoon aansluiting</b>
<b>11</b>	<b>Microfoon</b>
<b>12</b>	<b>Luidspreker</b>
<b>13</b>	<b>Display</b>
<b>14</b>	<b>Telefoontoets</b>
<b>15</b>	<b>Programma selectie toets</b>
<b>16</b>	<b>Bvestigings toets</b>
<b>17</b>	<b>Toets speciale functies</b>
<b>18</b>	<b>Teletekst toets</b>
<b>19</b>	<b>Bedleesverlichting</b>
<b>20</b>	<b>Oriëntatie LED verlichting</b>




### **VOORZICHTIG**

#### **Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken**

Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf niet op met behulp van dit toestel.

## Oproep verplegend personeel

De oriëntatie LED's van de oproeptoets  1 is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

### Verplegend personeel oproepen

Druk op de  1 toets.

► De oproeptoets  1 licht nu fel op.


### Binnenkomende oproep verplegend personeel

1. Beltoon is hoorbaar over de luidspreker 12 en de oproeptoets knippert.
2. Houdt de patiëntterminal tegen het oor zoals een telefoonhoorn.
3. Het verplegend personeel eindigt het gesprek en verbreekt de verbinding.

## Service oproep

De oriëntatie LED van de toets is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

Druk op de service toets  7.


► De LED van de service toets  7 licht nu fel op.

De service medewerker zal u terugbellen of persoonlijk bij u langskomen.

## Verlichting aan of uitschakelen


De oriëntatie LED van de lichttoets 20 zijn continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

### Kamerverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets kamerverlichting  8.

► De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

### Bedleesverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets bedleesverlichting  19.

► De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

## Menufuncties

### Display helderheid instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Helderheid** op het display 13 met de toetsen **P+ / P-** 15.
3. Bevestigt de keuze **OK** toets 16.
4. Stel de gewenste helderheid in met de **- / +** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

### Display contrast instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Contrast** op het display 13 met de toetsen **P+ / P-** 15.
3. Bevestigt de keuze **OK** toets 16.
4. Stel het gewenste contrast in met de **- / +** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

### Volume instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Volume** op het display 13 met de toetsen **P+ / P-** 15.
3. Bevestigt de keuze **OK** toets 16.
4. Selecteer voor welke functie het volume moet worden ingesteld met de toetsen **P+ / P-** 15.
5. Stel het gewenste volume in met de **- / +** toetsen 4.
6. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

### Selecteer beltoon

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Beltonen** op het display 13 met de toetsen **P+ / P-** 15.
3. Bevestigt de keuze **OK** toets 16.
4. Selecteer de gewenste beltoon met de toetsen **P+ / P-** 15.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

# Optionele functies

## TV

### TV aan- of uitzetten

Druk op de TV toets  3 om de TV aan of uit te zetten.

- ▶ De TV staat aan en de laatst bekeken zender staat in het display vermeld 13.

### Zenderkeuze


Toets het gewenste kanaalnummer in op het numeriek toetsenbord 6 of scrol naar het volgende kanaal met de toetsen **P+ / P-** 15.

### Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker 12 of via de aangesloten koptelefoon 10.

Stel het gewenste volume in met de **- / +** toetsen 4.

### Teletekst

1. Druk op de teletekst toets  18 voor het selecteren van teletekst mode.
2. Toets het gewenste paginanummer in op het numerieke toetsenbord 6 of scrol naar het volgende pagina met de toetsen **P+ / P-** 15.

## Radio

### Radio aan- of uitzetten

Druk op de radio toets  2 om de radio aan of uit te zetten.

- ▶ De radio staat aan en de laatst ontvangen zender staat op het display vermeld 13.

### Zenderkeuze

Toets het gewenste kanaalnummer in op het numeriek toetsenbord 6 of scrol naar het volgende kanaal met de toetsen **P+ / P-** 15.


### Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker 12 of via de aangesloten koptelefoon 10.


Stel het gewenste volume in met de **- / +** toetsen 4.

## Telefoon



### Gesprek aanname

1. Binnenkomend gesprek aannemen door op de telefoontoets te drukken  14.
2. Stel het gewenste volume in met de **- / +** toetsen 4.
3. Druk op de telefoontoets  14 om het gesprek te verbreken.


### Telefoneren

1. Druk op de telefoontoets  14.
2. Geef het voorloopcijfer in om een extern telefoonnummer te kunnen bellen (meestal -0).
3. Geef het gewenste telefoonnummer in op het numeriek toetsenbord 6.
4. Keuze bevestigen met de **OK** toets 16.
5. Druk op de telefoontoets  14 om het gesprek te verbreken.

### Laatst gekozen nummer herhalen

1. Druk op de telefoontoets  14.
2. De laatste tien gekozen nummers staan in het display vermeld 13.
3. Selecteer het gewenste nummer door **- / +** toetsen 4.
4. Keuze bevestigen met de **OK** toets 16.
5. Druk op de telefoontoets  14 om het gesprek te verbreken.

### Zonwering openen/sluiten

1. Druk op de toets speciale functies  17.
2. Selecteer **Zonwering** op het display 13 met de toetsen **P+ / P-** 15.
3. Open of sluit de zonwering met de **- / +** toetsen 4.

### Infrarood ontvanger

Infrarood ontvanger voor de integratie met externe apparatuur.



SCHRACK SECONET AG  
Eibesbrunnnergasse 18  
A-1120 Vienna  
Tel. +43 1 81157  
[office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)  
[www.schrack-seconet.com](http://www.schrack-seconet.com)

NL

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
SECONET