

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
office@schrack-seconet.com | 857 50 43+

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hågersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

פונקציות אופציונליות

טלוויזיה

הדלקה וכיבוי של מכשיר הטלוויזיה

לחץ על כפתור הטלוויזיה  כדי לכבות ולהדליק את מכשיר הטלוויזיה.

מכשיר הטלוויזיה דולק עם הערוץ האחרון שנצפה יוצג על המסך ¹³.

בחירת ערוץ

הזן את מספר הערוץ ע"י שימוש במקלדת המספרים ⁶ או העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית ¹⁵ **P+/P-**.

הגדרות קול ועוצמת שמע

פלט הקול דרך הרמקולים ¹² או האזניות המחוברות (שקע החיבור ¹⁰).

הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ⁴.

הצגת טלטקסט

1. לחץ על כפתור הטלטקסט ¹⁸  כדי להציג או לעזוב את מצב הטלטקסט.

2. הזן את מספר העמוד ע"י שימוש במקלדת המספרים ⁶ או העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית ¹⁵ **P+/P-**.

רדיו

כיבוי והדלקה של הרדיו

לחץ על כפתורי הווידאו ²  כדי להדליק ולכבות את הרדיו.

מכשיר הרדיו דולק עם התחנה האחרונה שנשמעה תוצג על המסך ¹³.

בחירת ערוץ

הזן את מספר הערוץ ע"י שימוש במקלדת המספרים ⁶ או העבר לערוץ הבא ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית ¹⁵ **P+/P-**.

הגדרות קול ועוצמת שמע

פלט הקול דרך הרמקולים ¹² או האזניות המחוברות (שקע החיבור ¹⁰).

הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ⁴.

טלפון

קבלת שיחה

1. קבל שיחה נכנסת ע"י שימוש בכפתור הטלפון ¹⁴ .
2. הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ⁴.
3. לחץ על כפתור הטלפון ¹⁴  כדי לסיים את ההתקשרות לאחר השיחה.

ביצוע שיחת טלפון

1. לחץ על כפתור הטלפון ¹⁴ .
2. לחץ על כפתור המספר להחלפת רשת הטלפניה קו טראנק/ציבורי (בדר"כ 0, אנא בדוק עם הצוות).
3. התקשר למספר הטלפון הרצוי ע"י שימוש במקלדת המספרים ⁶.
4. אשר עם **OK** כפתור ¹⁶.
5. לחץ על כפתור הטלפון ¹⁴  כדי לסיים את ההתקשרות לאחר השיחה.

חיגו חוזר למספר האחרון

1. לחץ על כפתור הטלפון ¹⁴ .
2. עשרת מספרי הטלפון האחרונים שחיגו מופיעים על הצג ¹³.
3. בחר את מספר הטלפון הרצוי ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ⁴.
4. אשר עם **OK** כפתור ¹⁶.
5. לחץ על כפתור הטלפון ¹⁴  כדי לסיים את ההתקשרות לאחר השיחה.

בקרי שליטה בתריסים

1. לחץ על כפתורי הפונקציות המיוחדות ¹⁷ .
2. בחר תריסים על הצג ¹⁵ ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית ¹⁵ **P+/P-**.
3. פתיחה וסגירה של התריסים ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ⁴.

מקלט אינפרה אדום

השימוש במקלט אינפרה אדום הוא לצורך שליטה מרחוק במסוף המטופל בעזרת מכשירי השליטה הסביבתיים.

פעולה

קריאה לצוות סיוע

לחצן הקריאה **1** מואר באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הלחצנים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

יצירת קשר עם צוות הסיוע

לחצן על כפתור **1** 

◀ לחצן הקריאה **1**  נדלק.

תשובות צוות הסיוע

1. רעשי גונג ברמקול **12** ולחצן הקריאה מהבהב.
2. השתמש במסך המטופל כמו בטלפון כדי לדבר עם צוות הסיוע.
3. צוות הסיוע ינתק את ההתקשרות בסוף השיחה.

קריאת שירות

ה-LED של הלחצן מואר באופן תמידי, כך שקל יותר למצוא אותו, אפילו בחושך.

לחצן על לחצן קריאת השירות **7** .

◀ ה-LED של לחצן קריאת השירות **7**  נדלק.

צוות הסיוע ייצור קשר דרך המכשיר או יגיע באופן אישי.

כיבוי והדלקה של התאורה

ה-LED של כפתורי התאורה **20** מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הכפתורים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

תאורת חדר (אופציונלי)

לחצן על כפתור תאורת החדר **8**  לחיצה קצרה.

◀ תאורת החדר נדלקת ונכבית.

תאורת קריאה (אופציונלי)

לחצן על כפתור תאורת החדר **19**  לחיצה קצרה.

◀ תאורת הקריאה נדלקת ונכבית.

פונקציות התפריט

הגדרת בהירות הצג

1. לחץ על כפתור **תפריט** **5**.
2. בחר בהירות על הצג **13** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P+/P- 15**.
3. אשר עם **OK** כפתור **16**.
4. הגדר את הבהירות הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- **4**.
5. השתמש בכפתור התפריט **תפריט** **5** כדי לעזוב את התפריט.

הגדרת ניגודיות הצג

1. לחץ על כפתור **תפריט** **5**.
2. בחר בניגודיות על הצג **13** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P+/P- 15**.
3. אשר עם **OK** כפתור **16**.
4. הגדר את הבהירות הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- **4**.
5. השתמש בכפתור התפריט **תפריט** **5** כדי לעזוב את התפריט.

הגדרת עוצמת שמע

1. לחץ על כפתור **תפריט** **5**.
2. בחר עוצמת שמע על הצג **15** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P+/P- 15**.
3. אשר עם **OK** כפתור **16**.
4. בחר לאיזון פונקציה יש להגדיר את עוצמת השמע ע"י שימוש בכפתורי הבחירה **P+/P- 15**.
5. הגדר את עוצמת השמע הרצויה ע"י שימוש ב- **+/-** כפתורי ה- **4**.
6. השתמש בכפתור התפריט **תפריט** **5** כדי לעזוב את התפריט.

הגדרת רינגטון

1. לחץ על כפתור **תפריט** **5**.
2. בחר רינגטונים על הצג **13** ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P+/P- 15**.
3. אשר עם **OK** כפתור **16**.
4. הגדר את הרינגטון הרצוי ע"י שימוש בכפתורי בחירת התוכנית **P+/P- 15**.
5. השתמש בכפתור התפריט **תפריט** **5** כדי לעזוב את התפריט.


לחצן קריאה	1
כפתור רדיו	2
כפתור טלויזיה	3
כפתור +/-	4
כפתור תפריט	5
מקלדת מספרים	6
כפתור קריאת שירות עם LED (תאורת גילוי)	7
תאורת חדר	8
מקלט אינפרה אדום (אופציונלי)	9
חיבור אזניות	10
מיקרופון	11
רמקול	12
צג	13
כפתור טלפון	14
כפתורי בחירת תוכנית	15
כפתור אישור	16
כפתור פונקציה מיוחדת	17
כפתור טלסקט	18
תאורת קריאה	19
LED של כפתור תאורה (תאורת גילוי)	20

זהירות



אסור להשתמש כעזר לטיפוס

הכבל והמכשיר אינם עזר לטיפוס. אל תמשוך את עצמך מעלה ע"י שימוש במכשיר.

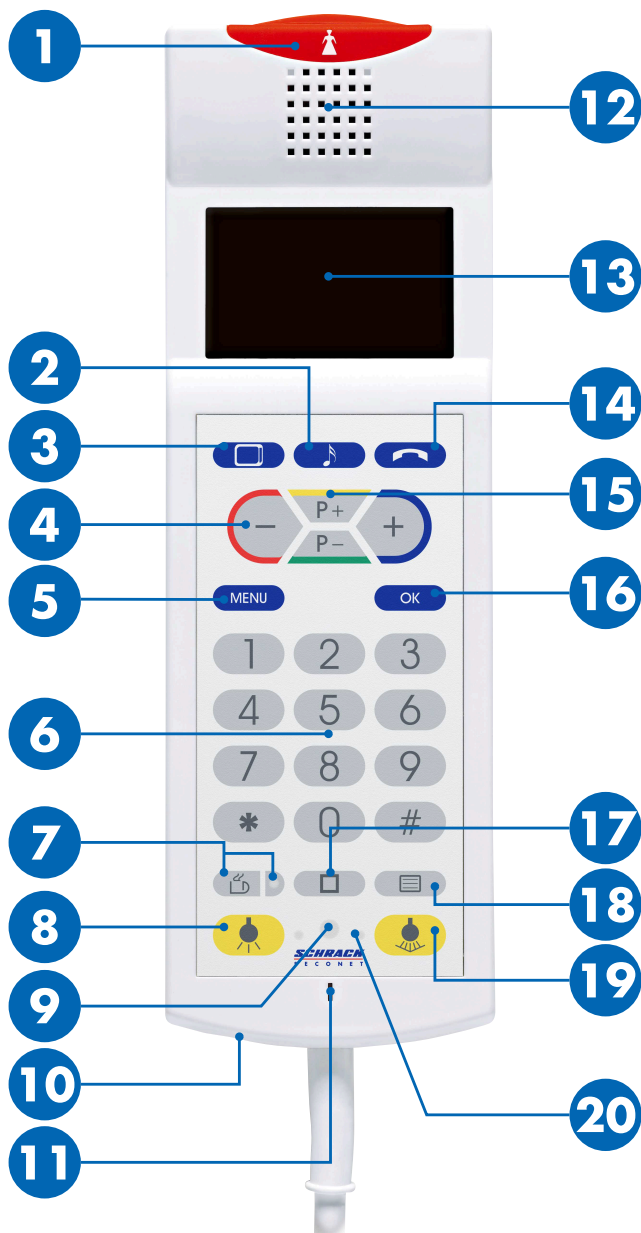

מסוף מטופל PAT

מדריך למשתמש