


Pulsantiera BT-B

Istruzioni per l'uso

Panoramica

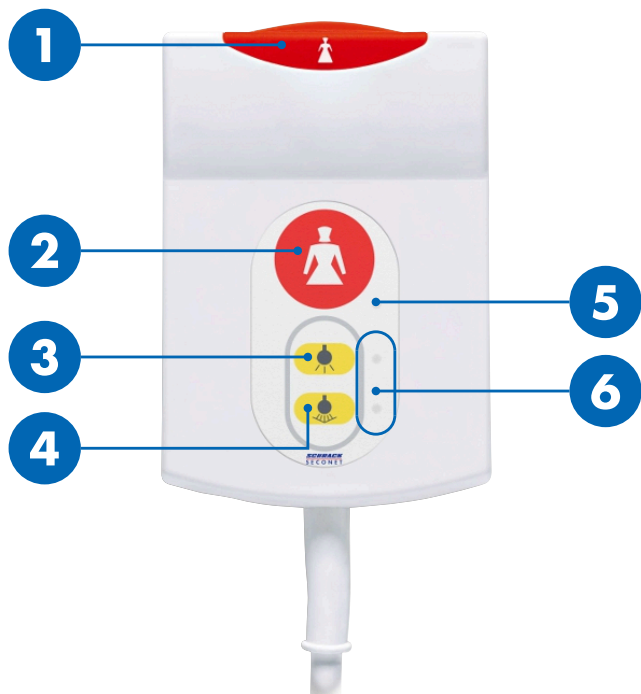

- 1 / 2** Pulsante di chiamata
- 3** Luce di stanza
- 4** Luce di lettura
- 5** LED del tasto di chiamata (luce di conferma)
- 6** LED (di individuazione) del tasto luce



ATTENZIONE

Non utilizzare come ausilio per sollevarsi

Il cavo e il terminale non sono dispositivi per il sollevamento. Non utilizzare per cercare di sollevarsi.

Chiamata per il personale di assistenza

Il pulsante di chiamata  **1** e il LED **5** sono costantemente accesi, in modo che sia più facile individuarli anche al buio.

Chiamata per il personale di assistenza

Premere il pulsante di chiamata  **1** o **2**.

- ▶ Il pulsante di chiamata  **1** e il LED **5** si illuminano.

Accendere e spegnere la luce

Il LED dei tasti luce **6** resta costantemente acceso, in modo che sia più facile individuarli anche al buio.

Luce di stanza (opzionale)

Premere il tasto luce di stanza  **3** brevemente.

- ▶ La luce della stanza si accenderà o spegnerà.

Luce di lettura (opzionale)

Premere il tasto luce di lettura  **4** brevemente.

- ▶ La luce di lettura si accenderà o spegnerà.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199