


Potilaspääte PAT-L

Käyttöopas

Yleiskuvaus

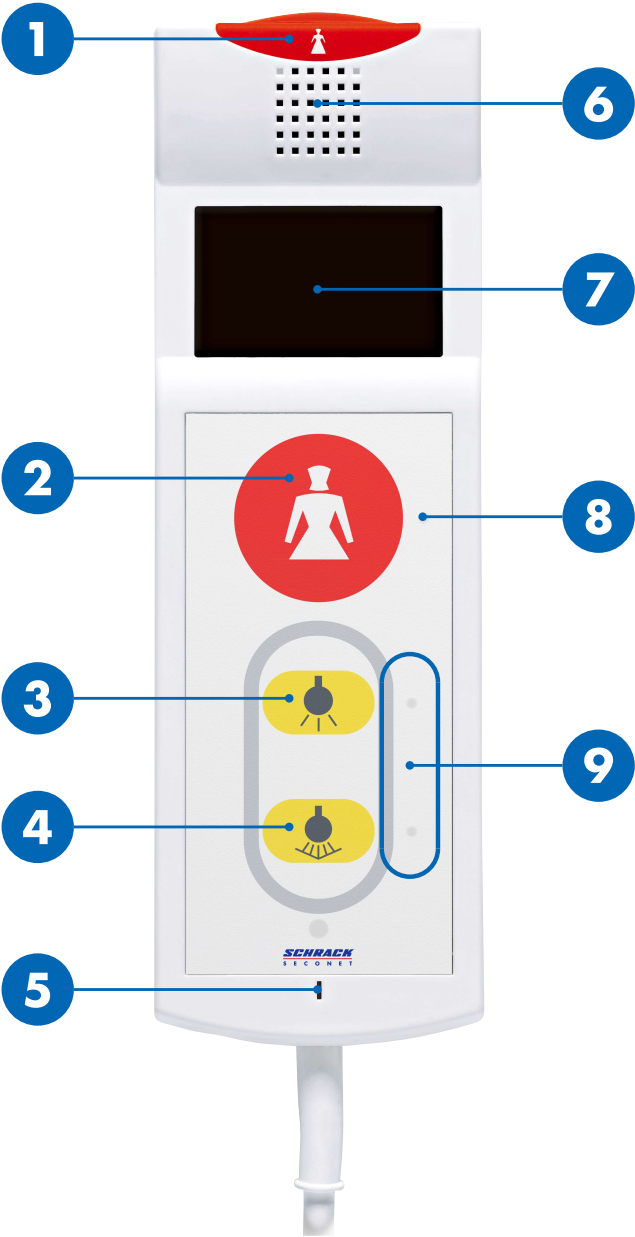

- 1 / 2 Kutsupainikkeet
- 3 Huonevalo
- 4 Lukuvalo
- 5 Mikrofoni
- 6 Kaiutin
- 7 Näyttö
- 8 Kutsupainikkeen LED-valo (varmistusvalo)
- 9 Valopainikkeen LED-valo (apuvalo)



HUOMIO

Ei saa käyttää nousutukena

Johto ja laite eivät ole nousutukia. Älä vedä itseäsi ylös laitteen avulla.

Hoitajakutsu

Kutsupainike  1 ja LED-valo 8 palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

Hoitajan kutsuminen

Paina kutsupainiketta  1 tai 2.

- Kutsupainike  1 ja LED-valo 8 syttyvät.

Hoitaja vastaa

1. Merkkiääni kuuluu kaiuttimesta 6 ja kutsupainike/LED-valo vilkkuu.
2. Puhu hoitajan kanssa käyttämällä potilaspäätettä puhelimen tavoin.
3. Hoitaja katkaiseen puhelun sen päätyttyä.

Valon sytyttäminen ja sammuttaminen

Valopainikkeiden LED-valot 9 palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

Huonevalo (valinnainen)

Paina huonevalon painiketta  3 lyhyesti.

- Huonevalo syttyy tai sammuu.

Lukuvalo (valinnainen)

Paina lukuvalon painiketta  4 lyhyesti.

- Lukuvalo syttyy tai sammuu.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422
Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199