




# Ručni govorni pozivnik za pacijente PAT-S

**Korisnički priručnik**

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Pregled

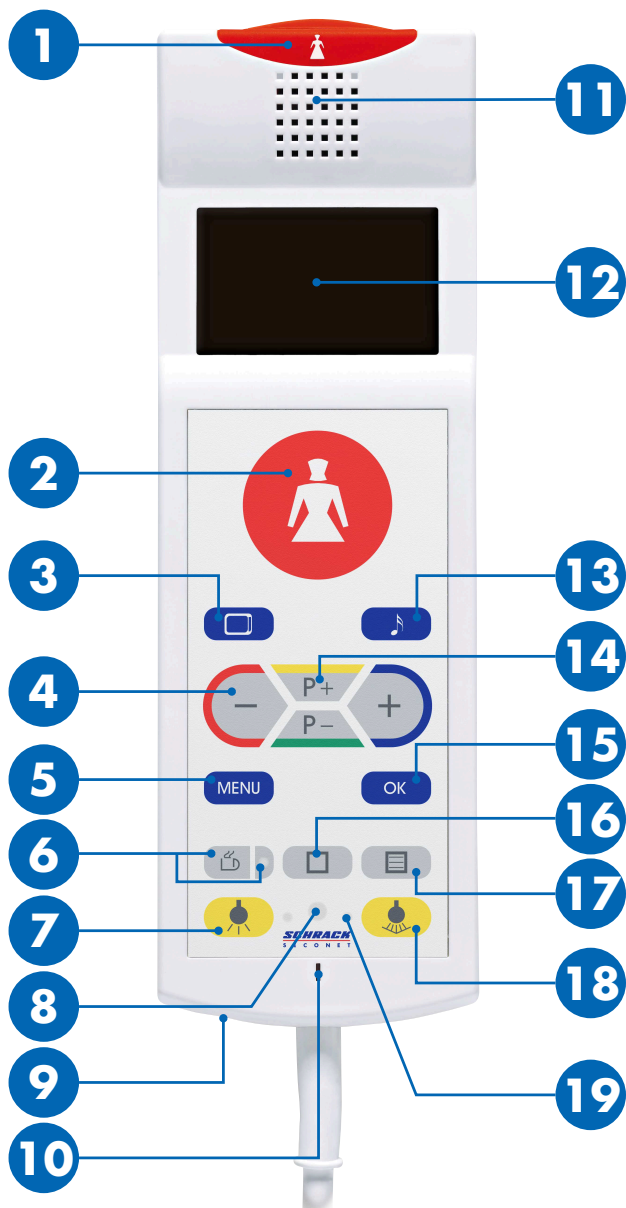

<b>1 / 2</b>	<b>Pozivna tipkala</b>
<b>3</b>	<b>Tipka za TV</b>
<b>4</b>	<b>-/+ tipka</b>
<b>5</b>	<b>Tipka za izbornik</b>
<b>6</b>	<b>Tipkalo za poziv radi usluge sa LED svjetlom za uočavanje</b>
<b>7</b>	<b>Sobno svjetlo</b>
<b>8</b>	<b>Infracrveni prijemnik (opcionalno)</b>
<b>9</b>	<b>Spajanje slušalice</b>
<b>10</b>	<b>Mikrofon</b>
<b>11</b>	<b>Zvučnik</b>
<b>12</b>	<b>Ekran</b>
<b>13</b>	<b>Tipka za radio-prijemnik</b>
<b>14</b>	<b>Tipke za odabir programa</b>
<b>15</b>	<b>Tipka za potvrdu</b>
<b>16</b>	<b>Tipka za dodatne funkcije</b>
<b>17</b>	<b>Tipka za teletekst</b>
<b>18</b>	<b>Svjetlo za čitanje</b>
<b>19</b>	<b>LED svjetlo za uočavanje</b>



### **OPREZ**


#### **Ne koristiti kao oslonac pri ustajanju iz kreveta**


Ne koristiti kablove i uređaje kao oslonac pri ustajanju iz kreveta. Nemojte se podizati iz kreveta koristeći uređaje kao oslonac.

## Poziv medicinskom osoblju

Pozivna tipka  1 konstantno svijetli radi uočavanja u mraku.

### Pozivanje medicinskog osoblja

Pritisnite pozivnu tipku  1 ili 2.

► Pozivna tipka  1 zasnijetli.


### Odgovor medicinskog osoblja

1. Zvučni signal putem zvučnika 11 i pozivna tipka bljeska.
2. Koristite govorne pozivnike za pacijente za razgovor sa medicinskim osobljem.
3. Medicinsko osoblje prekida poziv na kraju razgovora.

## Poziv za uslugu

LED svjetlo konstantno svijetli radi uočavanja u mraku.

Pritisnite tipku za poziv radi usluge  6.


► LED svjetlo poziva radi usluge  6 zasnijetli.

Servisno osoblje će uzvratiti poziv ili doći osobno.

## Uključenje / isključenje svjetla


LED svjetla 19 konstantno svijetle radi uočavanja u mraku.

### Sobno svjetlo (opcionarno)

Kratko pritisnite tipku za sobno svjetlo  7.

► Sobno svjetlo je uključeno / isključeno.

### Svjetlo za čitanje (opcionarno)

Kratko pritisnite tipku za svjetlo za čitanje  18.

► Svjetlo za čitanje je uključeno /isključeno.

## Funkcije izbornika

### Postavljanje razine osvjetljenja ekrana

1. Pritisnite tipku **IZBORNİK** 5.
2. Odaberite **Osvjetljenje** na ekranu 12 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 14.
3. Potvrdite sa **OK** tipkom 15.
4. Postavite razinu osvjetljenja ekrana pomoću **-/+** tipki 4.
5. Pomoću tipke **IZBORNİK** 5 izlazi se iz izbornika.

### Postavljanje razine kontrasta ekrana

1. Pritisnite tipku **IZBORNİK** 5.
2. Odaberite **Kontrast** na ekranu 12 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 14.
3. Potvrdite sa **OK** tipkom 15.
4. Postavite razinu kontrasta ekrana pomoću **-/+** tipki 4.
5. Pomoću tipke **IZBORNİK** 5 izlazi se iz izbornika.

### Postavljanje razine glasnoće

1. Pritisnite tipku **IZBORNİK** 5.
2. Odaberite **Glasnoća** na ekranu 12 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 14.
3. Potvrdite sa **OK** tipkom 15.
4. Odaberite za koju funkciju treba postaviti glasnoću pomoću tipke za odabir programa **P+ / P-** 14.
5. Postavite razinu glasnoće pomoću **-/+** tipki 4.
6. Pomoću tipke **IZBORNİK** 5 izlazi se iz izbornika.

# Dodatne funkcije

## TV

### Uključiti / isključiti TV

Pritisnite tipku za TV  3 za uključenje / isključenje uređaja.

- ▶ TV uređaj je uključen i zadnji odabrani kanal prije isključenja prikazat će se na ekranu 12.

### Biranje kanala


Prebacite na sljedeći kanal pomoću tipki za odabir kanala **P+ / P-** 14.

### Postavljanje vrste zvuka i razine glasnoće

Zvuk putem zvučnika 11 ili slušalice (priključna utičnica 9).


Postavite razinu glasnoće pomoću **- / +** tipki 4.

### Prikaz teleteksta

1. Pritisnite tipku za teletekst  17 za uključenje / isključenje teleteksta.
2. Okrenite na sljedeću stranicu pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 14.

## Radio-prijemnik

### Uključiti / isključiti radio-prijemnik

Pritisnite tipku za radio-prijemnik  13 za uključenje / isključenje radio-prijemnika.

- ▶ Radio-prijemnik je uključen i zadnja odabrana stanica prije isključenja prikazat će se na ekranu 12.

### Biranje kanala


Prebacite na sljedeći kanal pomoću tipki za odabir kanala **P+ / P-** 14.

### Postavljanje vrste zvuka i razine glasnoće

Zvuk putem zvučnika 11 ili slušalice (priključna utičnica 9).

Postavite razinu glasnoće pomoću **- / +** tipki 4.

## Upravljanje roletama

1. Pritisnite tipku za dodatne funkcije  16.
2. Odaberite **Rolete** na ekranu 12 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 14.
3. Upravljanje roletama pomoću **- / +** tipki 4.

## Infracrveni prijemnik

Infracrveni prijemnik omogućuje daljinsko upravljanje svjetlom/roletama putem govornih pozivnika za pacijente / slušalica.



SCHRACK SECONET AG  
Eibesbrunnnergasse 18  
A-1120 Vienna  
Tel. +43 1 81157  
[office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)  
[www.schrack-seconet.com](http://www.schrack-seconet.com)

HR

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
SECONET