




Hasta El Seti PAT

Kullanım kılavuzu

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Genel bakış

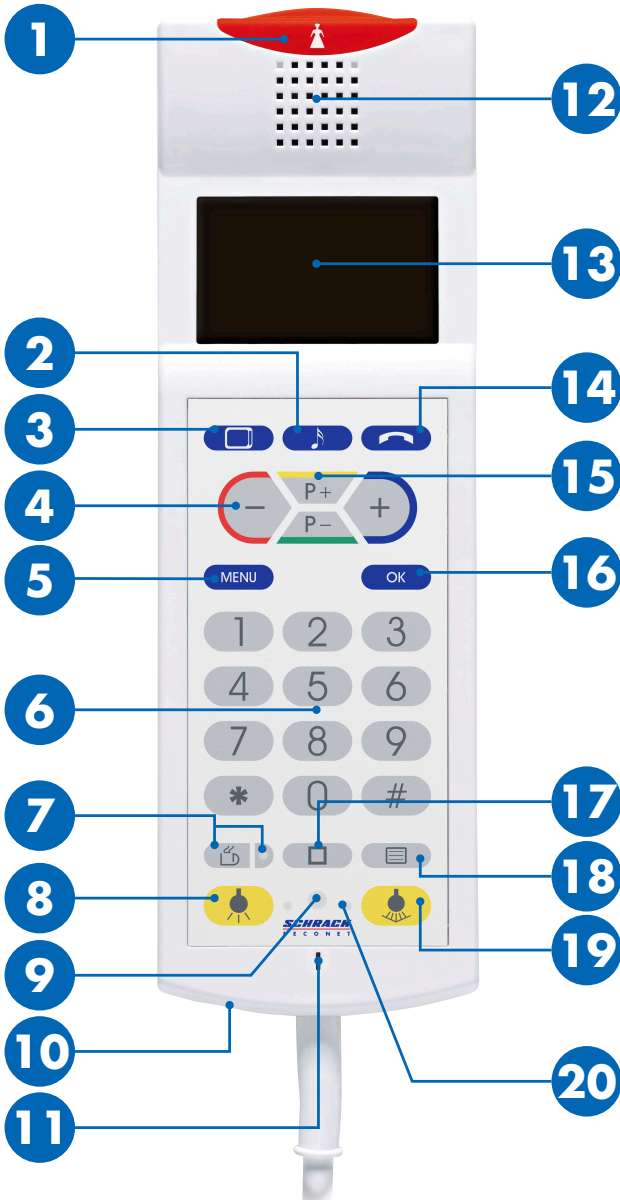

1	Çaęrı butonu
2	Radyo butonu
3	TV butonu
4	-/+ butonu
5	Menü butonu
6	Sayısal tuş takımı
7	LED'li servis çağrı butonu
8	Oda lambası
9	Kızılötesi alıcı (opsiyonel)
10	Kulaklık bağlantısı
11	Mikrofon
12	Hoparlör
13	Ekran
14	Telefon butonu
15	Program seçim butonları
16	Onay butonu
17	Özel fonksiyon butonu
18	Teletext butonu
19	Okuma lambası
20	LED'li lamba butonu




DİKKAT

Kalkmaya yardım için kullanmayın


Kablo ve cihaz kalkmaya yardımcı değildir. Cihazı kullanarak kendinizi yukarı kaldırmayın.

Bakım personeli çağırısı


Çağrı butonu  1 sürekli yanar, böylece karanlıkta yeri daha kolay bulunur.

Bakım personelinin arama

Butona  1 basılır.


► Çağrı butonu  1 yanar.

Bakım personel çağrı cevabı

1. Hoparlörden gong sesi duyulur  12 ve çağrı butonu yanıp söner.
2. Hasta el seti bakım personeli ile konuşmak için telefon gibi kullanılır.
3. Bakım personeli görüşmenin sonunda aramayı sonlandırır.

Servis çağırısı


Buton LED'i sürekli yanar, böylece karanlıkta yeri daha kolay bulunur.

Çağrı butonuna  7 basılır.


► Servis çağrı buton LED'i  7 yanar.

Servis personeli hastayı ya arayacak yada bizzat yanına gidecektir.

Aydınlatma açma ve kapatma

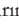Aydınlatma butonlarının LED'i  20 sürekli yanar, böylece karanlıkta butonlar daha kolay bulunur.

Oda lambası (opsiyonel)

Oda lambası butonuna  8 kısa basılır.

► Oda lambası açılır veya kapanır.







Okuma lambası (opsiyonel)

Okuma lambası butonuna  19 kısa basılır.







► Okuma lambası açılır veya kapanır.

Menü fonksiyonları








Ekran parlaklık ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+ / P-**  15 kullanılarak **Parlaklık** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. **- / +** butonları  4 kullanılarak istenilen parlaklık ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.







Ekran kontrast ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+ / P-**  15 kullanılarak **Kontrast** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. **- / +** butonları  4 kullanılarak istenilen kontrast ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Ses ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+ / P-**  15 kullanılarak **Ses** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. Program seçim butonları **P+ / P-**  15 kullanılarak hangi ses seviyesinin ayarlanacağı seçilir.
5. **- / +** butonları  4 kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.
6. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Zil sesi ayarı

1. **MENU**  5 butonuna basılır.
2. Program seçim butonları **P+ / P-**  15 kullanılarak **Zil sesi** ekran  13 üzerinden seçilir.
3. **OK**  16 butonu ile onaylanır.
4. Program seçim butonları **P+ / P-**  15 kullanılarak istenilen zil sesi ayarlanır.
5. Menüden çıkmak için **MENU**  5 menü butonu kullanılır.

Opsiyonel fonksiyonlar

TV

TV setini açma ve kapatma

TV setini açmak veya kapatmak için TV butonuna  **3** basılır.

- ▶ TV seti açılır ve izlenen son kanal ekranda **13** gösterilir.

Kanal seçimi


Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak kanal numarası girilir veya program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak sonraki kanala geçilir.

Ses ve ses seviyesi ayarı

Ses çıkışı hoparlör **12** veya bağlı kulaklıklardan (bağlantı soketi **10**) sağlanır.


-/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.

Teletekst

1. Teletekst modunu getirmek veya çıkmak için teletekst butonuna  **18** basılır.
2. Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak sayfa numarası girilir veya program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak sonraki sayfaya geçilir.

Radyo

Radyo açma ve kapatma

Radyoyu açmak veya kapatmak için Radyo butonuna  **2** basılır.

- ▶ Radyo açılır ve dinlenen son kanal ekranda **13** gösterilir.

Kanal seçimi

Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak kanal numarası girilir veya program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak sonraki kanala geçilir.



Ses ve ses seviyesi ayarı

Ses çıkışı hoparlör **12** veya bağlı kulaklıklardan (bağlantı soketi **10**) sağlanır.



-/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.

Telefon



Bir aramayı cevaplama

1. Telefon butonu  **14** kullanılarak gelen bir arama cevaplanır.
2. -/+ butonları **4** kullanılarak istenilen ses seviyesi ayarlanır.
3. Görüşmeden sonra aramayı sonlandırmak için telefon butonuna  **14** basılır.


Bir telefon görüşmesi yapma

1. Telefon butonuna  **14** basılır.
2. Harici telefon aramaları için sayısal tuşa basılır (Genellikle 0 kullanılır, personel ile kontrol edilmelidir).
3. Sayısal tuş takımı **6** kullanılarak istenilen telefon numarası aranır.
4. **OK** **16** butonu ile onaylanır.
5. Görüşmeden sonra aramayı sonlandırmak için telefon butonuna  **14** basılır.

Son numarayı tekrar arama

1. Telefon butonuna  **14** basılır.
2. Aranan son on telefon numarası ekranda **13** gösterilir.
3. -/+ butonları **4** kullanılarak istenilen numara seçilir.
4. **OK** **16** butonu ile onaylanır.
5. Görüşmeden sonra aramayı sonlandırmak için telefon butonuna  **14** basılır.

Panjur kontrol

1. Özel fonksiyon butonuna  **17** basılır.
2. Program seçim butonları **P+/P-** **15** kullanılarak **Pan jur** ekran **13** üzerinden seçilir.
3. -/+ butonları **4** kullanılarak panjur açılır yada kapanır.

Kızılötesi alıcı

Kızılötesi alıcı, hasta el setini çevredeki kontrol cihazları aracılığıyla uzaktan kontrol etmek için kullanılır.



TR

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T