




Terminalul de pat PAT-E

Manual de utilizare

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Prezentare generală

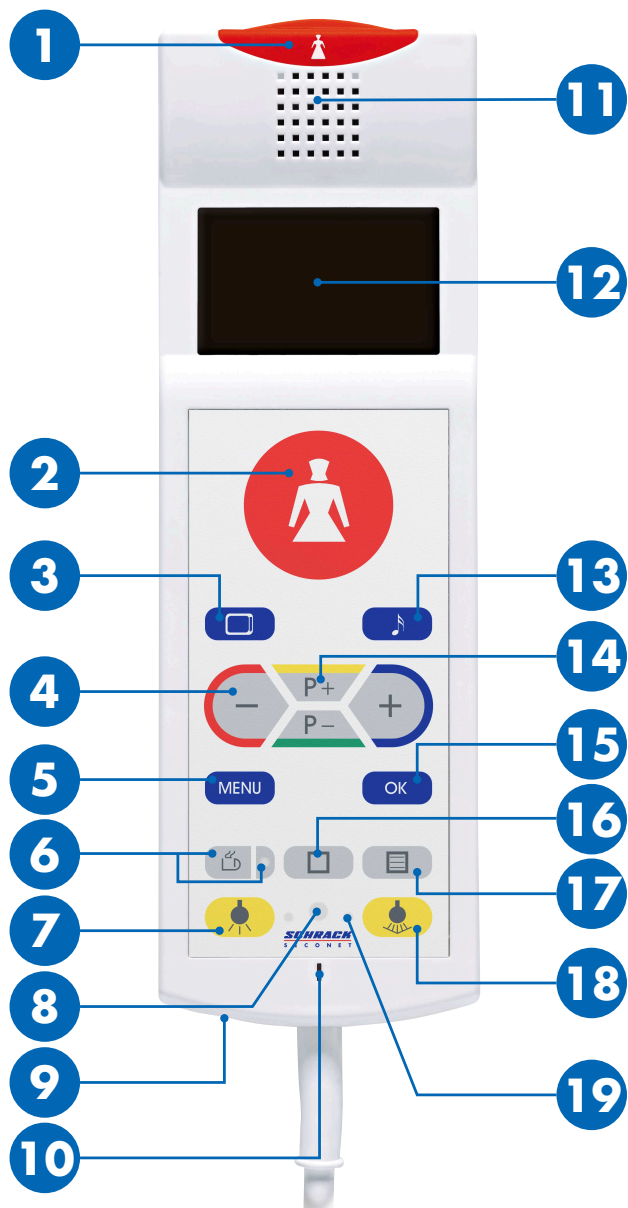

1 / 2	Butoane apelare asistentă
3	Buton TV
4	Butoane -/+
5	Buton meniu
6	Buton apel servicii și led de veghe
7	Lumina din cameră
8	Receptor infraroșu (opțional)
9	Mufă căști
10	Microfon
11	Difuzor
12	Ecran
13	Buton radio
14	Butoane pentru selecția postului
15	Buton confirmare
16	Buton funcție specială
17	Buton teletext
18	Lumina de la pat
19	Ledurile butoanelor pentru lumină (leduri de veghe)



PRECAUȚIE

Nu folosiți drept ajutor la ridicat

Cablul și dispozitivul nu sunt ajutoare pentru ridicat. Nu vă ridicați trăgând de dispozitiv.

Apelul pentru personalul de îngrijire

Butonul de apelare  1 este permanent aprins, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Apelarea personalului de îngrijire

Apăsați butonul de apelare  1 sau 2.

► Butonul de apelare  1 se aprinde.

Personalul de îngrijire răspunde

1. Un sunet de gong se aude în difuzor 11 iar butonul de apelare se aprinde intermitent.
2. Folosiți terminalul de pat precum un telefon pentru a discuta cu personalul de îngrijire.
3. Personalul de îngrijire va încheia apelul la terminarea convorbirii.

Apelul pentru servicii

Ledul butonului este aprins permanent, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Apăsați butonul pentru servicii  6.


► Ledul butonului pentru servicii  6 se aprinde.

Un membru al personalului pentru servicii fie vă va contacta printr-un apel vocal, fie se va deplasa în persoană la Dvs.

Aprinderea și stingerea luminilor


Ledurile butoanelor pentru lumină 19 sunt permanent aprinse, astfel că butoanele sunt mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Lumina din cameră (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina din cameră  7.

► Lumina din cameră se aprinde ori se stinge.

Lumina de la pat (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina de la pat  18.

► Lumina de la pat se aprinde ori se stinge.

Funcțiile meniului

Luminozitatea ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Luminozitate** de pe ecran 12 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.
3. Confirmați cu butonul **OK** 15.
4. Alegeți luminozitatea dorită folosind butoanele **- / +** 4.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

Contrastul ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Contrast** de pe ecran 12 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.
3. Confirmați cu butonul **OK** 15.
4. Alegeți contrastul dorit folosind butoanele **- / +** 4.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

Volumul sonor

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Volum sonor** de pe ecran 12 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.
3. Confirmați cu butonul **OK** 15.
4. Alegeți funcția pentru care veți configura volumul sonor folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.
5. Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **- / +** 4.
6. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

Funcționalități opționale

Televizorul

Pornirea și oprirea televizorului

Apăsați butonul TV  3 pentru a porni sau a opri televizorul.

- ▶ Televizorul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post urmărit 12.

Alegerea unui post


Schimbați canalul folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.

Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor 11 sau căști (mufă jack 9).

Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **- / +** 4.

Accesarea teletextului

1. Apăsați butonul  17 pentru a accesa sau a ieși din modul teletext.
2. Schimbați pagina folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.

Radioul

Pornirea și oprirea radioului

Apăsați butonul radio  13 pentru a porni sau a opri radioul.

- ▶ Radioul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post ascultat 12.

Alegerea unui post


Schimbați canalul folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.

Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor 11 sau căști (mufă jack 9).

Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **- / +** 4.

Controlul jaluzelelor

1. Apăsați butonul pentru funcții speciale  16.
2. Alegeți **Jaluzele** de pe ecran 12 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 14.
3. Deschideți sau închideți jaluzelele folosind butoanele **- / +** 4.

Receptorul infraroșu

Receptorul infraroșu este folosit pentru controlul terminalului de pat prin comenzi de la dispozitivele ajutoare de control.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

RO

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET