



Терминал пациента PAT

Руководство пользователя

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

1	Кнопка вызова
2	Кнопка управления радио
3	Кнопка TV
4	Кнопка -/+
5	Кнопка меню
6	Цифровая клавиатура
7	Кнопка сервисного вызова с индикатором (поисковый свет)
8	Комнатный свет
9	Инфракрасный приемник (опционально)
10	Разъем подключения наушников
11	Микрофон
12	Громкоговоритель
13	Дисплей
14	Кнопка телефона
15	Кнопки выбора программы
16	Кнопка подтверждения
17	Кнопка специальной функции
18	Кнопка телетекста
19	Свет для чтения
20	Индикатор кнопки управления светом (поисковый свет)




ВНИМАНИЕ


Не использовать в качестве приспособления для вставания

Кабель и устройство не являются частью приспособления для вставания. Не пытайтесь вставать с помощью этого устройства.

Обзор

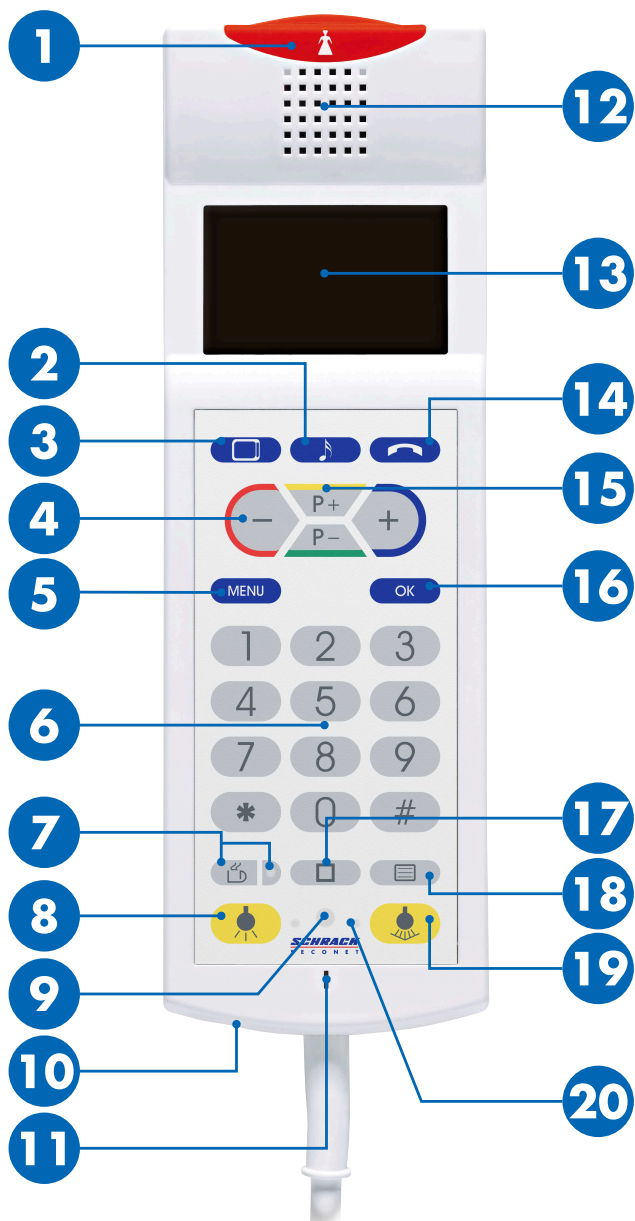

Вызов медицинского персонала


Кнопка вызова  1 постоянно слабо светится. Это позволяет легко найти кнопку даже в темноте.

Вызов медицинского персонала

Нажать кнопку  1.

▶ Кнопка вызова  1 ярко светится.


Ответ медицинского персонала

1. В громкоговорителе звучит сигнал гонга  12 и кнопка вызова мигает.
2. Для речевого соединения с медперсоналом используйте терминал как телефонную трубку.
3. При завершении разговора медперсонал закрывает речевое соединение.

Сервисный вызов


Индикатор возле кнопки постоянно слабо светится, что позволяет найти кнопку даже в темноте.

Нажать кнопку сервисного вызова  7.

▶ Индикатор возле кнопки  7 ярко светится.

Сервисный персонал либо позвонит вам на устройство, либо придет к вам лично.

Включение и выключение света

Индикаторы возле кнопок управления светом  20 постоянно слабо светятся. Это позволяет легко найти кнопки даже в темноте.

Комнатный свет (опционально)

Кратковременно нажать на кнопку  8.

▶ Свет в комнате либо включится, либо выключится.







Свет для чтения (опционально)

Кратковременно нажать на кнопку  19.







▶ Свет для чтения либо включится, либо выключится.

Функции меню






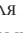

Установка яркости дисплея

1. Нажать кнопку **MENU**  5.
2. Используя на дисплее  13 кнопки выбора программы **P+ / P-**  15, выбрать **Brightness**.
3. Подтвердить выбор кнопкой **OK**  16.
4. Используя кнопки **- / +**  4, установить требуемую яркость.
5. Покинуть меню, используя кнопку **MENU**  5.







Установка контрастности дисплея

1. Нажать кнопку **MENU**  5.
2. Используя на дисплее  13 кнопки выбора программы **P+ / P-**  15, выбрать **Contrast**.
3. Подтвердить выбор кнопкой **OK**  16.
4. Используя кнопки **- / +**  4, установить требуемую контрастность.
5. Покинуть меню, используя кнопку **MENU**  5.

Установка громкости

1. Нажать кнопку **MENU**  5.
2. Используя на дисплее  13 кнопки выбора программы **P+ / P-**  15, выбрать **Volume**.
3. Подтвердить выбор кнопкой **OK**  16.
4. С помощью кнопок выбора программы выберите **P+ / P-**  15, для какой функции следует установить громкость звука.
5. Используя кнопки **- / +**  4, установить требуемую громкость.
6. Покинуть меню, используя кнопку **MENU**  5.


Установка рингтона

1. Нажать кнопку **MENU**  5.
2. Используя на дисплее  13 кнопки выбора программы **P+ / P-**  15, выбрать **Ring tones**.
3. Подтвердить выбор кнопкой **OK**  16.
4. Используя кнопки выбора программы **P+ / P-**  15 установить требуемый рингтон.
5. Покинуть меню, используя кнопку **MENU**  5.

Опциональные функции

TV

Включение и выключение телевизора

Для включения или выключения телевизора однократно нажать на кнопку TV  3.

- ▶ Телевизор включится и номер последнего просматриваемого канала будет отображаться на дисплее 13.

Выбор канала

Выберите номер канала, используя цифровую клавиатуру 6 или кнопки выбора программы **P+ / P-** 15.

Источник звука и его громкость

Источником звука является громкоговоритель 12 или подключенные наушники (разъем 10).


Используя кнопки **- / +** 4, установить требуемую громкость.

Вызов телетекста

1. Для вызова телетекста или выхода из этого режима необходимо однократно нажать кнопку телетекста  18.
2. Используя цифровую клавиатуру 6, введите номер страницы или переключитесь на следующую страницу при помощи кнопок выбора программ **P+ / P-** 15.

Радио

Включение и выключение радио

Для включения/выключения радиотрансляции необходимо однократно нажать кнопку  2.

- ▶ Радио включается на прослушивание последнего выбранного канала, информация о котором отображается на дисплее 13.

Выбор канала

Выберите номер канала, используя цифровую клавиатуру 6 или кнопки выбора программы **P+ / P-** 15.



Источник звука и его громкость

Источником звука является громкоговоритель 12 или подключенные наушники (разъем 10).



Используя кнопки **- / +** 4, установить требуемую громкость.

Телефон



Принятие вызова

1. Принять вызов, используя кнопку телефона  14.
2. Используя кнопки **- / +** 4, установить требуемую громкость.
3. После завершения разговора нажмите кнопку телефона  14.


Телефонный вызов

1. Нажать кнопку телефона  14.
2. Нажать цифровую кнопку для переключения на общественную линию (обычно «0», пожалуйста, уточните у персонала).
3. Используя цифровую клавиатуру 6, наберите требуемый номер.
4. Подтвердить выбор кнопкой **OK** 16.
5. После завершения разговора нажмите кнопку телефона  14.

Повторный набор номера

1. Нажать кнопку телефона  14.
2. На дисплее 13 отобразятся десять последних набранных номеров.
3. Используя кнопки **- / +** 4, выбрать требуемый номер.
4. Подтвердить выбор кнопкой **OK** 16.
5. После завершения разговора нажмите кнопку телефона  14.

Управление шторами

1. Нажать на кнопку специальных функций  17.
2. Используя на дисплее 13 кнопки выбора программы **P+ / P-** 15, выбрать **Blinds**.
3. Для открытия и закрытия штор используются кнопки **- / +** 4.

Инфракрасный приемник

Инфракрасный приемник используется для удаленного управления терминалом пациента с внешних устройств, оснащенных этим интерфейсом.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

RU

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET