




# Pasientterminal PAT

## Bruksanvisning

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Oversikt

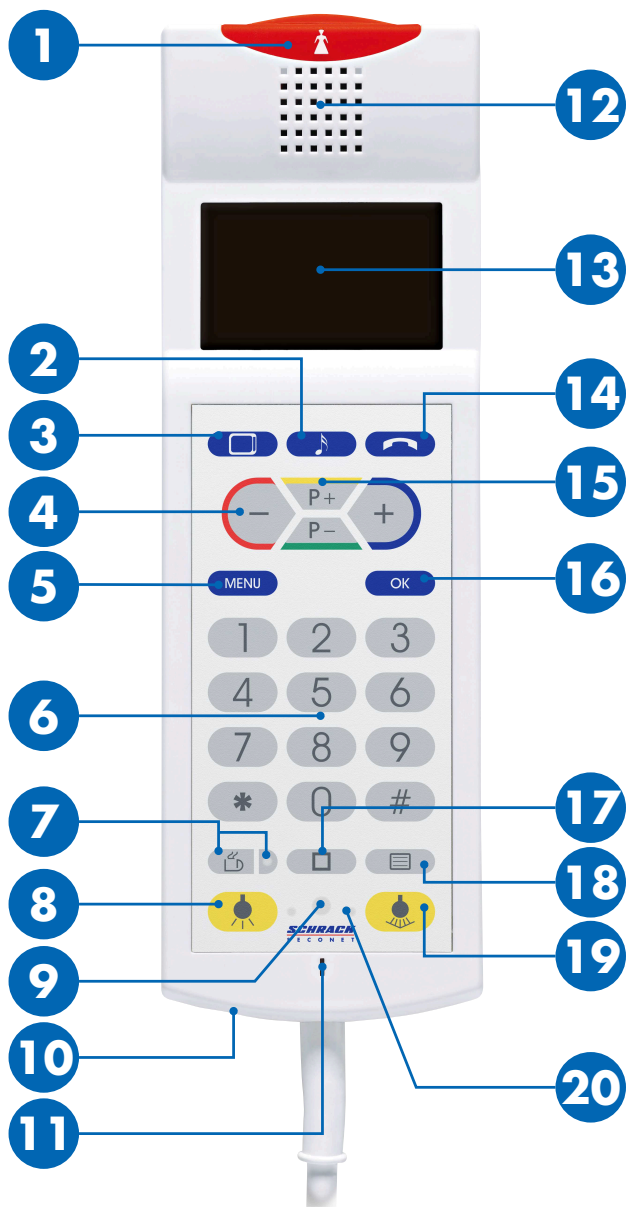

1	Tilkallingsknapp
2	Radio-knapp
3	TV-knapp
4	-/+knapp
5	Meny-knapp
6	Talltastatur
7	Tilkalle service-knapp med LED-lys (søkelys)
8	Romlys
9	Infrarød mottaker (valgfri)
10	Hodetelefonuttak
11	Mikrofon
12	Høyttaler
13	Display
14	Telefon-knapp
15	Programvalg-knapper
16	Bekreftelsesknapp
17	Spesialfunksjon-knapp
18	Tekst-TV-knapp
19	Leselys
20	LED på lysknapp (søkelys)



#### **FORSIKTIG**

#### **Ikke bruk som hjelp til å reise seg opp**

Ledning og apparat er ikke hjelp til å reise seg opp. Ikke dra deg selv opp ved bruk av apparatet.

## Tilkalling av omsorgspersonell

Tilkallingsknappen  1 lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### Tilkall omsorgspersonell

Trykk på knappen  1.


► Tilkallingsknappen  1 lyser opp.

### Svar fra omsorgspersonell

1. Pling-lyd over høyttaleren 12 og tilkallingsknappen blinker.
2. Bruk pasientterminalen som en telefon for å snakke med omsorgspersonellet.
3. Omsorgspersonellet avslutter samtalen når denne er ferdig.

## Tilkall service

LED-lyset på lysknappene lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Trykk på knappen for å tilkalle service  7.

► Knappen for å tilkalle service  7 lyser opp.

Servicepersonalet vil enten ringe deg opp på apparatet eller komme til deg personlig.

## Skru lyset av og på

LED-lyset på lysknappene 20 lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### Romlys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for romlys  8.

► Romlyset skrur på eller av.

### Leselys (valgfritt)

Trykk raskt på knappen for leselys  19.

► Leselyset skrur på eller av.

## Menyfunksjoner

### Sette lysstyrke på display

1. Trykk på knappen **MENY** 5.
2. Velg **Lysstyrke** på displayet 13 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 15.
3. Bekreft med **OK**-knappen 16.
4. Still inn den ønskede lysstyrken med **- / +** knappene 4.
5. Bruk meny-knappen **MENY** 5 for å forlate menyen.

### Sette kontrast på display

1. Trykk på knappen **MENY** 5.
2. Velg **Kontrast** på displayet 13 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 15.
3. Bekreft med **OK**-knappen 16.
4. Still inn den ønskede kontrasten med **- / +** knappene 4.
5. Bruk meny-knappen **MENY** 5 for å forlate menyen.

### Sette lydstyrke

1. Trykk på knappen **MENY** 5.
2. Velg **Lydstyrke** på displayet 13 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 15.
3. Bekreft med **OK**-knappen 16.
4. Velg funksjonen lydstyrken skal stilles for ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 15.
5. Still inn den ønskede lydstyrken med **- / +** knappene 4.
6. Bruk meny-knappen **MENY** 5 for å forlate menyen.

### Sette ringetone

1. Trykk på knappen **MENY** 5.
2. Velg **Ringetoner** på displayet 13 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 15.
3. Bekreft med **OK**-knappen 16.
4. Velg ønsket ringetone ved å bruke programvalg-knappene **P+ / P-** 15.
5. Bruk meny-knappen **MENY** 5 for å forlate menyen.

# Valgfrie funksjoner

## TV

### Skru TV-en på og av

Trykk på TV-knappen  3 for å skru TV-en av eller på.

- ▶ TV-en er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet 13.

### Velg kanal


Tast inn nummeret på kanalen på talltastaturet 6 eller bytt til neste kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+ / P-** 15.

### Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler 12 eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak 10).


Still inn den ønskede lydstyrken med **- / +** knappene 4.

### Sette på tekst-TV

1. Trykk knappen for tekst-TV  18 for å gå inn eller ut av tekst-TV.
2. Tast inn nummeret på siden på talltastaturet 6 eller gå til neste side ved å bruke programvalg-knappene **P+ / P-** 15.

## Radio

### Skru radio av og på

Trykk på radio-knappen  2 for å skru radioen av eller på.

- ▶ Radioen er skrudd på og kanalen som sist var i bruk vil vises på displayet 13.

### Velg kanal

Tast inn nummeret på kanalen på talltastaturet 6 eller bytt til neste kanal ved å bruke programvalg-knappene **P+ / P-** 15.



### Stille inn lyd og lydstyrke

Lydutgang på høyttaler 12 eller tilkoblede høretelefoner (tilkoblingsuttak 10).



Still inn den ønskede lydstyrken med **- / +** knappene 4.

## Telefon



### Ta imot en samtale

1. Ta imot en innkommende samtale med telefon-knappen  14.
2. Still inn den ønskede lydstyrken med **- / +** knappene 4.
3. Trykk på telefon-knappen  14 for å avslutte en samtale.


### Gjøre en telefonoppringning

1. Trykk på telefon-knappen  14.
2. Trykk på talltastaturet for å få linje ut (vanligvis 0, forhør deg med de ansatte).
3. Ring til det nummeret du ønsker ved bruk av talltastaturet 6.
4. Bekreft med **OK**-knappen 16.
5. Trykk på telefon-knappen  14 for å avslutte en samtale.

### Ring siste nummer

1. Trykk på telefon-knappen  14.
2. Det ti siste oppringte numre vises på displayet 13.
3. Velg det ønskede nummeret ved bruk av **- / +** knappene 4.
4. Bekreft med **OK**-knappen 16.
5. Trykk på telefon-knappen  14 for å avslutte en samtale.

### Kontroll av persiennene

1. Trykk spesialfunksjon-knappen  17.
2. Velg **Persienn** på displayet 13 ved bruk av programvalg-knappene **P+ / P-** 15.
3. Åpne eller lukke persiennene med **- / +** knappene 4.

### Infrarød mottaker

Den infrarøde mottakeren bruker for å fjernstyre pasientterminalen gjennom miljøkontrollenheter.



NO

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T