




Patiententerminal PAT

Bedienungsanleitung


HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET

Übersicht

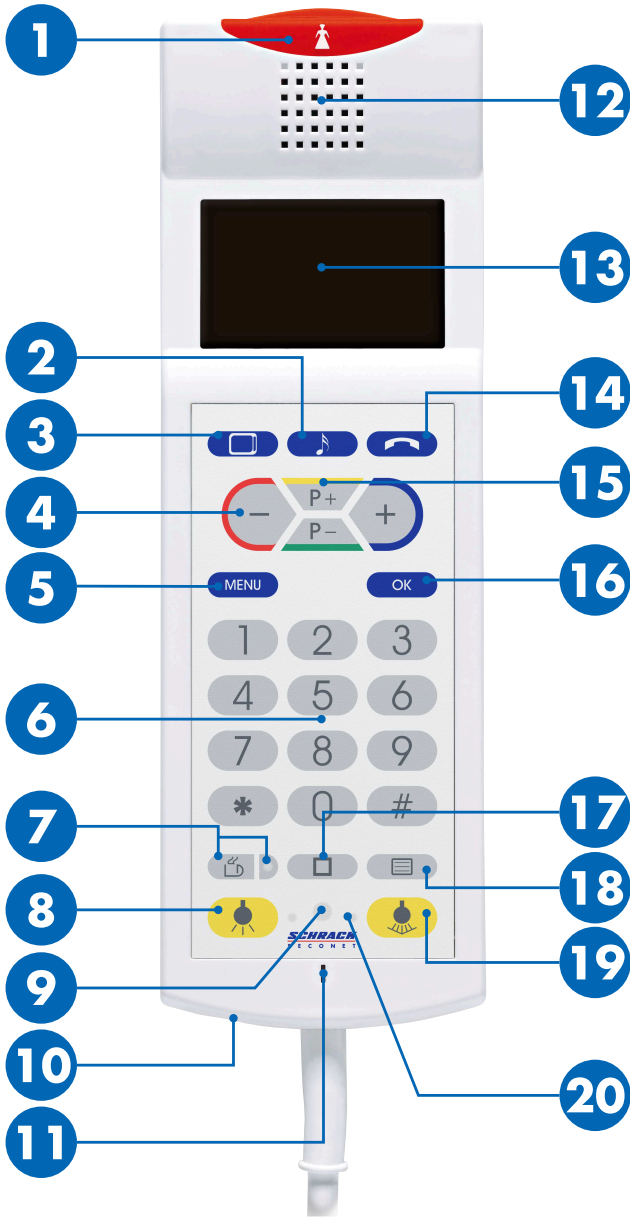

Pflegepersonalruf


Die Ruftaste  1 glimmt ständig, damit sie in der Dunkelheit leichter aufzufinden ist.

Pflegepersonal rufen

Ruftaste  1 drücken.

► Die Ruftaste  1 leuchtet auf.


Pflegepersonal antwortet

1. Im Lautsprecher  12 ertönt ein Gong und die Ruftaste blinkt.
2. Das Patiententerminal wie ein Telefon für das Gespräch mit dem Pflegepersonal verwenden.
3. Das Pflegepersonal trennt die Verbindung am Gesprächsende.

Serviceeruf

Die LED der Taste glimmt ständig, damit sie in der Dunkelheit leichter aufzufinden ist.

Serviceeruftaste  7 drücken.

► LED der Serviceeruftaste  7 leuchtet.

Das Servicepersonal meldet sich am Gerät oder kommt persönlich.

Licht ein- und ausschalten

Die LED der Lichttasten  20 glimmen ständig, damit die Tasten in der Dunkelheit leichter aufzufinden sind.

Raumlicht (optional)

Raumlichttaste  8 kurz drücken.

► Das Raumlicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.







Leselicht (optional)

Leselichttaste  19 kurz drücken.







► Das Leselicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Menüfunktionen








Helligkeit des Displays einstellen

1. Menütaste **MENU**  5 drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-**  15 den Menüpunkt **Helligkeit** im Display  13 wählen.
3. Mit der **OK**-Taste  16 bestätigen.
4. Mit den **- / +**-Tasten  4 die gewünschte Helligkeit einstellen.
5. Mit der Menütaste **MENU**  5 die Menüfunktion verlassen.



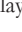



Kontrast des Displays einstellen

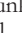1. Menütaste **MENU**  5 drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-**  15 den Menüpunkt **Kontrast** im Display  13 wählen.
3. Mit der **OK**-Taste  16 bestätigen.
4. Mit den **- / +**-Tasten  4 den gewünschten Kontrast einstellen.
5. Mit der Menütaste **MENU**  5 die Menüfunktion verlassen.

Lautstärke einstellen

1. Menütaste **MENU**  5 drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-**  15 den Menüpunkt **Lautstärke** im Display  13 wählen.
3. Mit der **OK**-Taste  16 bestätigen.
4. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-**  15 wählen, für welche Funktion die Lautstärke eingestellt werden soll.
5. Mit den **- / +**-Tasten  4 die gewünschte Lautstärke einstellen.
6. Mit der Menütaste **MENU**  5 die Menüfunktion verlassen.

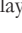Klingelton einstellen

1. Menütaste **MENU**  5 drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-**  15 den Menüpunkt **Klingeltöne** im Display  13 wählen.
3. Mit der **OK**-Taste  16 bestätigen.
4. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-**  15 den gewünschten Klingelton wählen.
5. Mit der Menütaste **MENU**  5 die Menüfunktion verlassen.

Optionale Funktionen

TV

TV-Gerät ein- und ausschalten

TV-Taste  **3** drücken, um das TV-Gerät ein- oder auszuschalten.

- ▶ Das TV-Gerät wird eingeschaltet und der zuletzt gesehene Kanal wird am Display **13** angezeigt.

Kanal wählen


Mit dem Zifferwahlblock **6** eine Kanalnummer eingeben oder mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **15** zum nächsten Kanal wechseln.

Ton und Lautstärke einstellen

Ausgabe des Tons über den Lautsprecher **12** oder über einen angeschlossenen Kopfhörer (Anschlussbuchse **10**).

Mit den **- / +**-Tasten **4** die Lautstärke einstellen.

Videotext aufrufen

1. Videotexttaste  **18** drücken, um den Videotext aufzurufen oder zu verlassen.
2. Mit dem Zifferwahlblock **6** eine Seitennummer eingeben oder mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **15** zur nächsten Seite wechseln.

Radio

Radio ein- und ausschalten

Radiotaste  **2** drücken, um das Radio ein- oder auszuschalten.

- ▶ Das Radio wird eingeschaltet und der zuletzt gehörte Radiokanal wird am Display **13** angezeigt.

Kanal wählen

Mit dem Zifferwahlblock **6** eine Kanalnummer eingeben oder mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **15** zum nächsten Kanal wechseln.



Ton und Lautstärke einstellen

Ausgabe des Tons über den Lautsprecher **12** oder über einen angeschlossenen Kopfhörer (Anschlussbuchse **10**).



Mit den **- / +**-Tasten **4** die Lautstärke einstellen.

Telefon



Gespräch annehmen

1. Mit der Telefontaste  **14** ein eingehendes Gespräch entgegen nehmen.
2. Mit den **- / +**-Tasten **4** die Lautstärke einstellen.
3. Am Ende des Gesprächs mit der Telefontaste  **14** das Gespräch beenden.


Gesprächspartner anrufen

1. Telefontaste  **14** drücken.
2. Zifferntaste für Amtsleitung/öffentliches Telefonnetz drücken (meistens 0; bitte Personal fragen).
3. Mit den Zifferntasten **6** die gewünschte Telefonnummer wählen.
4. Mit der **OK**-Taste **16** bestätigen.
5. Am Ende des Gesprächs mit der Telefontaste  **14** das Gespräch beenden.

Wahlwiederholung

1. Telefontaste  **14** drücken.
2. Im Display **13** werden die letzten zehn Telefonnummern angezeigt.
3. Mit den **- / +**-Tasten **4** die gewünschte Nummer auswählen.
4. Mit der **OK**-Taste **16** bestätigen.
5. Am Ende des Gesprächs mit der Telefontaste  **14** das Gespräch beenden.

Jalousiesteuerung

1. Sonderfunktionstaste  **17** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **15** den Menüpunkt **Jalousie** im Display **13** wählen.
3. Mit den **- / +**-Tasten **4** die Jalousien öffnen oder schließen.

Infrarotempfänger

Über den Infraroteingang kann das Patiententerminal von einem Umfeldsteuergerät ferngesteuert werden.

1	Ruftaste
2	Radiotaste
3	TV-Taste
4	-/+Tasten
5	Menütaste
6	Ziffernwahlblock
7	Service ruftaste mit LED (Findelicht)
8	Raumlicht
9	Infrarotempfänger (optional)
10	Kopfhöreranschluss
11	Mikrofon
12	Lautsprecher
13	Display
14	Telefontaste
15	Programmwahl-tasten
16	Bestätigungstaste (OK-Taste)
17	Sonderfunktionstaste
18	Videotexttaste
19	Leselicht
20	LED der Licht-tasten (Findelicht)



VORSICHT

Nicht als Aufrichthilfe verwenden

Kabel und Gerät sind keine Aufrichthilfe. Ziehen Sie sich nicht an dem Gerät hoch, um sich aufzurichten.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Wien
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

DE

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET