



VISOCALL IP. Terminal za osoblje ST-TOUCH.

Kratke upute.

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET



(1) Opće informacije

Korisničkim sučeljem se upravlja putem dodirnog ekrana. Navigacija se ostvaruje pomoću softvera za terminal za osoblje uz korištenje izbornika koje otvarate dodirivanjem ikona i tipki. Klizite prstima prema gore ili dolje na ekranu za pomicanje kroz sadržaj popisa s više od 6 stavki. Prijedite prstom uljevo ili udesno po ekranu za pomicanje kroz sadržaj izbornika za pojedine funkcije. Bijela traka za pomicanje pojavljuje se na desnoj strani ili na donjem rubu ekrana, ovisno o primjeni.

Dodirnite odgovarajuću ikonu kako bi ju otvorili ili pokrenuli objašnjenje različitih kartica i pod-izbornika. Ovo se odnosni na traku s karticama i funkcijsko područje.

Dvostruko dodirivanje iste kartice s popisom otvara popis sobe.

S gore navedenog popisa ili podizbornika izlazite dodirivanjem ikone na stavki popisa i u funkcijskim izbornicima.

Kratke upute za upotrebu VISOCALL-IP terminala za osoblje namijenjene su da služe kao referentni priručnik koji će vam pružiti podršku te prepostavlja da imate osnovna znanja koja su sadržana u **Uputa za upotrebu terminala za osoblje VISOCALL-IP (K-HB-023HR)**.

(2) Statusna traka



Manualno međupovezivanje odjela

Specifični odjel je manualno spojen s drugim.



Pasivno međupovezivanje odjela

Drugi odjel je spojen s određenim odjelom.



Lokalna centralizacija je aktivna

Odjel prikazuje isključivo pozive na terminalu za osoblje.



Globalna centralizacija je aktivna

Pozivi odjela mogu se zvučno reproducirati samo na središnjem upravljačkom panelu.



Servisna razina 1 ili 2

Ovaj status prikazuje se ako prebacite sa standardne razine 0 (nema prikaza) na razinu 1 ili 2.



(3) Kartica s popisom



Popis poziva

Sadrži sve pozive na cijelom području skrbi



Popis posjetnika

Sadrži sve sobe s postavljenim posjetnikom



Popis prisutnosti

Sadrži sve sobe s postavljena prisutnosti



Popis grešaka

Sadrži sve trenutne kvarove i greške na području skrbi kao i sustave treće strane

Stanja kartica s popisom:



Popis ne sadrži stavke i nije odabran.



Popis sadrži stavke i nije odabran.



Kartica s popisom je odabrana i kartica je otvorena.

(4) Prikaz poziva ikona

Moguće je prikazati sljedeće tipove pozivnih ikona:

	Poziv iz sobe		Dijagnostički poziv (nije ispitani)
	Hitan poziv iz sobe		Protupožarni alarm (nije ispitani)
	Poziv liječnika		DISO alarm (nije ispitani)
	Srčani alarm		DISO baterija - niska baterija (nije ispitani)
	WC-Poziv iz kupaonice (nije ispitani)		DISO manipulacija (nije ispitani)
	WC-Hitan poziv iz kupaonice (nije ispitani)		DISO opasnost (nije ispitani)
	Krevetni poziv		Dijagnostički prekid veze (nije ispitani)
	Krevetni hitni poziv		S krevetom povezan poziv isključenja
	Poziv osoblja		Opći događaj

(5) Ikone za prisutnost i pozive

Po stranici je moguće definirati do maks. 3 ikone (poziv ili prisutnost) i te ikone se mogu poredati proizvoljno (konfiguracija sustava).

- prisutnost definiranog osoblja (sestra, uslužno osoblje ili liječnik),
- pokretanje poziva s definicijom (poziv ili hitan poziv).

Funkcija poziva (poziv ili hitni poziv):
neaktivna/aktivna



sestra



liječnik



srčani alarm

Funkcija poziva:
neaktivna/aktivna



sestra



servisno osoblje



liječnik

(aktivna: kontinuirano svjetlo tijekom poziva,
bljeskajuće svjetlo tijekom hitnih poziva)

(6) Funkcijske ikone

U središnjem dijelu funkcijskog prostora nalaze se funkcijeske ikone koje je moguće raspodijeliti na nekoliko stranica prikaza ekrana (vidi kliznu traku). Prikaz funkcijskih ikona ovisi o dočnoj servisnoj razini.

	Međupovezivanje
	Aktiviranje lokalne centralizacije
	Opća obavijest
	Obavijest za liječnika
	Telefon
	Zvuk zvona
	Podešavanje vremena i datuma
	Promjena servisne razine
	Deaktiviranje lokalne centralizacije
	Obavijest za sestruru
	Obavijest za osoblje
	Radio
	Glasnoća
	Postavke ekrana
	Izlaz iz servisne razine

(7) Prikaz poziva

Čim se na odjelu pokrene poziv, ekran se mijenja automatski i otvara se popis poziva. Poziv se prikazuje s detaljima o sobi i broju kreveta te tipu poziva. Ako postoji nekoliko istovremenih poziva, poziv s najvećim prioritetom uvek se prikazuje na najvišoj poziciji.




(7.1) Ispitivanje poziva

Sljedeći prikaz prikazuje odabrano ispitivanje hitnog poziva iz kreveta.



Dodirivanje stavke popisa ispituje se poziv i otvara izbornik.

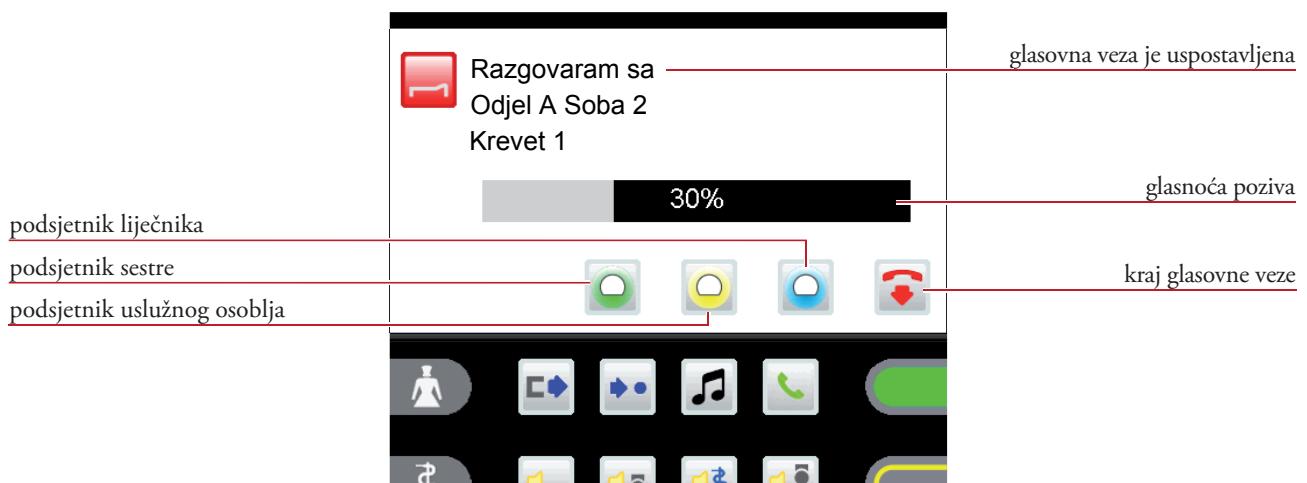

Glasovna veza

Glasovna veza se uspostavlja automatski dodirivanjem stavke popisa poziva.

Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću.

Dodirivanje ikone odmah prekida glasovnu vezu, a veza se automatski prekida nakon 2 minute.


Dodirivanje ikone , ili postavlja se podsjetnik za sestru, uslužno osoblje ili liječnika (vidi Poglavlje 7.2 - Podsjetnik).

Ispitivanje poziva bez zvučnika

Ako je razgovor nemoguć zbog perifernih uređaja (npr. poziv iz toaleta), ne možete odgovoriti na dočiščni poziv.



Dodirnite stavku popisa kako bi ispitali poziv iz toaleta. Izbornik je otvoren i čuje se signal upozorenja.

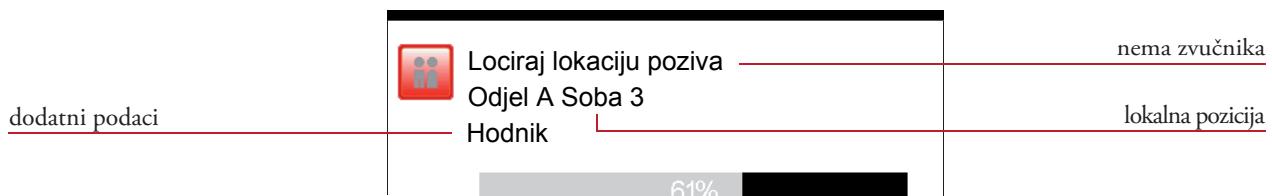

Ovaj poziv nije moguće potvrditi dodirivanjem ikone . Morate potražiti poziciju poziva i potvrditi poziv na lokaciji.

Podsjetnike je moguće postaviti za uslužno osoblje, sestre i liječnike.

(7.2) Podsjetnik

Podsjetnik omogućava identifikaciju soba nakon ispitivanja poziva ako nema odgovora od pozivatelja, prisutan je poziv bez glasovne veze, čuje se ton zauzeća, drugi pozivi se ispituju prije pretraživanja pozicije poziva ili selektivnog prijenosa poziva drugim osobama (sestri, uslužnom osoblju ili liječniku).

Dodirnite stavku na popisu poziva. Otvara se izbornik:

	za sestru	(indikacija statusa: bljeska zeleno)
	za uslužno osoblje	(indikacija statusa: bljeska žuto)
	za liječnika	(indikacija statusa: bljeska plavo)

Stavka popisa (aktualni poziv - npr. krevetni hitni poziv) uklanja se sa popisa poziva i prenosi na popis podsjetnika.

Podsjetnik se uvijek resetira preko odgovarajuće tipke za prisutnost u sobi pozivatelja!

Pozivi koji su stavljeni na čekanje preko podsjetnika i nisu resetirani preko odgovarajuće tipke prisutnosti (u sobi pozivatelja) automatski se regeneriraju nakon odgovarajućeg vremena i otvara se popis poziva.



(8.1) Pregled soba


Ponovno dodirnite već odabranu karticu s popisom na traci s karticama bilo da se radi o popisu poziva, podsjetnika, prisutnosti ili grešaka (npr. popis poziva).



Nakon otvaranja popisa soba (vidi Poglavlje 4.3.1) dodirnite odgovarajuću stavku na popisu.



Svi kreveti koji postoje u sobi prikazuju se na prikazu sobe. Prikazuju se sve značajke sobe koje možete primijeniti na ovu sobu.

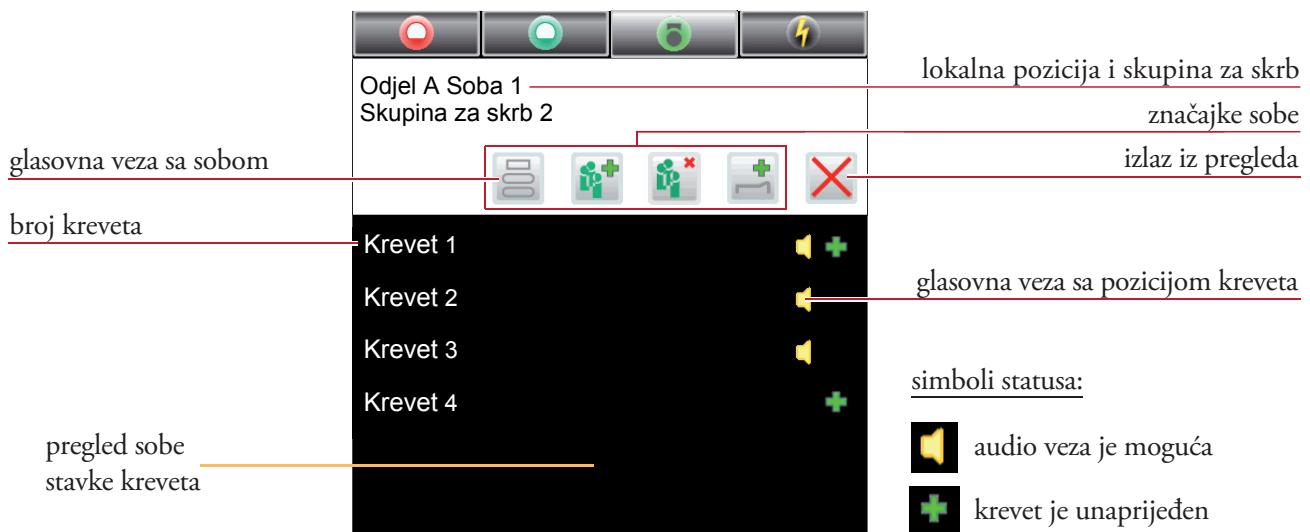

Glasovna veza s komunikacijskim terminalom uspostavlja se dodirivanjem ikone sobe . Za uspostavu glasovne veze izravno s pacijentom dodirnite broj kreveta.

(8.2) Značajke sobe

Sljedeće značajke mogu se izvršiti iz sobe:



Dodjela skupne za skrb



Unapređenje kreveta



Otkazivanje dodjele skupine za skrb



Glasovna veza sa sobom


(9) Međupovezivanje odjela

Ovo omogućava formiranje područja skrbi koja se sastoje od dva ili više odjela. Indikacija, prosljeđivanje poziva i opcija ispitivanja svakog poziva tada se proširuje u skladu s prioritetima postavljenima na svim odjelnim terminalima i komunikacijskim terminalima u ovom području.

(9.1) Međupovezivanje neaktivno


Dodirnite ikonu  u funkcijском području kako bi otvorili popis za međupovezivanje.

Ako i dalje nema aktivnog međupovezivanja između određenog odjela i drugog odjela, nudi se popis potencijalnih odjela s kojima se mogu povezati. Dodirivanje željenog odjela na popisu aktivira međupovezivanje odjela.

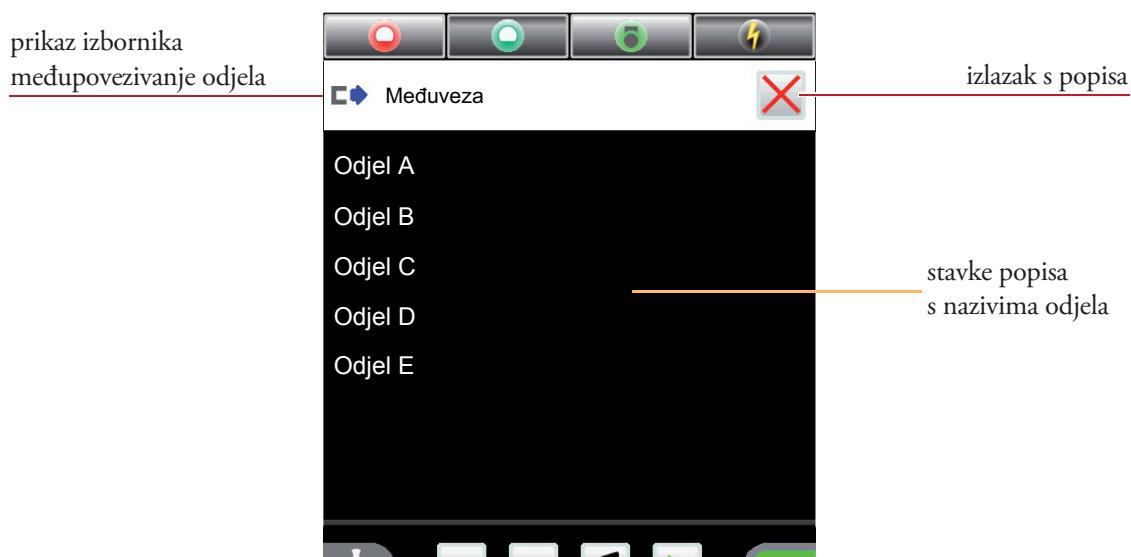

(9.2) Aktivno međupovezivanje

Dodirnite ikonu  u funkcijском području kako bi otvorili popis za međupovezivanje. Ako je određeni odjel već povezan s jednim odjelom, prikazuju se svi odjeli koji su u istoj skupini odjela.

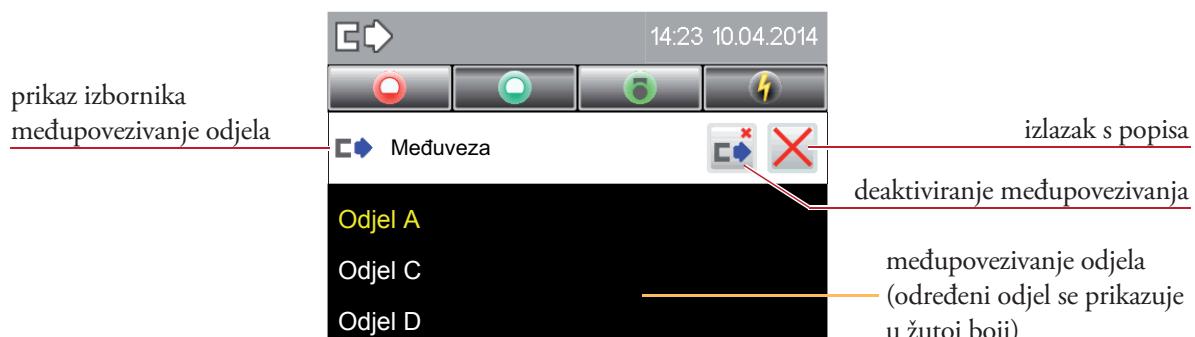

U ovom prikazu međupovezivanje odjela može se otkazati dodirivanjem ikone .

(10) Obavijesti



Obavijesti je moguće napraviti pomoću slušalice na kuki preko ugrađenog mikrofona ili preko same slušalice.



Opća obavijest

Obavijest svim sobama u području skrbi.



Obavijest za sestru

Obavijest za sve sobe na području skrbi u kojima je naznačena prisutnost sestre ili uslužnog osoblja.



Obavijest za liječnika


Obavijest za sve sobe na području skrbi u kojima je naznačena prisutnost liječnika.



Obavijest za osoblje

Obavijest za sve sobe na području skrbi u kojima je naznačena prisutnost sestre, uslužnog osoblja ili liječnika.

Dodirnite ikonu za objave u funkcijском području kako bi pokrenuli obavijest.

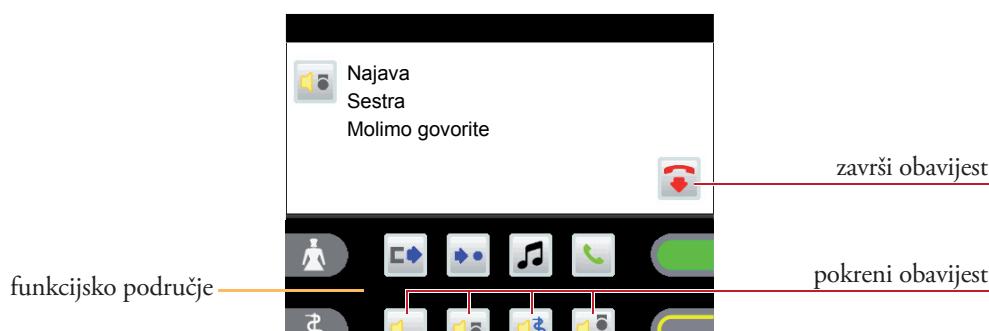


Obavijest je moguće prekinuti dodirivanjem ikone ili poklapanjem slušalice. Moguće je podešiti baznu glasnoću određenog zvučnika kod zaprimanja obavijesti.

(11.1) Telefon - Pozivanje



Dodirnite ikonu u funkcijском području kako bi otvorili izbornik. U aktivnom prostoru dodirnite ikone brojeva **0** - **9** kako bi odabrali odgovarajuće brojeve za pozivanje.

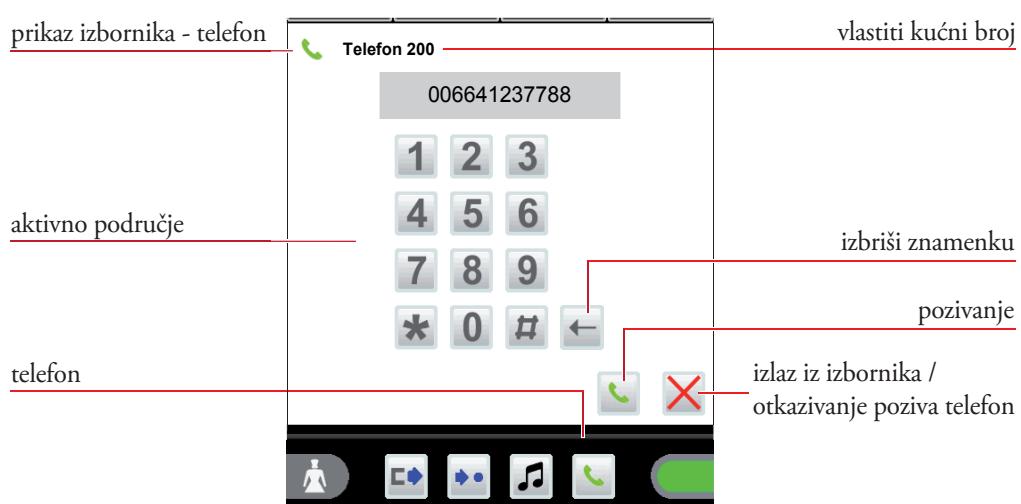


Dodirivanjem ikone potvrđuje se pozivni broj i uspostavlja se veza.



Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću.

(11.2) Odgovaranje na telefonski poziv

Tijekom telefonskog poziva broj i ime se prikazuju bez obzira na konfiguraciju telefonskog sustava.

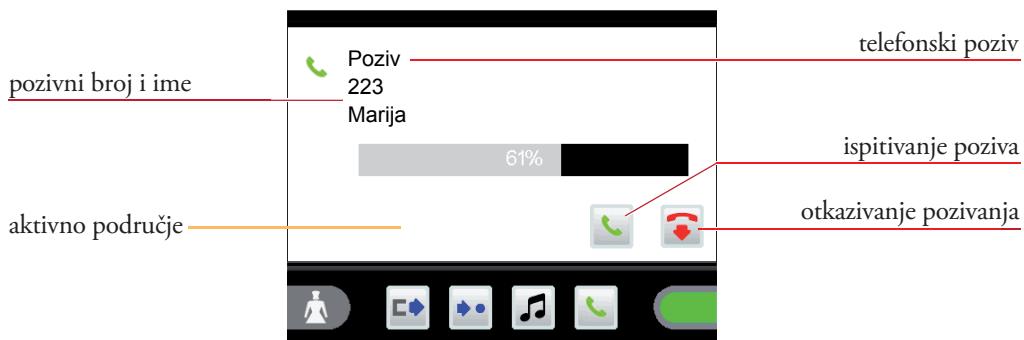

U aktivnom prostoru dodirnite ikonu i uspostavlja se poziv.

Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću.

(12) Čišćenje i dezinfekcija

Terminal za osoblje ST-TOUCH se mora čistiti isključivo sredstvima za dezinfekciju koja ne sadrže ketone ili estere, djelomično ili u cijelosti. U svrhu dezinfekcije trebao bi se koristiti postupak dezinfekcije brisanjem – ni u kom slučaju ne bi trebalo koristiti postupak dezinfekcije uranjanjem.

Ukoliko su sredstva za dezinfekciju kontaminirana, uređaje je potrebno ponovno očistiti te dezinficirati prije slanja na popravak u skladu sa ovim uputama.

(13) Upotreba i održavanje

Upotreba sustava VISOCALL IP podliježe uvjetima Članka 9 norme DIN VDE0834 Dio 1. Stoga koristimo ovu priliku da istaknemo da ovaj članak, među ostalim, zahtjeva provedbu periodičkih provjera i održavanja koje ćemo rado obaviti za vas.



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com



Czech Rep. • CZ-149 00 Prague 4 - Újezd., Štírová 283 • Tel. +420 2 74784422
Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel. +36 1 4644300
India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel. +91 124 4141501
Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinium V • Tel. +48 22 3300620
Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A et. 1, Sector 2 • Tel. +40 372 756316
Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaia 5 • Tel. +7 495 5105015
Slovakia • SK-83527 Bratislava-Rača, Mudrochova 2 • Tel. +421 2 44635595
Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel. +46 8 6801860
Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel. +90 216 3455199

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET