




Ručni govorni pozivnik za pacijente PAT

Korisnički priručnik

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Pregled

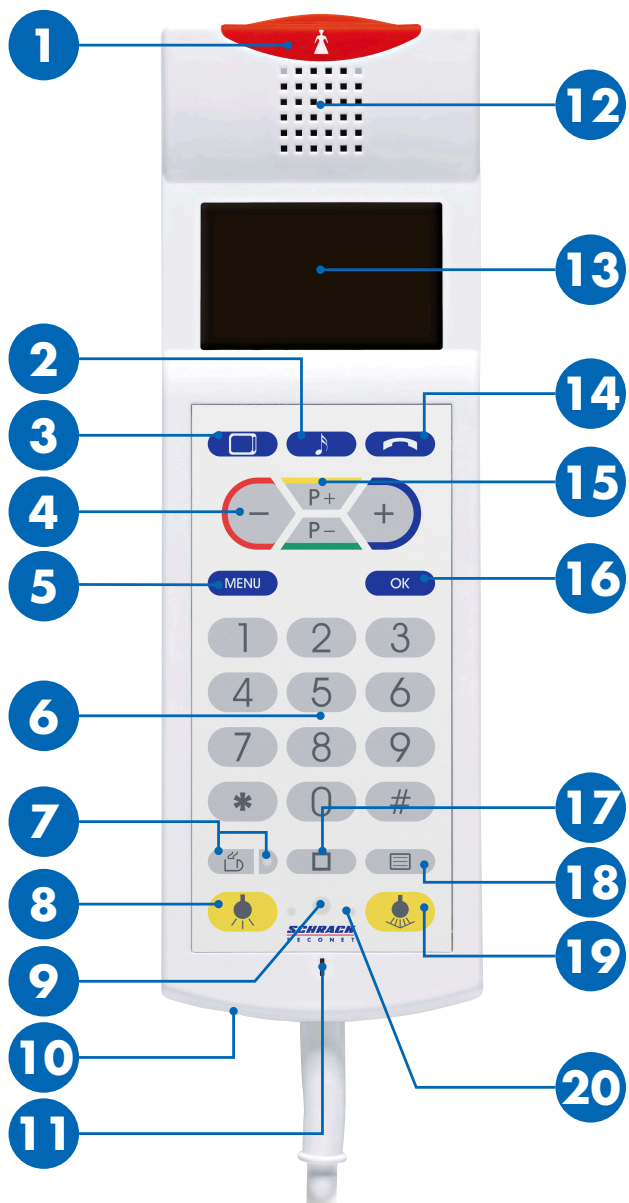

1	Pozivno tipkalo
2	Tipka za radio-prijemnik
3	Tipka za TV
4	-/+ tipka
5	Tipka za izbornik
6	Numerička tipkovnica
7	Tipkalo za poziv radi usluge sa LED svjetlom za uočavanje
8	Sobno svjetlo
9	Infracrveni prijemnik (opcionalno)
10	Spajanje slušalice
11	Mikrofon
12	Zvučnik
13	Ekran
14	Tipka za telefon
15	Tipke za odabir programa
16	Tipka za potvrdu
17	Tipka za dodatne funkcije
18	Tipka za teletekst
19	Svjetlo za čitanje
20	LED svjetlo za uočavanje



OPREZ


Ne koristiti kao oslonac pri ustajanju iz kreveta

Ne koristiti kablove i uređaje kao oslonac pri ustajanju iz kreveta. Nemojte se podizati iz kreveta koristeći uređaje kao oslonac.

Poziv medicinskom osoblju


Pozivna tipka  1 konstantno svijetli radi uočavanja u mraku.

Pozivanje medicinskog osoblja

Pritisnite tipku  1.

► Pozivna tipka  1 zaszvietli.

Odgovor medicinskog osoblja

1. Zvučni signal putem zvučnika  12 i pozivna tipka bljeska.
2. Koristite govorne pozivnike za pacijente za razgovor sa medicinskim osobljem.
3. Medicinsko osoblje prekida poziv na kraju razgovora.

Poziv za uslugu


LED svjetlo konstantno svijetli radi uočavanja u mraku.

Pritisnite tipku za poziv radi usluge  7.


► LED svjetlo poziva radi usluge  7 zaszvietli.

Servisno osoblje će uzvratiti poziv ili doći osobno.

Uključenje / isključenje svjetla


LED svjetla  20 konstantno svijetle radi uočavanja u mraku.

Sobno svjetlo (opcionarno)

Kratko pritisnite tipku za sobno svjetlo  8.

► Sobno svjetlo je uključeno / isključeno.







Svjetlo za čitanje (opcionarno)

Kratko pritisnite tipku za svjetlo za čitanje  19.







► Svjetlo za čitanje je uključeno / isključeno.

Funkcije izbornika








Postavljanje razine osvjetljenja ekrana

1. Pritisnite tipku **IZBORNIK**  5.
2. Odaberite **Osvjetljenje** na ekranu  13 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-**  15.
3. Potvrdite sa **OK** tipkom  16.
4. Postavite razinu osvjetljenja ekrana pomoću **- / +** tipki  4.
5. Pomoću tipke **IZBORNIK**  5 izlazi se iz izbornika.







Postavljanje razine kontrasta ekrana

1. Pritisnite tipku **IZBORNIK**  5.
2. Odaberite **Kontrast** na ekranu  13 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-**  15.
3. Potvrdite sa **OK** tipkom  16.
4. Postavite razinu kontrasta ekrana pomoću **- / +** tipki  4.
5. Pomoću tipke **IZBORNIK**  5 izlazi se iz izbornika.

Postavljanje razine glasnoće

1. Pritisnite tipku **IZBORNIK**  5.
2. Odaberite **Glasnoća** na ekranu  13 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-**  15.
3. Potvrdite sa **OK** tipkom  16.
4. Odaberite za koju funkciju treba postaviti glasnoću pomoću tipke za odabir programa **P+ / P-**  15.
5. Postavite razinu glasnoće pomoću **- / +** tipki  4.
6. Pomoću tipke **IZBORNIK**  5 izlazi se iz izbornika.

Izbor zvuka zvona

1. Pritisnite tipku **IZBORNIK**  5.
2. Odaberite **Zvuk zvona** na ekranu  13 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-**  15.
3. Potvrdite sa **OK** tipkom  16.
4. Odaberite zvuk zvona pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-**  15.
5. Pomoću tipke **IZBORNIK**  5 izlazi se iz izbornika.

Dodatne funkcije

TV

Uključiti / isključiti TV

Pritisnite tipku za TV  3 za uključenje / isključenje uređaja.

- ▶ TV uređaj je uključen i zadnji odabrani kanal prije isključenja prikazat će se na ekranu 13.

Biranje kanala


Unesite broj kanala pomoću numeričke tipkovnice 6 ili izaberite sljedeći kanal pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 15.

Postavljanje vrste zvuka i razine glasnoće

Zvuk putem zvučnika 12 ili slušalice (priključna utičnica 10).


Postavite razinu glasnoće pomoću -/+ tipki 4.

Prikaz teleteksta

1. Pritisnite tipku za teletext  18 za uključenje / isključenje teleteksta.
2. Unesite broj stranice pomoću numeričke tipkovnice 6 ili izaberite sljedeću stranicu pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 15.

Radio-prijemnik

Uključiti / isključiti radio-prijemnik

Pritisnite tipku za radio-prijemnik  2 za uključenje / isključenje radio-prijemnika.

- ▶ Radio-prijemnik je uključen i zadnja odabrana stanica prije isključenja prikazat će se na ekranu 13.

Biranje kanala

Unesite broj kanala pomoću numeričke tipkovnice 6 ili izaberite sljedeći kanal pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 15.



Postavljanje vrste zvuka i razine glasnoće

Zvuk putem zvučnika 12 ili slušalice (priključna utičnica 10).



Postavite razinu glasnoće pomoću -/+ tipki 4.

Telefon



Prihvata poziva

1. Prihvatite dolazni poziv pomoću tipke za telefon  14.
2. Postavite razinu glasnoće pomoću -/+ tipki 4.
3. Pritisnite tipku za telefon  14 za prekid poziva na kraju razgovora.


Upućivanje poziva / telefoniranje

1. Pritisnite tipku za telefon  14.
2. Pritisnite numeričku tipku za vanjsku telefonsku liniju (uobičajno 0, molimo provjeriti sa osobljem).
3. Birajte telefonski broj pomoću numeričke tipkovnice 6.
4. Potvrdite sa **OK** tipkom 16.
5. Pritisnite tipku za telefon  14 za prekid poziva na kraju razgovora.

Ponovno pozivanje zadnjeg biranog broja

1. Pritisnite tipku za telefon  14.
2. Zadnjih deset biranih telefonskih brojeva prikazani su na ekranu 13.
3. Birajte željeni broj pomoću -/+ tipki 4.
4. Potvrdite sa **OK** tipkom 16.
5. Pritisnite tipku za telefon  14 za prekid poziva na kraju razgovora.

Upravljanje roletama

1. Pritisnite tipku za dodatne funkcije  17.
2. Odaberite **Rolete** na ekranu 13 pomoću tipki za odabir programa **P+ / P-** 15.
3. Upravljanje roletama pomoću -/+ tipki 4.

Infracrveni prijemnik

Infracrveni prijemnik omogućuje daljinsko upravljanje svjetlom/roletama putem govornih pozivnika za pacijente / slušalice.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

HR

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET